

Aktywna orteza SeaboFlex





Opis produktu:

SaeboFlex stanowi innowacyjną **aktywną ortezę**, która pełni kluczową rolę w procesie **rehabilitacji pacjentów** dotkniętych **udarem mózgu** czy **wylewem**. Urządzenie pomaga odzyskać kontrolę i sprawność w osłabionej dłoni. Orteza umożliwia aktywne prostowanie palców, otwierając pacjentom drzwi do samodzielnego chwytania przedmiotów, często po raz pierwszy od momentu zachorowania.

Wczesne rozpoczęcie **rehabilitacji**, które obejmuje **aktywne wykorzystywanie ręki do chwytania**, przynosi największe korzyści w powrocie do normalnej funkcjonalności. Ponadto, używanie osłabionej ręki do wykonywania codziennych czynności stanowi znakomitą motywację dla pacjentów oraz stymuluje proces regeneracji mózgu.

Formularz zamówienia znajdziesz w załącznikach lub pobierzesz klikając tutaj

Zdjęcia produktu:

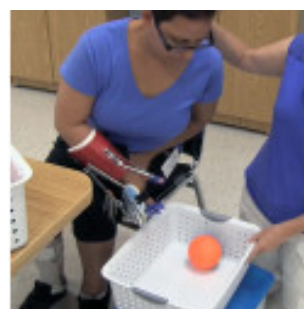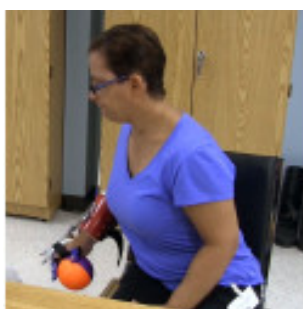

Szczegółowy opis produktu:

Aktywna orteza SeaboFlex

SaeboFlex to **orteza**, która pomaga pacjentowi odzyskać umiejętność chwytania i używania ręki. Dzięki intensywności i unikalnej funkcjonalności wykonywanych ćwiczeń pacjent skutecznie pobudza swój mózg do procesów naprawczych, a ręka wraca do sprawności. Dzięki dynamicznej ortezie SaeboFlex rehabilitacja po udarze mózgu, wylewie czy urazie czaszkowo-mózgowym zyskuje nową jakość. Orteza umożliwia pacjentom intensywne, samodzielne ćwiczenia ręki w domu, co do tej pory nie było możliwe.

Jak długo używać aktywnej ortezy SaeboFlex?

Sugeruje się 2 sesje po 45 min dziennie poświęcone na **chwytanie i puszczanie przedmiotów**. Dobór wykonywanych ćwiczeń należy skonsultować z przeszkolonym terapeutą Saebo co pozwoli wybrać najskuteczniejszy program dla każdego chorego. Po każdej 45 min. sesji ćwiczeń powinno się **zdejść ortezę SaeboFlex** na co najmniej 30 min.

Zalety używania ortezy SeaboFlex

- Samodzielne ćwiczenia w domu
- Unikalna intensywność rehabilitacji
- Używanie ręki do naturalnej funkcji czyli chwytu
- Duża motywacja do ćwiczeń
- Biofeedback z realnego środowiska ćwiczeń
- Duża stymulacja mózgu do odbudowy funkcji używania ręki

Wskazania do używania ortezy SeaboFlex

- SaeboFlex jest przeznaczony dla pacjentów po udarze, urazie czaszkowo-mózgowym lub urazie rdzenia kręgowego.
- Każdy pacjent, u którego występuje zaciskanie się palców (napięcie w zginaczach palców).
- Wszyscy pacjenci z brakiem lub ograniczeniem ruchu otwierania palców w wyniku spastyczności.

Przeciwwskazania

- Poważne deformacje stawów ręki lub łokcia.
- Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS).
- Umiarkowany lub znacznego stopnia obrzęk dłoni.
- Otwarte rany.
- Brak logicznej komunikacji lub problem ze zrozumieniem wykonania podstawowych poleceń.

Informacje:

Model: