


Urządzenie do trakcji Saunders Cervical Home Traction

Opis produktu:

Przenośne, pneumatyczne urządzenie służące rehabilitacji przez **trakcję szyjnego odcinka kręgosłupa**. Siła aplikowana jest na kość potyliczną poprzez ruchome kliny.



Zdjęcia produktu:

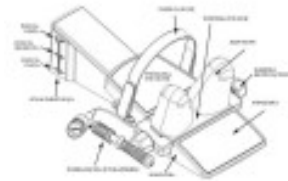

Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie do trakcji Saunders Cervical Home Traction

Urządzenie pozwala na terapię między innymi:

- **przepukliny kręgów szyjnych,**
- **zmniejsza napięcie mięśni szyi i usuwa związane z nimi bóle głowy.**

Saunders to innowacyjne urządzenie zaprojektowane przez renomowanego fizjoterapeutę Duane Saunders. Dzięki wieloletniej praktyce w terapii bólu pleców zawarł w urządzeniu funkcje pozwalające skutecznie odciążyć terapeutę a także stosować urządzenie w warunkach domowych.

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby **nacisk** powstawał wyłącznie w **miejscach bezpiecznych dla pacjenta**, tj. **z tyłu głowy** a nie pod brodą. (Urządzenia wywierające nacisk na okolice brody mogą zaszkodzić pacjentowi i należy ich bezwzględnie unikać.) Maksymalna wartość ciśnienia trakcji jest założona z góry, dzięki czemu pacjent nie ma możliwości użycia urządzenia w sposób szkodliwy.

Sposób użycia Saunders Cervical Home Traction:

- Pacjent kładzie się na plecach na płaskiej powierzchni z głową pomiędzy boczками urządzenia. Wałek pod głową delikatnie odciąga głowę od reszty ciała, siła ciągu jest regulowana za pomocą ręcznej pompki ze wskaźnikiem siły trakcji.
- Zalecany czas użycia urządzenia do trakcji to 10-20 minut. Jeżeli jest to pierwsze użycie, czas należy skrócić do sesji 5-10 minut, a sesję można powtórzyć po 24 godzinach.
- Praktyką podnoszącą skuteczność oddziaływania trakcji jest zmiana wartości ciśnienia podczas zabiegu, łatwo kontrolowana przez ręczną pompkę ze wskaźnikiem siły.

Możliwości urządzenia Saunders Cervical Traction:

- bezpośrednie skierowanie siły rozciągającej przez potylicę, zapobiegające obciążeniom stawów skroniowo-żuchwowych,
- komfortowe aplikowanie siły trakcyjnej nawet do 20 kg,
- wygodne i w pełni stabilne ułożenie pacjenta w trakcie zabiegu w pozycji leżenia tyłem,

Zestaw do trakcji Saunders Cervical Home Traction:

- możliwość swobodnego transportowania i stosowania zestawu np.: w domu pacjenta,
- prosta, nie wymagająca osoby trzeciej obsługa pozwalająca na samodzielne stosowanie zabiegu w warunkach domowych,
- łatwa w montażu stopka umożliwiająca wykonanie zabiegu pod kątem 15, 20 lub 25°,
- prosty pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły, który daje możliwość prowadzenia trakcji zarówno w sposób statyczny jak i przerywany,
- możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej (jednostronnej),
- komfortowe, regulowane na szerokość, obracające się kliny, łatwo dopasowujące się do indywidualnego kształtu głowy pacjenta (możliwość mycia i dezynfekcji), łatwe w demontażu,

Parametry techniczne:

Siła trakcji	1 - 20
Aplikacja trakcji	pneumatyczne
Ustawienia kąta zabiegu[°]	15, 20, 25
Rodzaj trakcji	statyczna, przerywana, symetryczna i asymetryczna (jednostronna)
Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]:	56 x 16 x 15
Waga	5,5

Informacje:

Model: