

Nadstawka toaletowa Mia

Dziękujemy za zaufanie firmie Vermeiren i jej produktom. Niniejsza instrukcja pomoże właścicielowi w eksploatacji produktu i korzystaniu. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi. W razie pytań, które nie zostały omówione w instrukcji, prosimy o kontakt z Państwa wyspecjalizowanym sprzedawcą. W naszej witrynie internetowej <http://www.vermeiren.com/> zawsze można znaleźć najnowszą wersję następujących informacji. Prosimy regularnie odwiedzać witrynę, ponieważ możemy w niej zamieszczać zaktualizowane informacje. Osoby niewidome lub niedowidzące mogą pobrać elektroniczną wersję niniejszej instrukcji i odsłuchać ją w aplikacji syntezatora mowy.

1 Przy dostawie

Dostarczony produkt należy rozpakować i sprawdzić, czy zawiera wszystkie elementy. W zestawie powinny znajdować się:

- 1 nadstawka toaletowa z pokrowcem
- 2 regulatory szerokości
- Opcjonalnie: poduszka na toaletę
- Instrukcja obsługi

Sprawdź, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń po dostawie skontaktować się z firmą transportową.

2 Montaż i użytkowanie nadstawki toaletowej


PRZESTROGA

Ryzyko obrażeń

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy nadstawka jest dobrze przymocowana do toalety.
- Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie nadstawki, poluzuj i dokręć regulację szerokości raz w tygodniu.
- Nie przekraczaj maksymalnej masy użytkownika.

Wskazania i przeciwwskazania: Nasza nadstawka toaletowa została zaprojektowana, aby zwiększyć wysokość sedesu do poziomu jaki jest najbardziej komfortowy dla użytkownika. Dzięki temu łatwiej jest usiąść i wstać, na przykład w przypadku: dysfunkcji kończyn dolnych z powodu ograniczonej lub braku ruchomości stawów, zmniejszonej siły mięśniowej w


kończynach dolnych, uszkodzenia kręgosłupa lędźwiowego, uszkodzenia układu nerwowego,... Celem tego produktu jest umożliwienie samodzielnego lub bardziej samodzielnego korzystania z toalety. Przy odpowiednim stosowaniu nie są znane żadne przeciwwskazania.

Mia jest dostępna w dwóch możliwych wysokościach: 10 cm lub 15 cm.

Maksymalna masa użytkownika nadstawki wynosi 225 kg.

Aby zainstalować Mia:

1. Podnieś pokrywę toalety i deskę. Jeśli konieczne, zdejmij pokrywę i siedzisko.
2. Włóż regulatory szerokości (1) na miejsce na nadstawce. Obróć pokrętkę gwieździste zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby nieco zmniejszyć szerokość
3. Umieść nadstawkę na krawędzi deski sedesowej [A] z przednią krawędzią (2) na zewnątrz.
4. Przesuń nadstawkę toaletą do tyłu [B] tak daleko jak tylko jest to możliwe
5. Ręcznie dokręć regulatory szerokości (1).

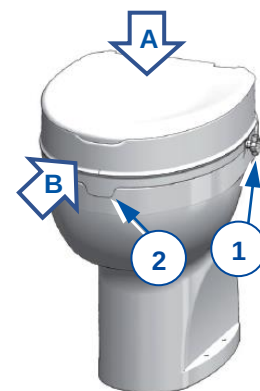

Aby umieścić opcjonalną poduszkę, zdejmij osłonę nadstawki.

Powoli usiądź na nadstawce zginając kolana, jeśli to możliwe to biodra i kolana równocześnie.

3 Konserwacja

Nadstawka toaletowa jest skonstruowana z plastikowych elementów. Uchwyty Mia można czyścić i dezynfekować za pomocą zwykłych domowych środków czyszczących. Należy unikać stosowania żrących substancji, które mogą powodować przebarwienia.

3.1 Przewidziany czas życia

Nadstawka została zaprojektowana z myślą o użytkowaniu go przez średnio 5 lat.

PL