

Rialzo stabilizzante da comodo Stacy

Installate i tubi dello schienale del rialzo utilizzando i pulsanti a scatto.

Inserite la vaschetta nel suo supporto, dalla parte anteriore del rialzo. Assicuratevi che la vaschetta sia posizionata correttamente prima di sedersi.

Regolate l'altezza del rialzo utilizzando i pulsanti a scatto posizionati sulle gambe del rialzo. Assicuratevi che i pulsanti siano ben inseriti nei loro fori. Assicuratevi che tutte le 4 gambe del rialzo sono posizionate alla stessa altezza prima di utilizzarlo.

I braccioli possono essere ribaltati. Per abbassare i braccioli premete il pulsante laterale. Fate attenzione alle vostre dita.

Riportate i braccioli in posizione. Uno suono di "click" garantisce che i braccioli siano bloccati con sicurezza.

! Se non siete certi sull'utilizzo del rialzo chiedete assistenza al vostro rivenditore.


! Peso massimo dell'utilizzatore: 130 kg.

Il rialzo stabilizzante da comodo Stacy può essere pulito con un normale prodotto di pulizia. Evitate prodotti aggressivi che possono scolorire il prodotto.

Dimensioni:

- larghezza: 57 cm
- lunghezza: 53 cm
- altezza totale (con coperchio alzato): 80-95 cm
- altezza sedile: 44-59 cm
- regolazione delle gambe: 15 cm
- larghezza sedile: 45 cm
- profondità sedile: 45 cm
- altezza braccioli: 23 cm
- altezza schienale: 24 cm
- peso totale: 8,6 kg

pulsante per ribaltare
i braccioli

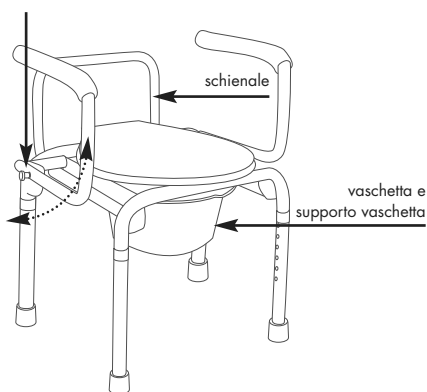

Modifiche tecniche riservate. © 2016

VERMEIREN
Mobilità illimitata



Inodoro Stacy

Coloque el tubo del respaldo por detrás del inodoro con los botones de presión. Asegúrese de que los botones de presión están fijos en los orificios.

Encaje la taza de inodoro en el soporte para la taza y deslicela hacia dentro por la parte delantera. Asegúrese de que la taza esté bien colocada antes de sentarse.

Ajuste la altura del asiento con los botones de presión de las patas. Asegúrese de que los botones de presión están fijos en los orificios. Compruebe también que las cuatro patas están a la misma altura antes de utilizarlo.

Los reposabrazos pueden plegarse. Para bajarlos, pulse los botones laterales. Tenga cuidado con los dedos.

Vuelva a subir los reposabrazos. Oirá un "clic" cuando queden bloqueados en su lugar.

! Pida ayuda si no está seguro de cómo utilizar el producto.


! Peso soportado: 130 kg

El asiento de inodoro Stacy puede limpiarse con productos de limpieza normales. No utilice sustancias agresivas que puedan dañar los colores.

Dimensiones:

- Anchura: 57 cm
- Longitud: 53 cm
- Altura total (con la tapa levantada): 80-95 cm
- Altura del asiento: 44-59 cm
- Ajuste de altura de las patas: 15 cm
- Anchura del asiento: 45 cm
- Profundidad del asiento: 45 cm
- Altura de los reposabrazos: 23 cm
- Altura del respaldo: 24 cm
- Peso total: 8,6 kg

Botón para plegar
el reposabrazos

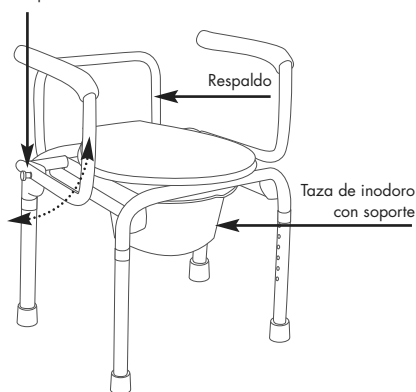

Abriendo nuevos horizontes en movilidad. © 2016

VERMEIREN
Para más movilidad



Taboret toaletowy Stacy

Zainstaluj oparcie z tyłu taboretu używając do tego przycisków. Upewnij się, że przyciski bezpiecznie "siedzą" w otworach.

Wsuń pojemnik toaletowy w uchwyt od przodu taboretu. Przed użyciem upewnij się, że pojemnik jest poprawnie osadzony w uchwycie.

Ustaw wysokość siedziska, używając przycisków do regulacji długości nóg. Upewnij się, że przyciski są pewnie osadzone w otworach. Sprawdź, czy wszystkie cztery nogi mają tę samą długość.

Podłokietniki mogą być odchylane.

Aby opuścić podłokietniki trzeba nacisnąć przycisk. **Należy uważać na palce!!!**

Podnieś podłokietniki ponownie. Charakterystyczne kliknięcie pojawi się, kiedy podłokietniki w sposób pewny zostaną zablokowane w zamku.

! Poproś o pomoc w przypadku, jeśli nie wiesz jak korzystać z produktu.


! Waga użytkownika: 130 kg

Do czyszczenia taboretu STACY należy używać ogólnodostępnych, domowych środków czyszczących. Nie używać preparatów żrących, które mogą spowodować uszkodzenia i odbarwienia.

Wymiary:

- Szerokość: 57
- Długość: 53
- Całkowita wysokość (z pokrywą): 80-95 cm
- Wysokość siedziska: 44-59 cm
- Regulacja nóg: 15 cm
- Szerokość siedziska: 45 cm
- Głębokość siedziska: 45 cm
- Wysokość podłokietników: 23 cm
- Wysokość oparcia: 24 cm
- Waga całkowita: 8,6 kg

Przycisk opuszczania
podłokietników

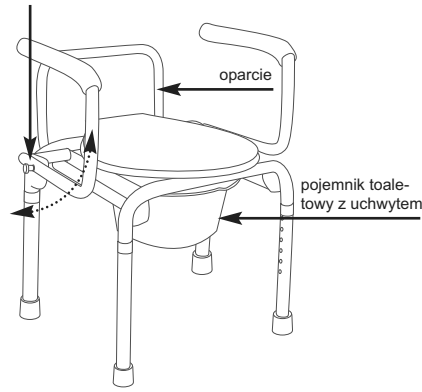

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niektórych parametrów. © 2016

VERMEIREN
Tworzymy nowe możliwości



VERMEIREN

België

N.V. Vermeiren N.V.
Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

Deutschland

Vermeiren Deutschland GmbH
Wahlerstraße 12 a - D-40472 Düsseldorf
Tel: +49(0)211 94 27 90 - Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de - e-mail: info@vermeiren.de

France

Vermeiren France S.A.
Z. I., 5, Rue d'Ennevelin - F-59710 Avelin
Tel: +33(0)3 28 55 07 98 - Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr - e-mail: info@vermeiren.fr

Österreich

Vermeiren Austria GmbH
Schärdinger Straße 4 - A-4061 Pasching
Tel: +43(0)7229/64900 - Fax: +43(0)7229/64900-90
website: www.vermeiren.at - e-mail: info@vermeiren.at

Italia

Vermeiren Italia S.R.L.
Viale delle Industrie 5 - I-20020 Arese (MI)
Tel: +39 02/997707 - Fax: +39 02/93585617
website: www.vermeiren.it - e-mail: info@vermeiren.it

Schweiz

Vermeiren Suisse S.A.
Eisenbahnstrasse 62 - CH-3645 Gwatt (Thun)
Tel: +41(0)33 335 14 75 - Fax: +41(0)33 335 14 67
website: www.vermeiren.ch - e-mail: info@vermeiren.ch

Polska

Vermeiren Polska Sp. z o.o.
ul. Łączna 1 - PL-55-100 Trzebnica
Tel: +48(0)71 387 42 00 - Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl - e-mail: info@vermeiren.pl

Nederland

Vermeiren Nederland B.V.
Correspondentieadres: Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

España

Vermeiren Iberica, S.L.
Carretera de Castellá, Km. 0,5 - Sant Gregori P.I. - Edifici A
ES-17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 428 433 - Fax: +34 972 405 054
website: www.vermeiren.es - e-mail: info@vermeiren.es

Česká republika

Vermeiren ČR S.R.O.
Nadrazní 132 - 702 00 Ostrava
Tel: +420 596 133 923 - Fax: +420 596 133 277
website: www.vermeiren.cz - e-mail: info@vermeiren.cz

Manufacturer

Vermeiren Group
Vermeirenplein 1 / 15 - B-2920 Kalmthout
Tel: +32(0)3 620 20 20 - Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be - e-mail: info@vermeiren.be

VERMEIREN

Opening up new horizons in mobility



Basic UDI: 5415174 120903Stacy 8Y