




Solmed UNO to lampa przeznaczona do wykonywania zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego. Dodatkowo w zależności od zamierzonego efektu zabiegu, można stosować czerwony lub niebieski filtr barwny, który zmienia charakterystykę promieniowania.

Lampa ma zastosowanie w leczeniu niektórych przewlekłych i podostrych stanów zapalnych oraz zespołów bólowych. Zabieg wykonywany przy pomocy lampy **Solmed** może stanowić przygotowanie przed masażem, terapią manualną, jonoforezą, kinezyterapią. Lampa dostępna jest również w wersji o zwiększonej mocy maksymalnej z dwoma (**Solmed DUO**) lub trzema tubusami (**Solmed TRIO**).

Akcesoria standardowe:

- żarówka (1 szt.),
- filtr czerwony (1 szt.),
- filtr niebieski (1 szt.),
- okulary ochronne duże dla operatora (1 szt.),
- okulary ochronne małe dla pacjenta (1 szt.).

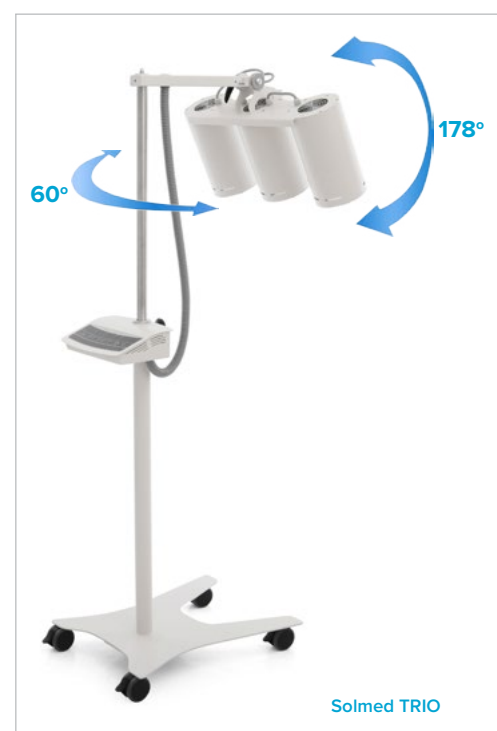

Cechy charakterystyczne:

- emisja światła podczerwonego,
- 1 promiennik (**Solmed UNO**), 2 promienniki (**Solmed DUO**) lub 3 promienniki (**Solmed TRIO**),
- łatwa regulacja położenia tubusa lampy,
- regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej schowanej wewnątrz statywu,
- tubus wyposażony w wewnętrzny odblaskowy promiennik ukierunkowujący światło i minimalizujący straty energii,
- tubus wyposażony w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów,
- siatka zabezpieczająca filtr i żarówkę,
- regulacja mocy promieniowania,
- ustawianie czasu zabiegu,
- pulpit sterujący z przyciskami,
- podstawa jezdna z 4 kołami kierunkowymi z hamulcami,
- niska podstawa lampy umożliwiająca podjazd lampy pod stoły Terapeuta i Galaxy,
- okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty w zestawie.

Dane techniczne:

Regulacja czasu zabiegu [min]:	do 30
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Maksymalna moc (UNO/DUO) [W]:	375/750
Maksymalny pobór mocy (UNO/DUO) [W]:	395/770
Bezpieczniki:	2 x T8AH / 250 V
Moc ustawiana [%]:	10-100
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	74 x 48 x 176
Masa [kg]:	ok. 30

