




**Aquai** wyróżnia się szerokim zakresem zastosowań. Urządzenie używane jest zarówno w centrach odnowy biologicznej oraz salonach fitness, jak i w ośrodkach medical spa & wellness. Doskonale sprawdza się również w centrach rehabilitacji, sanatoriach oraz pokojach do relaksacji w biurach.

W czasie zabiegu strumienie wody, krążąc w obiegu zamkniętym, uderzają w elastyczną membranę, dzięki czemu pacjent może doświadczyć leczniczej mocy hydromasażu na sucho.

### Cechy charakterystyczne:

- dysze do suchego hydromasażu o zwiększonej wytrzymałości,
- możliwość pracy na 3 dyszach jednocześnie lub w strefach,
- regulacja siły masażu,
- regulowana kolejność stref i częstotliwość masażu,
- 6 programowalnych, niezależnych stref,
- łatwo dostępny, kolorowy, dotykowy panel sterowania,
- 6 programów fabrycznych,
- możliwość utworzenia i zapisania programu użytkownika,
- regulacja temperatury (od 30-40°C),
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min),
- zintegrowany system ogrzewania,
- możliwość pracy ciągłej dzięki zintegrowanemu systemowi chłodzenia (składającego się z żebrowanych radiatorów rurowych oraz wydajnych wentylatorów),
- nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- podświetlenie podstawy.

### Strefy masażu:

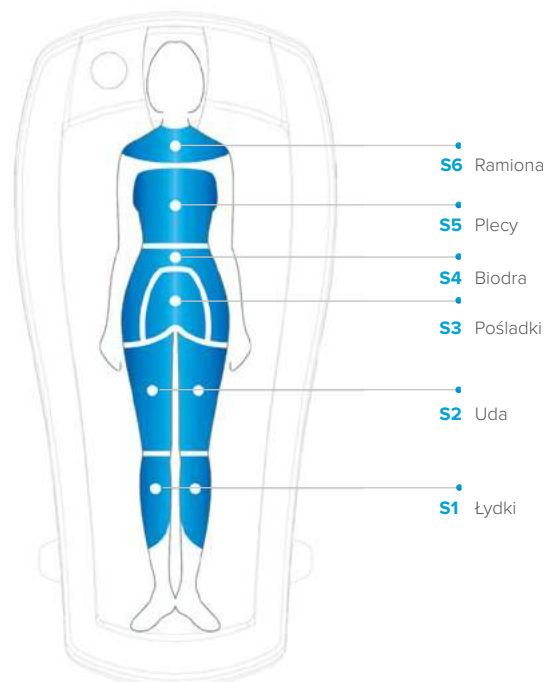



## Dane techniczne:

Długość [cm]:	240
Wysokość [cm]:	65
Szerokość [cm]:	115
Masa (pusty/pełny) [kg]:	190/410
Pojemność [l]:	220

## Zalety zabiegu:

- poprawa krążenia krwi i przemiany materii,
- zwiększenie transportu tlenu w mięśniach,
- zwiększenie zakresu ruchu kończyn,
- zmniejszenie napięcia,
- redukcja stresu i relaks,
- poprawa samopoczucia.

Teraz to Ty decydujesz, która część ciała jest masowana. Proste ustawienie sześciu w pełni niezależnych obszarów pracy pozwala osiągnąć jeszcze lepsze rezultaty terapeutyczne. Możesz wybrać masaż całego ciała dla głębokiej relaksacji, barków w celu zmniejszenia bólu pleców, a także ud i łydek dla usprawnienia ruchów.

Wejść w rewolucyjny świat **Aquai** i zapewnij swoim pacjentom wielowymiarową terapię oraz najwyższy poziom relaksu.



## Opcje dodatkowe:

**AUDIO:** zintegrowany system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń zewnętrznych takich jak: odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

**CARD MANAGER:** system ułatwiający sprzedaż zabiegów przez wykorzystanie kart z kredytem, w zestawie z oprogramowaniem umożliwiającym doładowanie

