

Mobilne krzesło do higieny z regulacją pozycji

MoHiCan II



Maksymalne dopuszczalne obciążenie



Zobacz film: www.bit.ly/3wOSpsJ

Krzesło higieniczno-toaletowe **MoHiCan II** przeznaczone do pomocy w przemieszczaniu oraz wykonywaniu codziennych czynności higieniczno-toaletowych osób o zmniejszonej mobilności.

Dużą zaletą krzesła jest możliwość regulowania wysokości i pochylenia siedziska. Dzięki temu krzesło można umieścić bezpośrednio nad toaletą lub pochylić, aby pacjent przyjął wygodną pozycję np. podczas mycia włosów. Pochylenie do przodu ułatwia komfortowe przejście z pozycji siedzącej do stojącej. Regulacja wysokości daje opiekunowi możliwość uzyskania odpowiedniej wysokości roboczej dla wykonywania różnego rodzaju czynności. Urządzenie rekomendowane do użytku w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy i innych placówkach opieki.

Akcesoria dodatkowe:



Wymowany pojemnik
do zabiegów higieniczno-toaletowych



Pas stabilizacyjny do tułowia
pomaga utrzymać pacjenta w odpowiedniej pozycji



Pas stabilizacyjny do nóg
zapewnia dodatkową ochronę i stabilizację



Dane techniczne:

	Maksymalne obciążenie podnośnika [kg]:	180
	Długość urządzenia [cm]:	87
	Szerokość urządzenia [cm]:	67
	Wysokość uchwyty (min. - maks.) [cm]:	102,2 - 131,5
	Wysokość podnoszenia (min. - maks.) [cm]:	47,6 - 100,5
	Wymiary siedziska [cm]:	42 x 43
	Promień skrętu urządzenia [cm]:	55
	Regulacja pochylenia [°]:	-5 do +26
	Wysokość podnóżka [cm]:	11,2
	Średnica kółek [cm]:	12,5
	Masa podnośnika [kg]:	60
	Pojemność akumulatora [Ah]:	2,9



Elektryczna regulacja wysokości oraz odchylenia siedziska do przodu i do tyłu
komfort dla pacjenta i opiekuna




4 podwójne kółka z hamulcem
bezpieczeństwo i wygoda użytkowania:
hamulce na kółkach blokują niezamierzony
ruch urządzenia, podwójne kółka zapewniają
dobrą skrętność urządzenia



Podłokietniki z możliwością odchylenia
wygoda oraz łatwiejszy dostęp do
pacjenta



Demontowalne siedzisko
ułatwia wykonywanie czynności sanitarnych

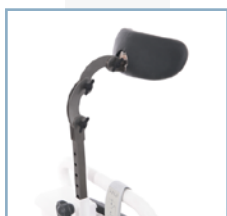

Regulowany zagłówek
zapewnia stabilność głowy dla
większego komfortu pacjenta



Podnóżek
dla większego komfortu pacjenta