


Orionmed to najbardziej uniwersalna wanna do hydroterapii na rynku. Ergonomiczny design zapewnia komfort pacjenta oraz ekonomiczne zużycie wody. Wanna **Orionmed** umożliwia prowadzenie relaksacyjno-leczniczego hydromasażu całego ciała w 3 niezależnych strefach, kąpeli perełkowych oraz wykonywanie manualnego masażu podwodnego biczem.



Długość: **214 cm**




Wysokość: **85 cm**

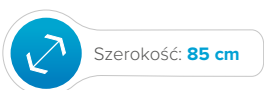

Szerokość: **85 cm**



Masa: **170 kg**

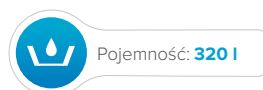

Pojemność: **320 l**


Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmocniana matami z włókna szklanego,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (160-280 l),
- 26 dysz kierunkowych do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy,
- regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzanie dysz,
- 126 dysz powietrznych do masażu perełkowego z regulacją intensywności,
- automatyczne napełnianie,
- łatwo dostępny, kolorowy, dotykowy panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (5-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system dezynfekcji i odkamieniania,
- system usuwania wody z całej instalacji wanny,
- 2 czujniki temperatury wody (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu),
- poręcze na dłonie, profilowane miejsca na kończyny górne i dolne pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała podczas zabiegu,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
- prysznic, zdejmowany zagłówek dla pacjenta, stopień.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	160-280
Pojemność do przelewu [l]:	320
Czas napełniania/spustu [min]:	ok. 4
Pobór prądu [A]:	25
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	214 x 85 x 85
Masa [kg]:	170 (195 z pełnym wyposażeniem)

Strefy zabiegowe:

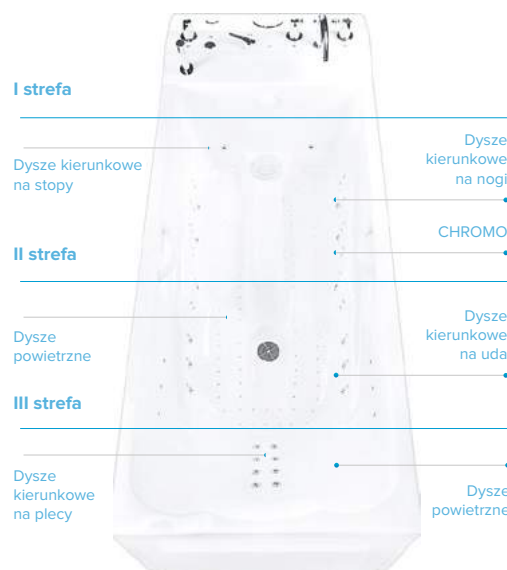

Opcje dodatkowe:

HOSE: bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia

CHROMO 12: 12 pojedynczych źródeł światła

CHROMO 24: 24 pojedyncze źródła światła

CHROMO 36: 36 pojedynczych źródeł światła

AUDIO: system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń zewnętrznych takich jak odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

AROMA: zbiornik na zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku

