


System do podnoszenia oraz transportowania pacjenta za pomocą podnośnika sufitowego, który porusza się po systemie szyn zamontowanych w pomieszczeniu zgodnie z życzeniem klienta. Przeznaczony do placówek służby zdrowia, domów opieki społecznej oraz użytku domowego.

Cechy charakterystyczne:

- łatwość montażu i demontażu podnośnika,
- 3 sposoby mocowania podnośnika LUNA:
 - pionowy (wąskie ułożenie zapewnia więcej miejsca w pobliżu głowy pacjenta),
 - poziomy (umożliwia większą wysokość podnoszenia i lepsze warunki pracy przy przemieszczaniu przez otwory drzwiowe),
 - stały (łatwy i bezpieczny montaż bezpośrednio na szynie - LUNA jako tradycyjny podnośnik sufitowy gwarantuje optymalny transport pacjenta),
- możliwość wykorzystania w jednym lub wielu pomieszczeniach,
- bezpieczne i proste przejście z pokoju do pokoju na 2 sposoby:
 - 2 podnośniki i wieszak,
 - podnośnik,
- specjalny wieszak do mocowania siedziska pokryty materiałem antypoślizgowym,
- przystosowanie do użycia wieszaków 2-, 3- lub 4-punktowych zawieszenia siedziska transportowego,
- specjalny system kontroli prawidłowego zamocowania wieszaka,
- unikalna konstrukcja zaczepów wieszaka zapewniająca ich automatyczne zatrzaśnięcie się pod wpływem działającego ciężaru pacjenta, uniemożliwiająca wypięcie się siedziska podczas transportu,
- elektryczne podnoszenie i opuszczanie pacjenta,
- elektryczne sterowanie transportowaniem pacjenta,
- sterowanie pracą podnośnika: za pomocą pilota lub klawiszy wbudowanych w korpus podnośnika,
- pilot: duży wyświetlacz i proste w użyciu klawisze funkcyjne,
- funkcje awaryjne w pilocie i na korpusie podnośnika,
- specjalna ładowarka ścienna do ładowania akumulatora urządzenia,
- 3 rozmiary szyn,
- przenośne i stacjonarne układy szyn.



Sposoby montowania:

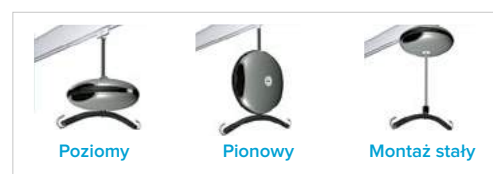

Przejście z pokoju do pokoju:




Zastosowanie 2 podnośników i wieszaka



Zastosowanie podnośnika



Wieszak

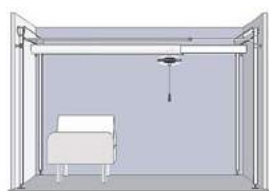

Układ przenośny:

Układ X-Y zapewniający pełne pokrycie powierzchni użytkowej w każdym pokoju. System zawiera 3 szyny teleskopowe i 4 słupki narożne.



Pojedynczy układ stacjonarny:

Szyny proste i zakrzywione.

Dane techniczne:

Długość pasa podnoszącego (maks.) [cm]:	220
Zakres podnoszenia [cm]:	152
Maksymalne obciążenie [kg]:	200-275
Wymiary (dł. x szer.) [cm]:	32 x 13
Waga [kg]:	6,7