




Aquameden to elegancka i solidna wanna do masażu podwodnego za pomocą bicia, która dzięki swej funkcjonalności oraz znakomitemu stosunkowi jakości do ceny stanowi podstawowe wyposażenie sanatoriów i uzdrowisk.



Długość: **235 cm**




Wysokość: **96 cm**

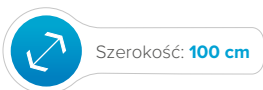

Szerokość: **100 cm**



Masa: **190 kg**

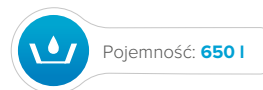

Pojemność: **650 l**

Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmocniana matami z włókna szklanego,
- bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia,
- możliwość zmiany końcówki bicia wodnego zapewniająca różnorodność masażu,
- wskaźnik ciśnienia wody w węży bicia wodnego (do 4,5 bar),
- regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz,
- elektroniczny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (1-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- 2 czujniki temperatury wody (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu),
- czujnik poziomu wody,
- automatyczny system dezynfekcji instalacji wodnej wanny,
- instalacja wodna wykonana z miedzi oraz PVC,
- poręcze na dłonie i podpórki na stopy pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała podczas zabiegu,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
- prysznic,
- stopień ułatwiający wejście do wanny.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	min. 250
Pojemność do przelewu [l]:	550
Czas napełniania/spustu [min]:	6,0/4,5
Ciśnienie wody w biczu [bar]:	0-4,5
Pobór prądu [A]:	10
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	235 x 100 x 96
Wysokość do rantu niecki [cm]:	86
Masa [kg]:	190

Możliwości zabiegowe:

- manualny masaż podwodny z użyciem bicia z płynną regulacją ciśnienia wody,
- hydromasaż z użyciem dysz (opcja JETS 11),
- opcja CHROMO,
- opcja AUDIO.



Dodatkowe opcje wyposażenia:

JETS 11: 11 dysz kierunkowych do hydromasażu automatycznego (2 x 4 boczne + 3 na plecy)

AIR 56: 8 x 7 (56) dysz powietrznych do masażu perełkowego, niezależna pompa powietrza

CHROMO 12: 12 pojedynczych źródeł światła

CHROMO 24: 24 pojedyncze źródła światła

CHROMO 36: 36 pojedynczych źródeł światła

AUDIO: zintegrowany system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń zewnętrznych takich jak odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

AROMA: zbiornik na zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku