

Orionmed Balneo

Wanna do automatycznego hydromasażu balneologicznego




Orionmed Balneo to wanna do hydromasażu i balneoterapii umożliwiająca przeprowadzenie obu zabiegów jednocześnie. Wykorzystuje system 26 kierunkowych dysz do hydromasażu, z armaturą przystosowaną do kąpieli solankowych i odporną na działanie solanki. Niecka wanny balneologicznej **Orionmed Balneo** jest wykonana z wysokiej jakości akrylu wzmocnionego włóknem szklanym. Dotykowy panel sterowania sprawia, że obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta. Wanna precyzyjnie odlicza czas pozostały do końca zabiegu dzięki wbudowanemu zegarowi z licznikiem.




Długość: **214 cm**




Wysokość: **85 cm**

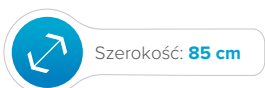

Szerokość: **85 cm**

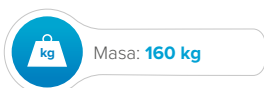

Masa: **160 kg**

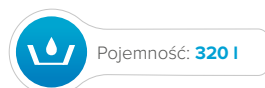

Pojemność: **320 l**

Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w 2 kolorach - biały lub calypso,
- niecka wykonana z wysokiej jakości akrylu, wzmocniana matami z włókna szklanego, odporna na działanie solanki,
- ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu (160-280 l),
- 26 dysz kierunkowych do hydromasażu,
- regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz niezależnie dla stref,
- łatwo dostępny panel sterowania,
- ustawianie czasu zabiegu (5-30 min),
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- system dezynfekcji i odkamieniania,
- system usuwania wody z całej instalacji wanny,
- 2 czujniki temperatury wody (pomiar przy napełnianiu wanny i podczas zabiegu),
- specjalna pompa oraz armatura przystosowana do kąpieli solankowych,
- poręcze na dłonie, profilowane miejsca na kończyny górne i dolne pomagające zachować odpowiednią pozycję ciała podczas zabiegu,
- regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie wanny,
- prysznic, zdejmowany zagłówek dla pacjenta, stopień,
- dodatkowy zawór CO₂ (opcja),
- automatyczny spust wody.

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa [l]:	160-280
Pojemność do przelewu [l]:	320
Czas napełniania/spustu [min]:	<2 / ok. 4
Pobór prądu [A]:	14
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	214 x 85 x 85
Masa [kg]:	160 (175 z pełnym wyposażeniem)

Możliwości zabiegowe:

- balneoterapia: wody chlorkowo-sodowe (solanki), wody termalne, kąpiele z dodatkiem płynnej borowiny,
- kąpiele kwasowęglowe z użyciem saturatora (opcja CO₂),
- hydromasaż balneologiczny lub wodny,
- opcja CHROMO,
- opcja AUDIO,
- kąpiele w piwie.

Wskazania do kąpieli balneologicznych:

- reumatoidalne zapalenie stawów,
- zwyrodnienia stawów,
- fibromialgia,
- choroby układu mięśniowo-szkieletowego.

Dodatkowe opcje wyposażenia:

CO₂: dodatkowy zawór CO₂

CHROMO 12: 12 pojedynczych źródeł światła

CHROMO 24: 24 pojedyncze źródła światła

CHROMO 36: 36 pojedynczych źródeł światła

AUDIO: system audio z głośnikami i wtyczką dla urządzeń zewnętrznych takich jak odtwarzacze mp3, wieże Hi-Fi

