



OKO to elektroniczna, podświetlana tablica okulistyczna do badania ostrości wzroku. Sterowanie pracą tablicy odbywa się bezprzewodowo, przy pomocy niewielkiego pilota na podczerwień.

Cechy charakterystyczne:





- łatwość montażu w gabinecie,
- komfort obsługi,
- skrócenie czasu badania,
- wysoka niezawodność,
- estetyczny wygląd,
- możliwość wymiany optotypu podczas badania pacjenta.

Pilot wyposażony jest w sześć przycisków i umożliwia wykonanie następujących czynności:

- uruchomienie optotypu,
- podświetlenie całego rzędu znaków,
- podświetlenie jednego, wybranego znaku,
- wybór rodzaju podświetlenia,
- zmianę trybu pracy (zaznaczanie wiersza/znaku),
- wygaszanie optotypu,
- wybór kierunku przemieszczania się kursora,
- samoistne wyłączenie podświetlenia tablicy (po 5 min bezczynności).

Dostępne optotypy:

- tablica optotyp cyfry (CN),
- tablica optotyp litery (LN),
- tablica optotyp dłonie (DN),
- tablica optotyp obrazki dla dzieci (ON),
- tablica optotyp Haki Snellena (HN).

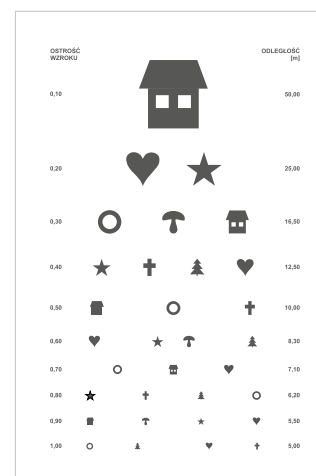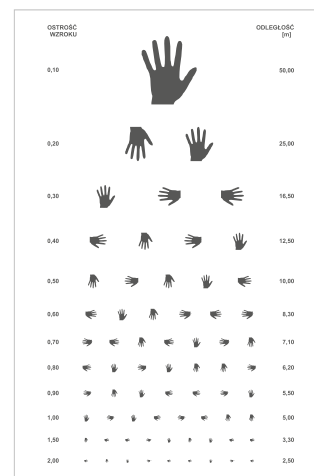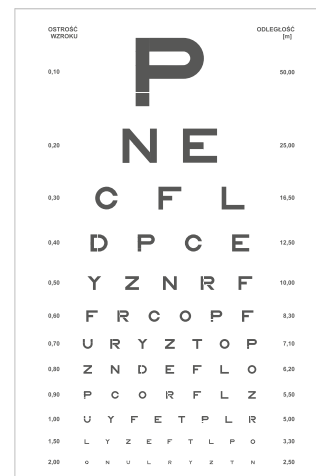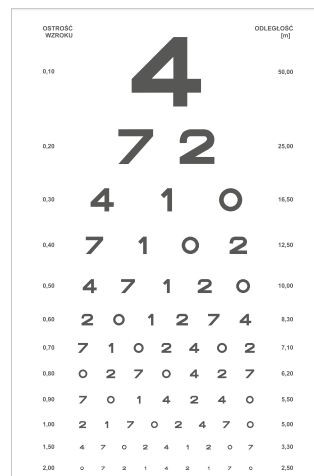

Dane techniczne:

Sterowanie:	pilot na podczerwień
Źródło światła:	LED
Zasilanie [V]:	230
Moc [VA]:	6
Bateria w pilocie:	LR 06-AA, 1,5V, 2 szt.
Wymiary (wys. x szer. x dł.) [cm]:	56 x 39,5 x 6
Masa [kg]:	6
Klasa bezpieczeństwa elektrycznego, typ ochrony:	I, IP 30