



SERIA
5303

PSILIAKOS

KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE
ŁÓŻKA I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.

5303

4-SEKCYJNE ŁÓŻKO SZPITALNE Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI



SPECYFIKACJA

Łóżko elektryczne, wykonane w nowoczesnej technologii z wysokiej jakości trwałych materiałów, odpowiednie do użytku szpitalnego.

- Metalowa rama malowana proszkowo, odporna na płyny dezynfekujące stosowane w szpitalach.
- Powierzchnia leża o wymiarach 200 x 85 cm, składająca się z oparcia pleców, ud i nóg, wykonana ze zdejmowanego, formowanego ABS, odpowiednio zaprojektowana, aby zapewnić łatwe czyszczenie i dezynfekcję. Poszczególne sekcje mogą zostać wymienione w przypadku uszkodzenia.

- Przewodowy kontroler pacjenta, który dostosowuje ruchy sekcji pleców, ud, wzrostu i trendu.

- Mocna konstrukcja z bezpiecznym obciążeniem roboczym 260 kg, bez żadnych ograniczeń ruchu.

- 4 elastyczne odbojniki w rogach łóżka.

- 2 uchwyty do zamocowania wieszaka kroplówki i wysięgnika do podnoszenia się pacjenta.


- Łóżko jest zgodne z europejską dyrektywą IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz dyrektywą medyczną CEE 93/42.





ZAKRES RUCHÓW – WYMIARY

(Łóżko bez stałego zagłówka)

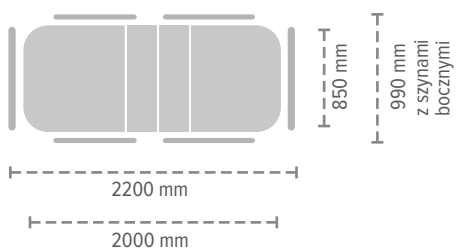


Elektryczna regulacja wysokości
Zakres 450-774 mm



Sekcja oparcia pleców 70°
Elektryczna regulacja



Ręczna regulacja sekcji
oparcia nóg

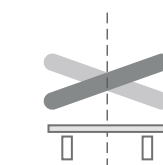

Pochylenie boczne +/- 25°
(opcjonalnie)




Sekcja uniesienia ud i podudzi 32°
Regulacja elektryczna





Trendelenburg 17°
Anti-Trendelenburg 17°
Elektryczna regulacja

DANE TECHNICZNE

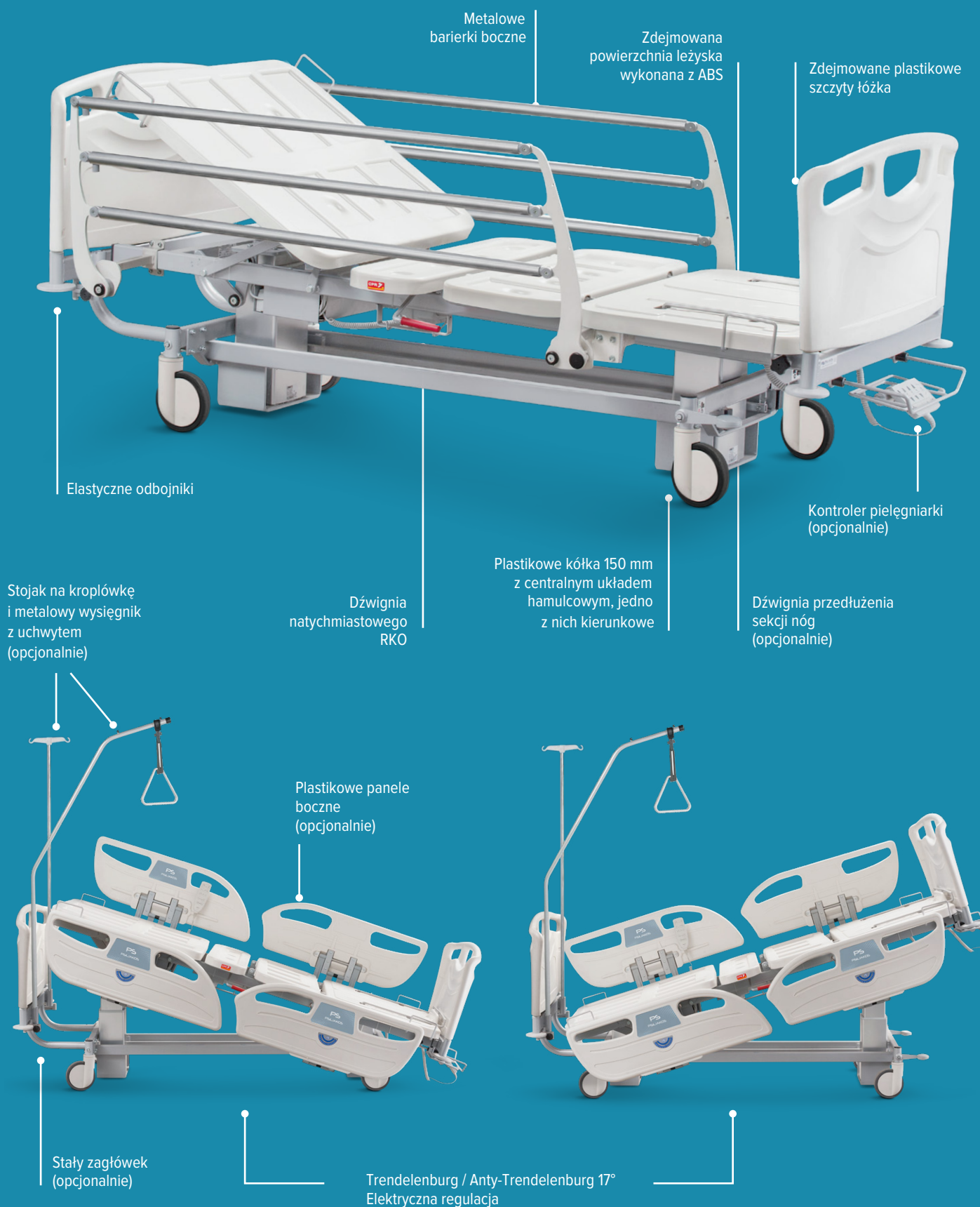

DANE TECHNICZNE

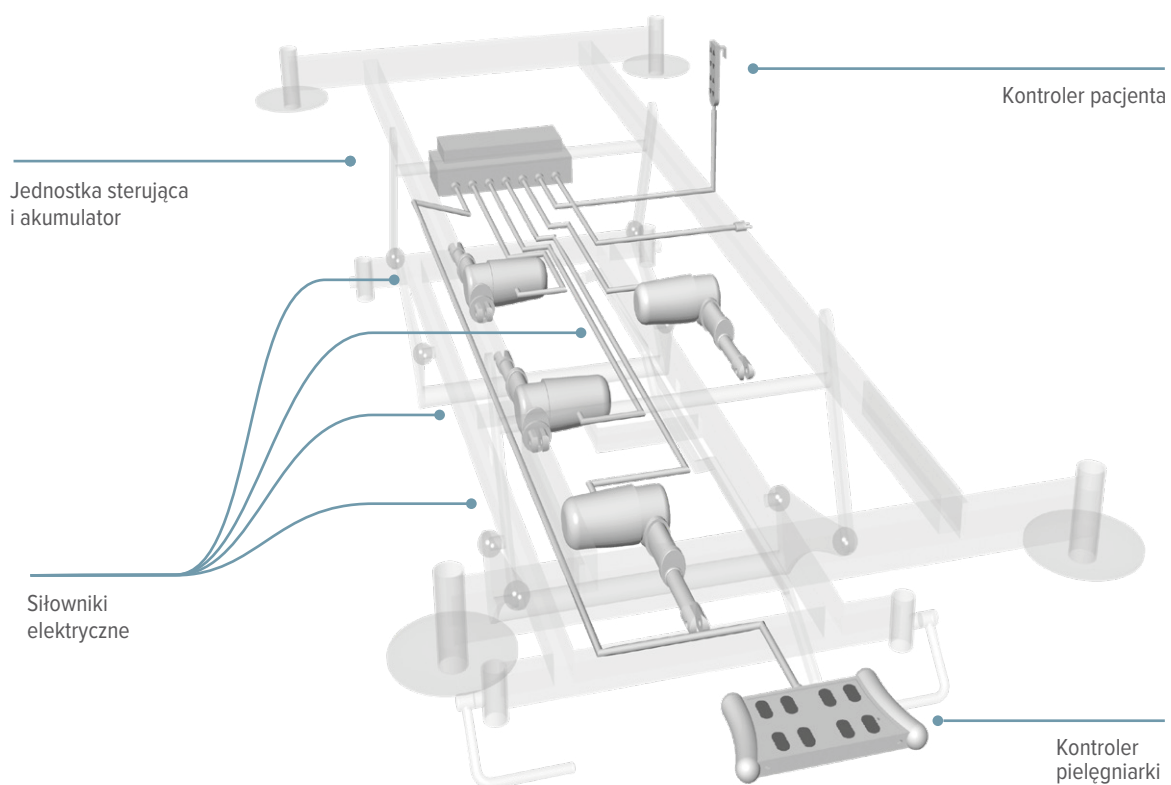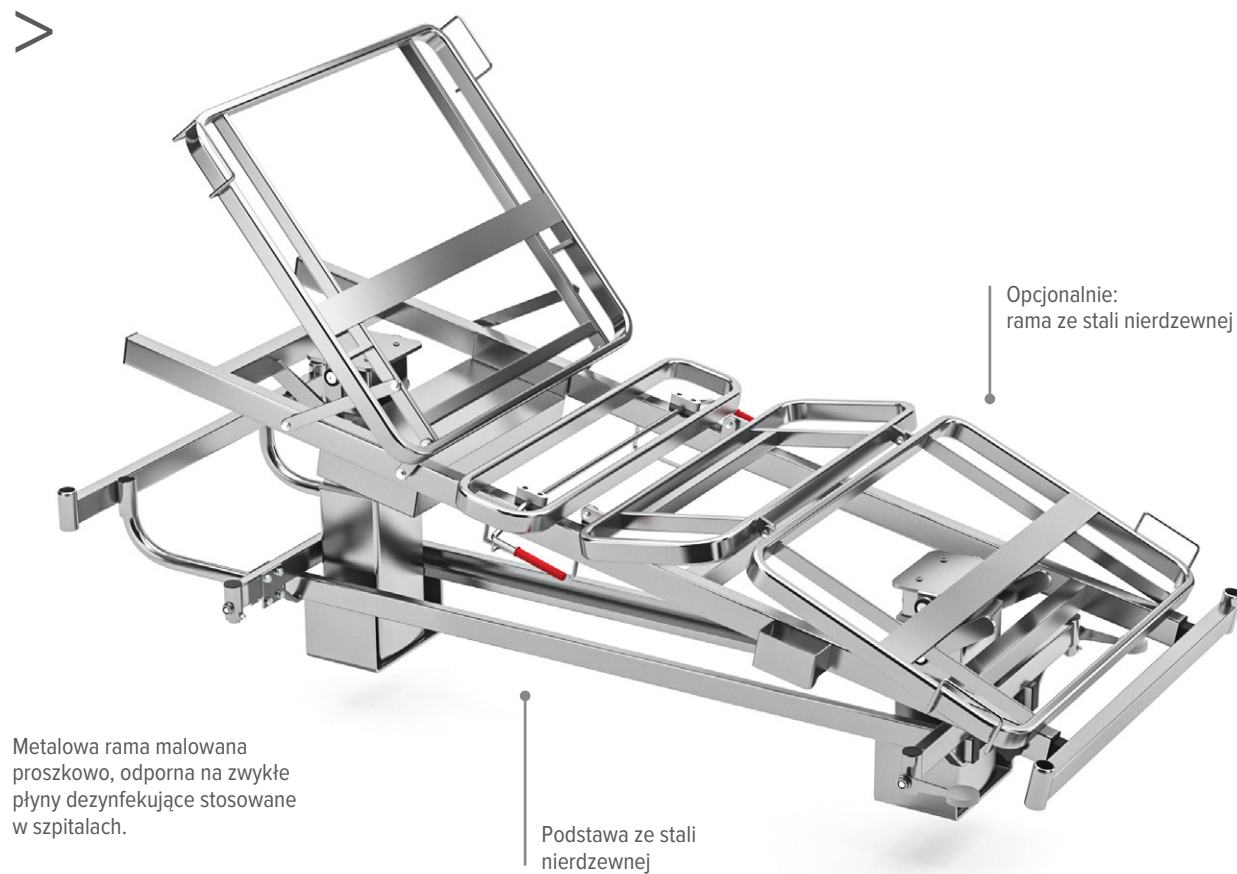

OPCJE PANELI BOCZNYCH



PLASTIKOWE PANELE BOCZNE 3/4 (opcjonalnie)

Dwuczęściowe barierki boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka i pokrywającymi 3/4 długości leżyska.



Wskaźniki kąta

Zintegrowane poziomo do kontroli kąta nachylenia powierzchni leżącej.



PLASTIKOWE PANELE BOCZNE PEŁNEJ DŁUGOŚCI (opcjonalnie)

Dwuczęściowe barierki boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka i pokrywającymi 4/4 długości leżyska.





Wskaźniki kąta

Zintegrowane poziomo do kontroli kąta nachylenia powierzchni leżącej.



BARIERKI BOCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ (wersja podstawowa)

Jednoczęściowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, które podążają za ruchem łóżka i pokrywają 3/4 długości leżyska.

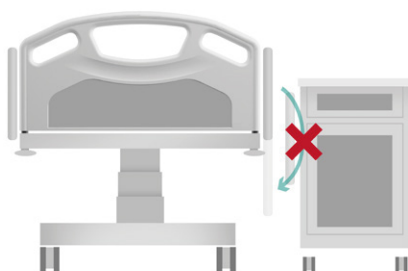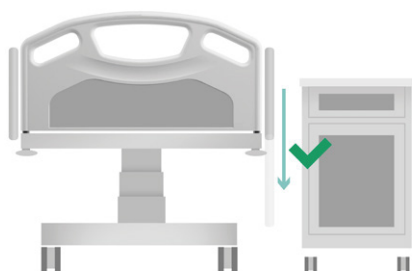

FUNKCJA PANELI BOCZNYCH

Panele boczne składają się pionowo za pomocą mechanizmu sterującego, aby nie zajmować dodatkowej przestrzeni podczas ruchów w górę i w dół oraz aby uniknąć kolizji z meblami znajdującymi się w pobliżu.

PANELE DO WEZGŁOWIA I PODNÓŻKA



PANELE PLASTIKOWE

(wersja podstawowa)

Szczyty łóżka wykonane z nadających się do recyklingu wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące.


(Opcjonalnie: z kolorowymi lub nadrukowanymi panelami)



ALUMINIOWE RAMY Z DREWNIANYMI PANELAMI (opcjonalnie)



PANELE DREWNIANE (opcjonalnie)


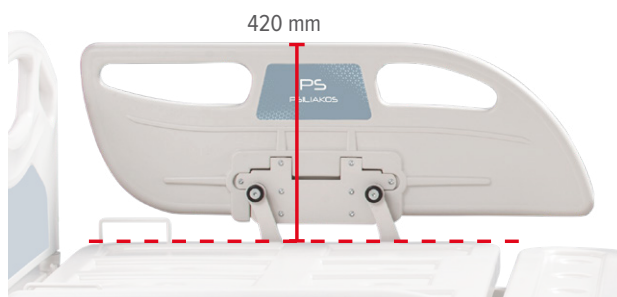


WYSOKOŚĆ PANELI BOCZNYCH

Maksymalna wysokość barierki bocznej od górnej części leża wynosi 420 mm. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo pacjenta.

FUNKCJA PRZESUWANIA PANELI BOCZNYCH

Panele boczne można przesuwając do dołu, co ułatwia bezpośredni dostęp do pacjenta oraz usprawnia poruszanie się po wąskich korytarzach szpitalnych.

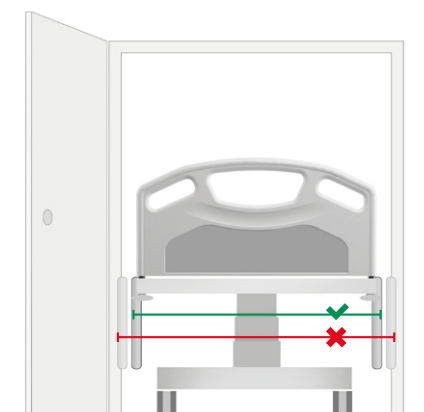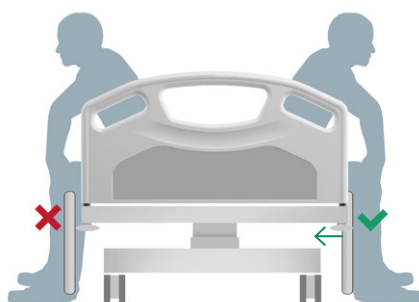


POCHYLENIE BOCZNE



Pochylenie +/- 25°
(opcjonalnie)



WYPOSAŻENIE

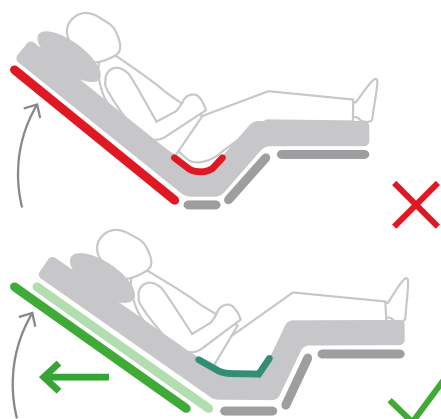

FUNKCJA AUTOKONTUR

Jednoczesne podnoszenie
sekcji pleców i ud.



AUTOMATYCZNA REGRESJA

Część pleców ma wbudowaną funkcję ruchu do tyłu
i odchyła się, aby uniknąć nacisku na okolice
brzucha.



RKO

Mechaniczny system natychmiastowego poziomowania
w nagłych przypadkach RKO znajdujący się po obu
stronach łóżka.

Mechaniczny system RKO można wybrać opcjonalnie, aby
automatycznie wypoziomować łóżko w najniższej pozycji.

PRZEDŁUŻENIE DŁUGOŚCI (opcjonalnie)

Przedłużenie o 18 lub 25 cm dzięki zintegrowanemu
mechanizmowi teleskopowemu.



RENTGEN PLECÓW (opcjonalnie)

Radioprzezierna sekcja oparcia pleców wykonana z laminatu HPL z uchwytem na kasetę.



OŚWIETLENIE NOCNE (opcjonalnie)



5. KOŁO (opcjonalnie)

Aktywacja mechaniczna lub elektryczna.



SZYNA NA AKCESORIA

Szyrna nośna z hakami do montażu różnych elementów wyposażenia.



PRZEWODOWY KONTROLER PACJENTA

Przewodowy kontroler pacjenta, łatwy do wymiany nawet przez niewyspecjalizowany personel (Opcjonalnie: automatyczna blokada po określonym czasie).



ZINTEGROWANE ELEMENTY STERUJĄCE NA PANELU BOCZNYM (opcjonalnie)

Kontroler pacjenta zintegrowany z barierkami bocznymi.



KONTROLER PIELĘGNIARKI (opcjonalnie)

Przewodowy kontroler pielęgniarki do wykonywania wszystkich ruchów.

Kontroler ma możliwość częściowego zablokowania niektórych lub wszystkich ruchów.

Pozycje resuscytacji krążeniowo-oddechowej i fotela cardio mogą być również ustawiane przy pomocy kontrolera.



MECHANIZM BLOKADY RAMY
(opcjonalnie)



STAŁY ZAGŁÓWEK (opcjonalnie)



OCHRONA ANTYBAKTERYJNA
(opcjonalnie)

Przeciwdrobnoustrojowe malowanie części metalowych i przeciwdrobnoustrojowa kompozycja części z tworzyw sztucznych z jonami srebra Ag.



KÓŁKA


Kółka o średnicy 150 mm z centralną blokadą.



ALARM ZABEZPIECZAJACY PRZED PRZECIĄŻENIEM (opcjonalnie)

System ochrony silnika przed przeciążeniem z alarmem dźwiękowym.

System zatrzymuje pracę silników w przypadku, gdy obciążenie przekroczy limit.

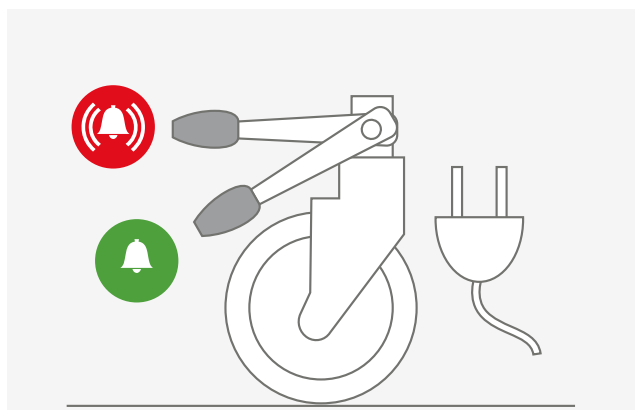

ALARM HAMOWANIA (opcjonalnie)

Alarm dźwiękowy w przypadku podłączenia łóżka do zasilania, a hamulce są wyłączone.

AKCESORIA



UCHWYT NA KARTĘ PACJENTA (opcjonalnie)



MIEJSCE NA POŚCIEL (opcjonalnie)




NIERDZEWNA RAMA WYCIĄGOWA
(opcjonalnie)



METALOWY WYSIĘGNIK Z UCHWYTEM
(opcjonalnie)



STOJAK NA KROPLÓWKĘ
(opcjonalnie)
Stojak na kroplówkę z 2 lub 4 haczykami.

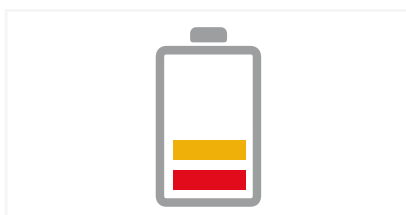

**WSKAŹNIK NISKIEGO STANU
NAŁADOWANIA BATERII**
(opcjonalnie)

Sygnal dźwiękowy informujący
o niskim poziomie naładowania baterii.



BATERIA (opcjonalnie)
Bateria zapewniająca autonomię ruchów
elektrycznych.




WAGA CYFROWA (opcjonalnie)





DOSTĘPNE KOLORY DLA RAM METALOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY



RAL 9002

Szary biały



RAL 9006

Srebrny
aluminowy

DOSTĘPNE KOLORY CZĘŚCI PLASTIKOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY



RAL 1018

Żółty jasny



RAL 3020

Czerwony
kubański



RAL 6019

Seledynowy
średni



RAL 6032

Zielony
sygnałowy



RAL 7040

Szary
popielaty



RAL 5024

Niebieski
pastelowy




RAL 1028

Żółty
melonowy

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.


DOSTĘPNE KOLORY DLA POWIERZCHNI LAMINOWANYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY



2262

Biały



2209

Jasny szary



2235

Szary




2633

Ciemny szary



8533

Ciemny
zielony




2008

Jasny
zielony



2054

Żółty



8514

Niebieski



1619

Tekstura
klonu


POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA



Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosą Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, obecnym w ponad 40 krajach.

Leonidas Psiliakos
Dyrektor generalny

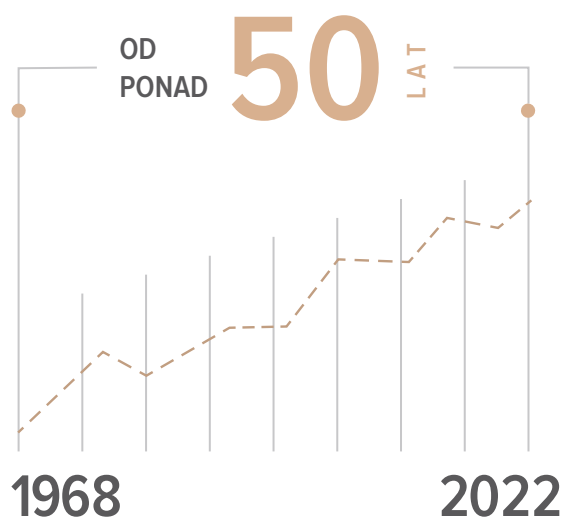

MEDICA Düsseldorf




ZDRAVOOKHRANENIYE Moscow



ARAB HEALTH Dubai

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.: 01012108

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 13485:2003
No.: 01212004

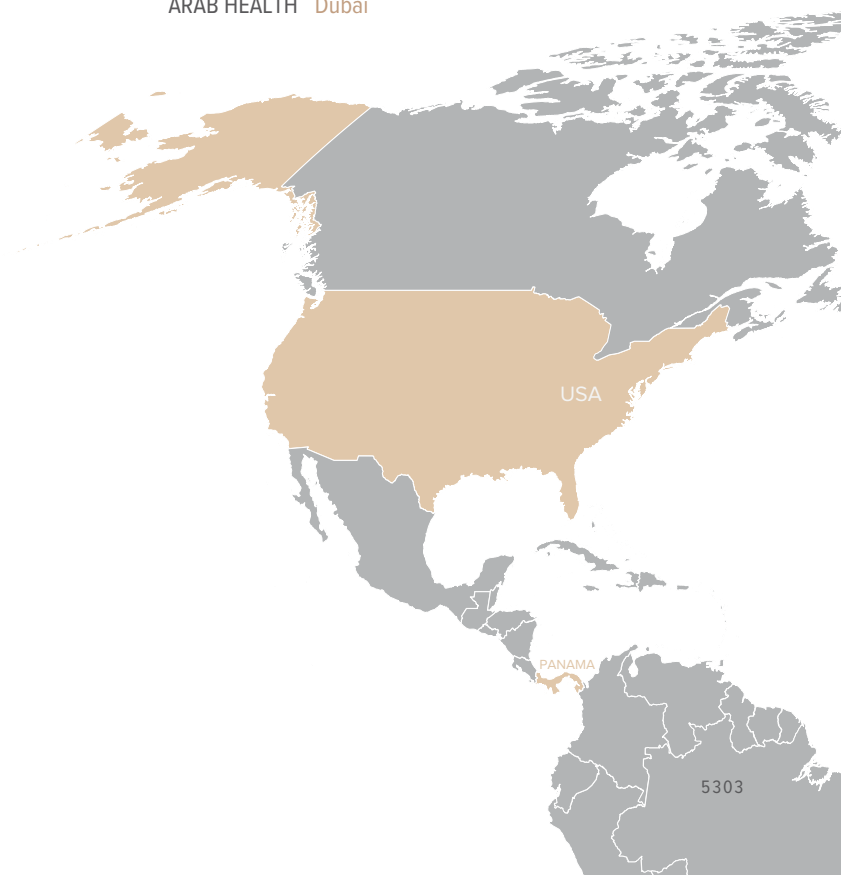

OBECNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA



Nasza firma uczestniczy w najważniejszych międzynarodowych targach.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWA



Nasza elastyczność, długoterminowa konsekwencja, jakość naszych produktów i ich szeroka gama, którą oferujemy, zaowocowały naszą obecnością i realizacją projektów w wielu dużych miastach za granicą.


Działamy w następujących krajach:

Albania
Algeria
Bahrajn
Bułgaria
Wybrzeże Kości Słoniowej
Chorwacja
Cypr
Egipt
Estonia
Francja
Macedonia Północna

Niemcy
Ghana
Iran
Irak
Izrael
Włochy
Jordania
Łotwa
Liban
Litwa
Libia

Malta
Mołdawia
Maroko
Holandia
Nigeria
Ukraina
Panama
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja

Arabia Saudyjska
Skopje
Serbia
Hiszpania
Szwajcaria
Tunezja
ZEA
Wielka Brytania
USA

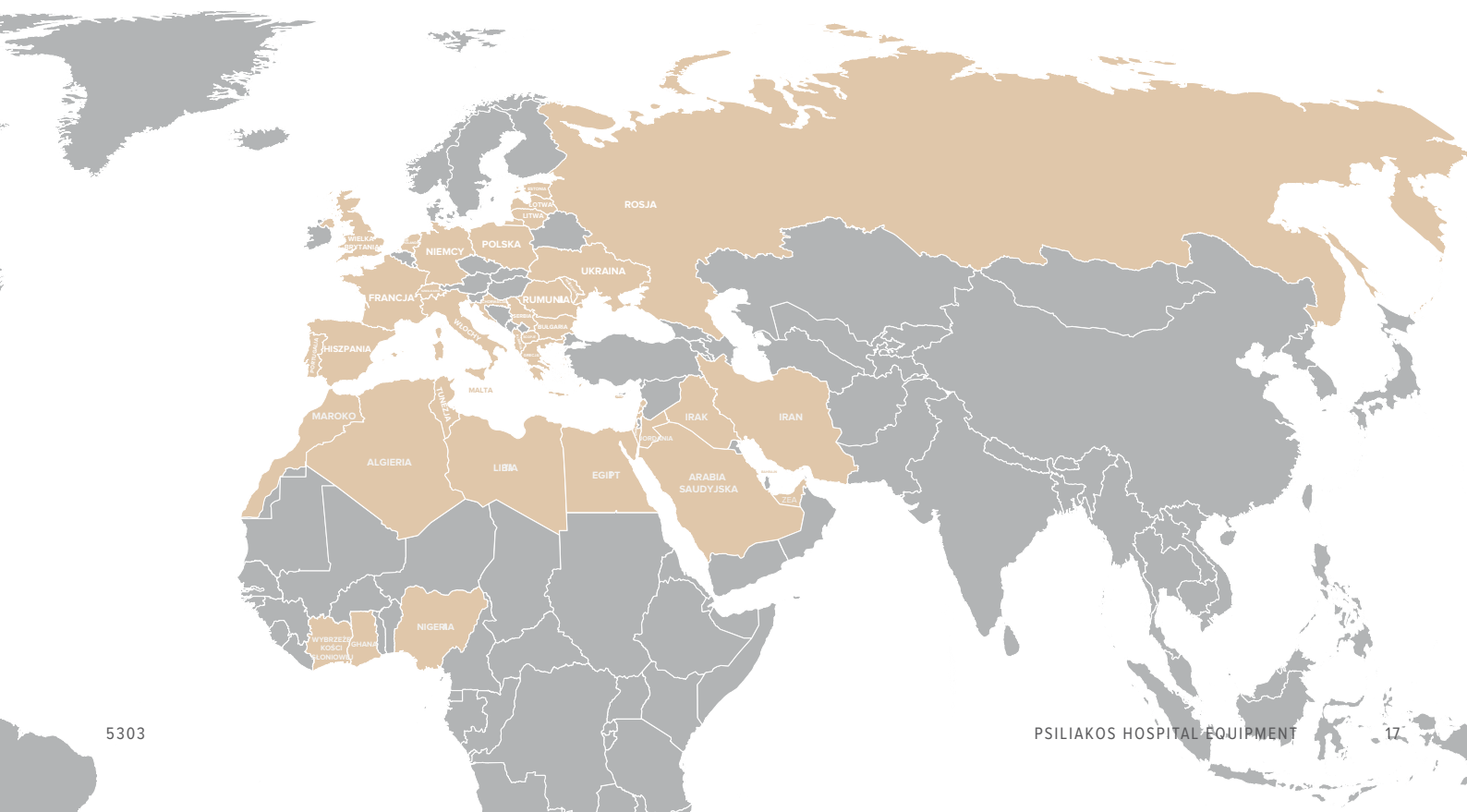



Dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

