



SERIA
435

PSILIAKOS

KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE
ŁÓŻKA I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



435

4-SEKCYJNE ŁÓŻKO SZPITALNE Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI



SPECYFIKACJA


Łóżko elektryczne, wykonane w oparciu o nowoczesną technologię z wysokiej jakości materiałów, odpowiednie do użytku szpitalnego.

- Metalowa rama malowana metodą proszkową, odporna na płyny dezynfekujące wykorzystywane w szpitalach.
- Wymiary powierzchni łóżka wynoszą 200 x 85 cm.
- Pokrycie sekcji oparcia pleców, miednicy, ud i nóg wykonane ze zdejmowanego profilowanego tworzywa sztucznego (ABS) przystosowanego do łatwego czyszczenia i dezynfekcji. Wymienione elementy można łatwo wymienić w przypadku ich zużycia.
- Wytrzymała metalowa rama z bezpiecznym obciążeniem roboczym wynoszącym 260 kg, bez ograniczeń ruchowych.

- Maksymalna waga pacjenta 220 kg.
- 4 elastyczne odbojniki na rogach łóżka.
- 2 uchwyty do zamocowania wieszaka kroplówki i wysięgnika do podnoszenia się pacjenta.
- Wyposażony w dwie szyny nośne i haki do montażu wielu akcesoriów.
- Łóżko spełnia wymogi Dyrektywy Europejskiej IEC 60601-2-52 i 60601-1 oraz Rozporządzenia dotyczącego sprzętu medycznego 2017/745.
- Poziom ochrony części elektrycznych IPX6.



WYMIARY

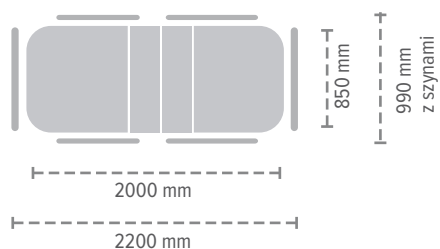

Elektryczna regulacja wysokości
Minimalna wysokość: 420-450 mm
w zależności od kół



Sekcja oparcia pleców 70°
Regulacja elektryczna



Sekcja uniesienia ud i podudzi 32°
Regulacja elektryczna



Ręczna regulacja sekcja oparcia nóg
Regulacja elektryczna
(opcjonalnie)

WYPOSAŻENIE



Odłączane szczyty łóżka
z formowanego ABS

Podpory materaca

Kontroler pacjenta


Odłączana plastikowa powierzchnia
leżyska składająca się z 4 sekcji:
plecy, miednica, uda i nogi dla
łatwego czyszczenia i dezynfekcji.

Odbojniki

Jednoczęściowe barierki
boczne ze stali nierdzewnej,
które składają się wzdłuż
łożka i pokrywają 3/4
długości jego leżyska.


Plastikowe kółka 125 mm
z niezależnym hamulcem

RAMA

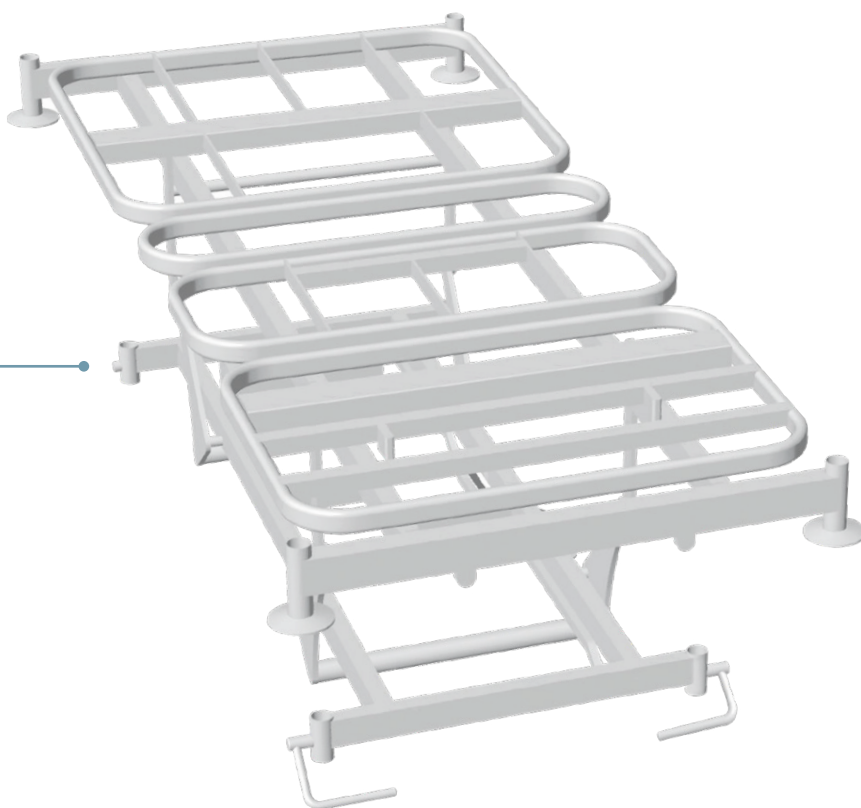


Metalowa rama malowana proszkowo, odporna na płyny dezynfekujące stosowane w szpitalach.

(Opcjonalnie: farba antybakteryjna)

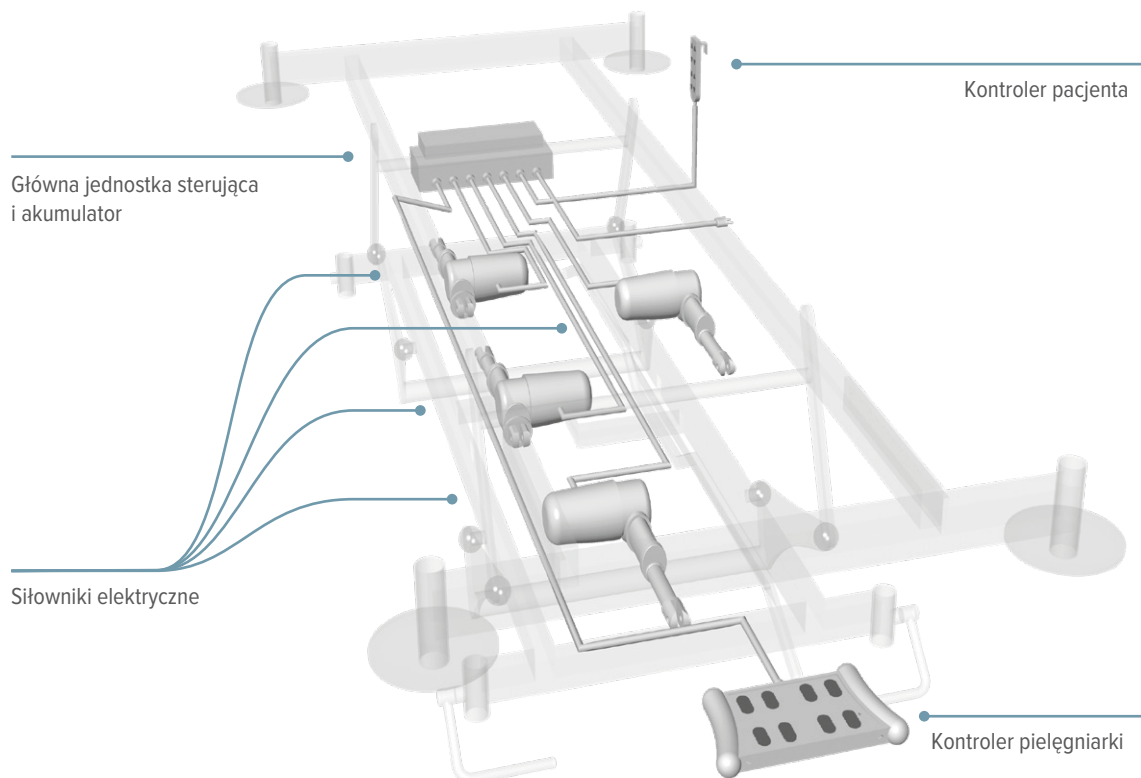

OPCJE PANELI BOCZNYCH

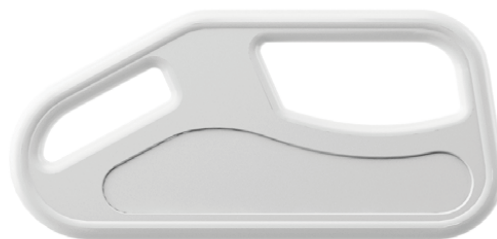

PLASTIKOWE PANELE BOCZNE (opcjonalnie)

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka.



PLASTIKOWE PANELE BOCZNE PEŁNEJ DŁUGOŚCI (opcjonalnie)

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Dzięki dwóm regulowanym pozycjom, dopasowują się do ruchów łóżka i pokrywają 4/4 jego długości leżyska.





Wskaźniki kąta
Zintegrowane poziomo do kontroli kąta nachylenia powierzchni leżącej.



BARIERKI BOCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ (wersja podstawowa)

Jednoczęściowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, które podążają za ruchem łóżka i pokrywają 3/4 długości leżyska.

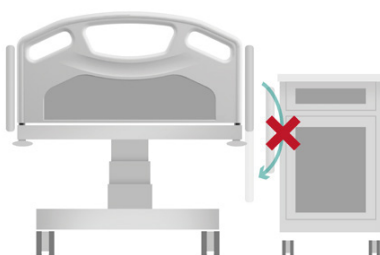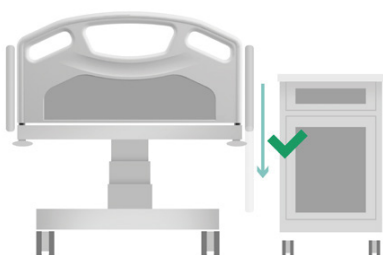

FUNKCJA PANELI BOCZNYCH

Panele boczne składają się pionowo za pomocą mechanizmu sterującego, aby nie zajmować dodatkowej przestrzeni podczas ruchów w górę i w dół oraz aby uniknąć kolizji z meblami znajdującymi się w pobliżu.

SZCZYTY ŁÓŻKA



PANELE PLASTIKOWE

(podstawowe wyposażenie)

Zdemowane szczyty łóżka wykonane z nadającego się do recyklingu wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące.

(Opcjonalnie: z kolorowymi lub drukowanymi panelami)




ALUMINIOWE RAMY Z DREWNIANYMI PANELAMI

(opcjonalnie)



PANELE DREWNIANE

(opcjonalnie)


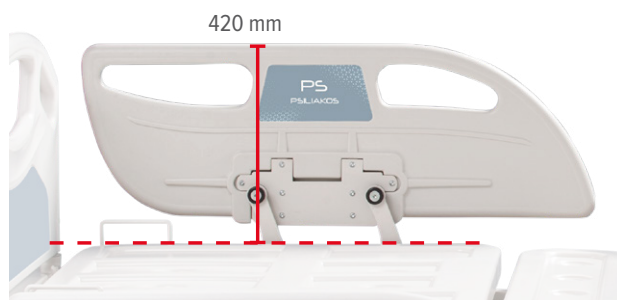


WYSOKOŚĆ PANELI BOCZNYCH

Maksymalna wysokość paneli bocznych od górnej części leża wynosi 420 mm. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo pacjenta.

FUNKCJA PRZESUWANIA PANELI BOCZNYCH

Panele boczne można przesuwając do dołu, co ułatwia bezpośredni dostęp do pacjenta oraz usprawnia poruszanie się po wąskich korytarzach szpitalnych.

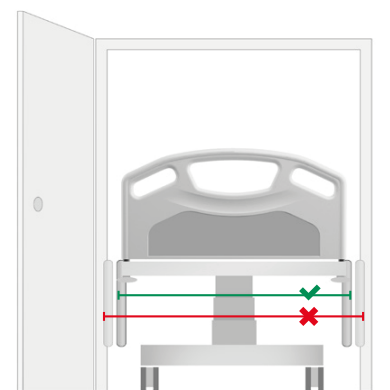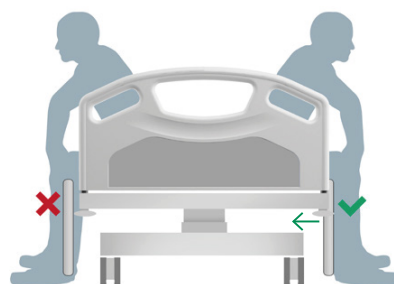

WYPOSAŻENIE



AUTOKONTUR
AUTOMATYCZNA REGRESJA (opcjonalnie)



Część tylna ma wbudowaną funkcję ruchu do tyłu i podnoszenia, aby uniknąć nacisku na okolice brzucha.



RKO (opcjonalnie)

Mechaniczny system natychmiastowego poziomowania w nagłych przypadkach RKO znajdujący się po obu stronach łóżka. Mechaniczny system RKO można wybrać opcjonalnie, aby automatycznie wypoziomować łóżko w najniższej pozycji.



PRZEDŁUŻENIE DŁUGOŚCI (opcjonalnie)

Przedłużenie o 18 lub 25 cm dzięki zintegrowanemu mechanizmowi teleskopowemu.



MECHANIZM BLOKADY RAMY
(opcjonalnie)



STAŁY ZAGŁÓWEK
(opcjonalnie)



RENTGEN PLECÓW (opcjonalnie)

Radioprzezierna sekcja oparcia pleców wykonana z laminatu HPL z uchwytem na kasetę.



OŚWIETLENIE NOCNE (opcjonalnie)



PIĄTE KOŁO (opcjonalnie)

Aktywacja mechaniczna lub elektryczna.



SZYNA NA AKCESORIA

Szyna nośna z hakami do montażu różnych elementów wyposażenia.



KONTROLER PACJENTA

Przewodowy kontroler pacjenta, łatwy do wymiany nawet przez niewyspecjalizowany personel.
(Opcjonalnie: automatyczna blokada po określonym czasie)



ZINTEGROWANE ELEMENTY STERUJĄCE NA PANELU BOCZNYM (opcjonalnie)

Kontroler pacjenta zintegrowany z szynami bocznymi.



KONTROLER PIELĘGNIARKI (opcjonalnie)

Przewodowy kontroler pielęgniarki do wykonywania wszystkich ruchów. Kontroler ma możliwość częściowego zablokowania niektórych lub wszystkich ruchów.

Pozycje resuscytacji krążeniowo-oddechowej i fotela cardio mogą być również ustawiane przy pomocy kontrolera.




OCHRONA ANTYBAKTERYJNA (opcjonalnie)

Przeciwdrobnoustrojowe malowanie części metalowych i przeciwdrobnoustrojowa kompozycja części z tworzyw sztucznych z jonami srebra Ag.




KÓŁKA (opcjonalnie)

Kółka o średnicy 150 mm z centralną blokadą.

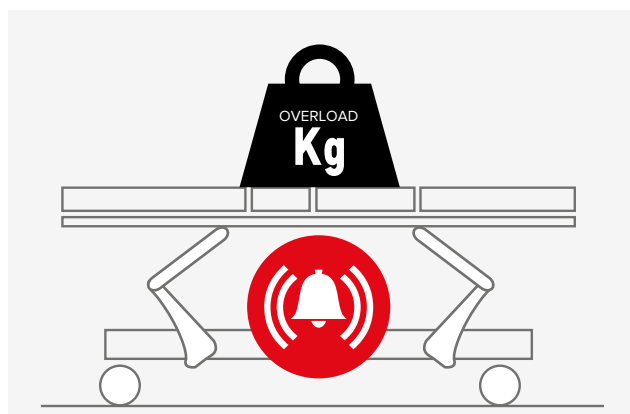

ALARM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED PRZECIĄŻENIEM (opcjonalnie)

System ochrony silnika przed przeciążeniem z alarmem dźwiękowym. System zatrzymuje pracę silników w przypadku, gdy obciążenie przekroczy limit.

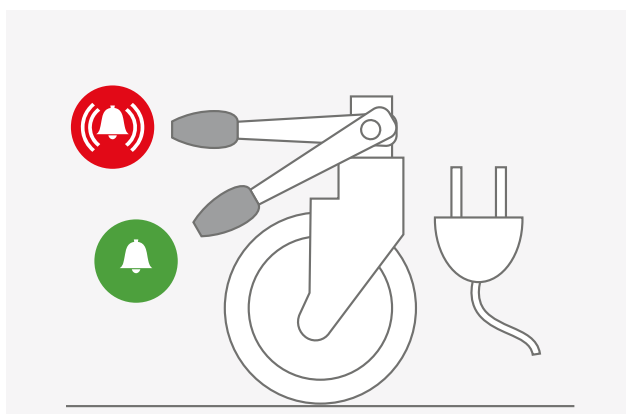

ALARM HAMOWANIA (opcjonalnie)

Alarm dźwiękowy w przypadku podłączenia łóżka do zasilania, a hamulce są wyłączone.

AKCESORIA



UCHWYT NA KARTĘ PACJENTA (opcjonalnie)



MIEJSCE NA POŚCIEL (opcjonalnie)



NIERDZEWNA RAMA WYCIĄGOWA
(opcjonalnie)



METALOWY WYSIĘGNIK Z UCHWYTEM
(opcjonalnie)



TV (opcjonalnie)
11 " telewizor



**MIEJSCE NA BUTLĘ
Z TLENEM** (opcjonalnie)



WAGA CYFROWA
(opcjonalnie)




STOJAK NA KROPLÓWKĘ (opcjonalnie)
Stojak na kroplówkę z 2 lub 4 haczykami



BATERIA (opcjonalnie)
Dodatkowa bateria

DOSTĘPNE KOLORY DLA RAM METALOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY



RAL 9002

Szary biały



RAL 9006

Srebrny
alumińowy

DOSTĘPNE KOLORY CZĘŚCI PLASTIKOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY



RAL 1018

Żółty jasny



RAL 3020

Czerwony
kubański



RAL 6019

Seledynowy
średni



RAL 6032

Zielony
sygnałowy



RAL 7040

Szary popielaty



RAL 5024

Niebieski
pastelowy




RAL 1028

Żółty
melonowy

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.


DOSTĘPNE KOLORY DLA POWIERZCHNI LAMINOWANYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY



2262

Biały



2209

Jasnoszary



2235

Szary




2633

Ciemnoszary



8533

Ciemnozielony




2008

Jasnozielony



2054

Żółty



8514

Niebieski



1619

Teksturowany klon


POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA



Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosą Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, obecnym w ponad 40 krajach.

Leonidas Psiliakos
Dyrektor generalny

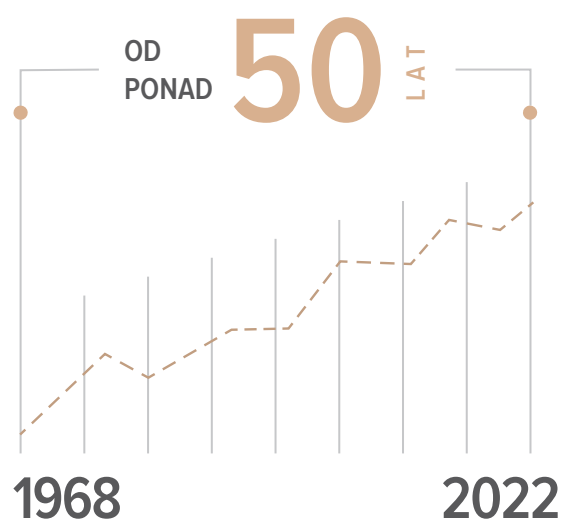

MEDICA Düsseldorf




ZDRAVOOKHRANENIYE Moscow



ARAB HEALTH Dubai

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.: 01012108

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 13485:2003
No.: 01212004

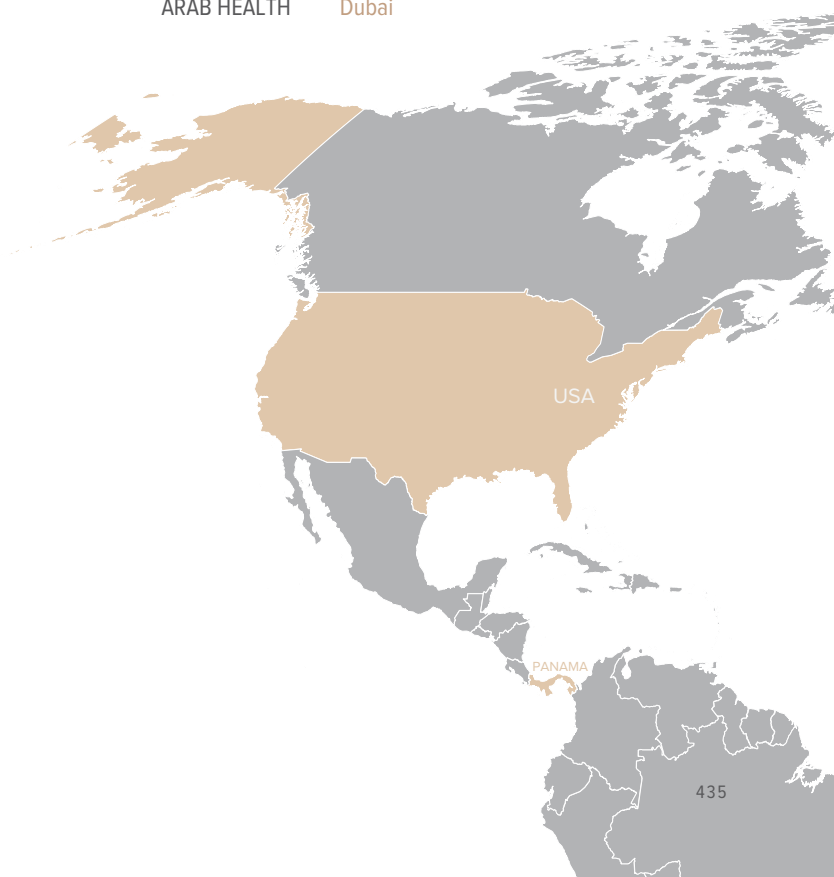

OBECNOŚĆ NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM



Nasza firma uczestniczy w najważniejszych międzynarodowych wystawach.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWA



Nasza zdolność do adaptacji, konsekwencja oraz wysoka jakość oferowanych produktów doprowadziły do naszej obecności i sukcesu w realizacji projektów w wielu dużych miastach za granicą.


Orientacyjnie działamy w następujących krajach:

Albania
Algeria
Bahrajn
Bułgaria
Wybrzeże Kości Słoniowej
Chorwacja
Cypr
Egipt
Estonia
Francja
Macedonia Północna

Niemcy
Ghana
Iran
Irak
Izrael
Włochy
Jordania
Łotwa
Liban
Litwa
Libia

Malta
Mołdawia
Maroko
Holandia
Nigeria
Ukraina
Panama
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja

Arabia Saudyjska
Skopje
Serbia
Hiszpania
Szwajcaria
Tunezja
ZEA
Wielka Brytania
USA

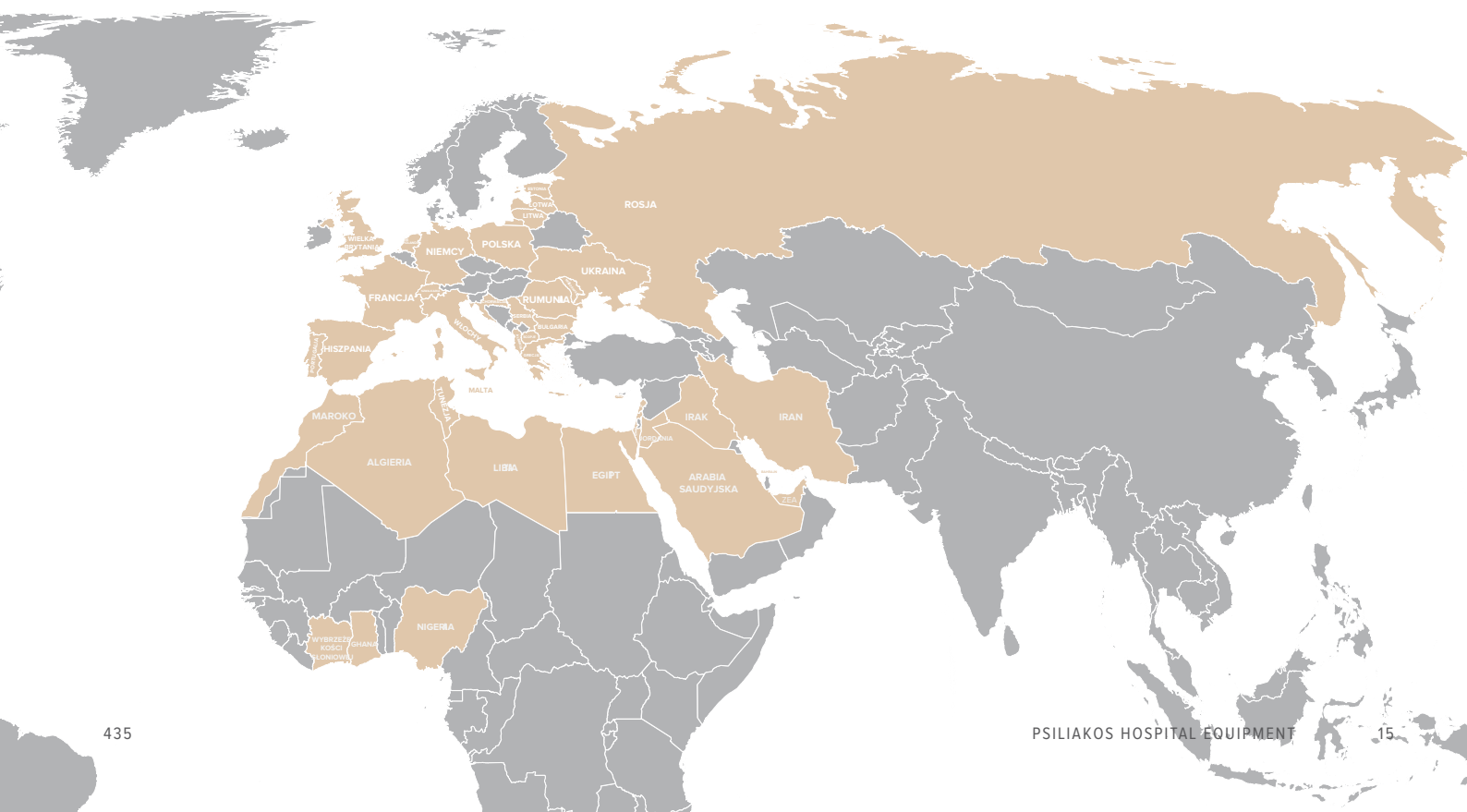



Dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

