

Terapeuta

Najwyższa jakość stołów do masażu i rehabilitacji



Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

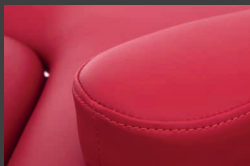


Twój profesjonalizm wspierany przez nasze doświadczenie

— Linia stołów Terapeuta została zaprojektowana z myślą o Tobie i Twoich pacjentach. Narzędzie codziennej pracy jest jednocześnie sercem Twojego gabinetu. Łącząc nowoczesny design i funkcjonalność, oddajemy w Twoje ręce wyjątkowy produkt, który zaspokaja potrzeby każdego gabinetu.




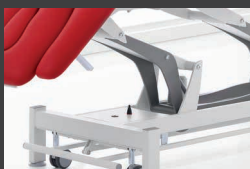
Stworzony z myślą o Tobie



Najwyższej jakości, wytrzymała, precyzyjnie wykańczana tapicerka dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej.



Nowoczesne zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu – zintegrowany system autoryzacji PAS.  PAS



Elegancki, ponadczasowy design i ergonomiczna konstrukcja stołu dla większego komfortu pracy.



Antypoślizgowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb systemy jezdne - mobilne F4 lub wyjątkowo stabilne FO.



To nasza najlepsza dotychczasowa inwestycja! Serdecznie polecamy!



Lucjan Kasprzak
Fizjoterapeuta AZS Koszalin





HalloTRONIC®

Komfortowa
regulacja wysokości



Wygodna
regulacja zagłówka



Regulowane
boczki sekcji środkowej
z automatycznym systemem
blokowania (M-S7 i M-P7)



Wyjątkowe doznania dla Twoich Pacjentów

— Dla pacjenta komfort podczas zabiegu jest tak samo ważny, jak jego efekty. Z linią stołów Terapeuta możesz zagwarantować Pacjentom wygodę i poczucie bezpieczeństwa w czasie trwania terapii!

- Sprężysta i trwała pianka
- Otwór na twarz Pacjenta ułatwiający oddychanie
- Płynna regulacja wysokości i poszczególnych sekcji
- Wąskie łączenia sekcji stołu





Nadaj kształt swojej praktyce

— Leżysko linii stołów Terapeuta jest dostępne w czterech wersjach, dopasowanych do potrzeb Twojej praktyki. To Ty decydujesz, ile sekcji ma mieć Twój wymarzony stół. Opuszczane podłokietniki, a może dodatkowe boczki sekcji środkowej?

Indywidualna konfiguracja otwiera przed Tobą nowe możliwości. Jeszcze nigdy nie byłeś tak blisko Pacjenta!



○
S2

Leżysko 2-sekcyjne



○
S3 / P3

Leżysko 3-sekcyjne



○
S5 / P5

Leżysko 5-sekcyjne



○
S7 / P7

Leżysko 7-sekcyjne

Dopasuj stół do Twoich preferencji

— Stabilna, solidna rama oparta na sprawdzonej konstrukcji to gwarancja bezpieczeństwa pracy. Dla pełnego komfortu możesz wybrać system jezdny, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom.

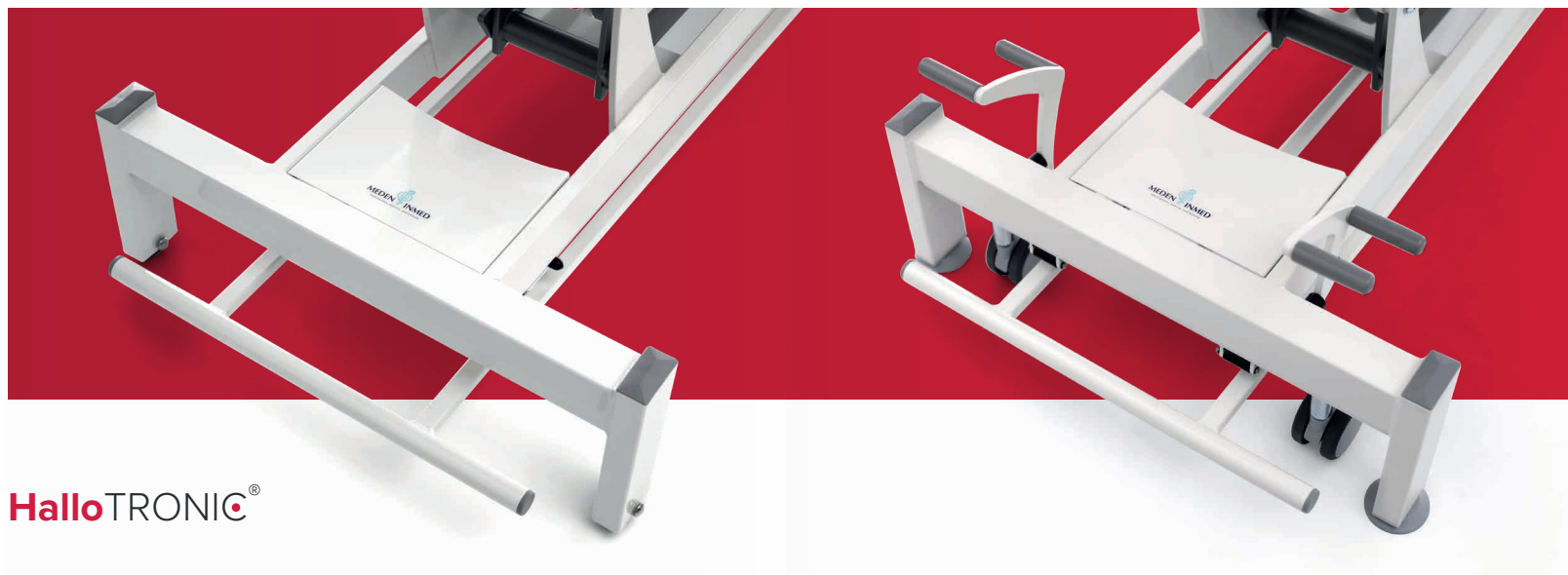
- Jeżeli często zmieniasz położenie stołu w gabinecie, wybierz ramę wyposażoną w cztery kółka i cztery antypoślizgowe stopki - **F4**.
- Jeżeli stół stoi przeważnie w jednym miejscu, wystarczy rama z dwoma kółkami i dwoma stopkami - **F0**.

F0

System jezdny składający się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stoppek.

F4

System jezdny składający się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stoppek.



HalloTRONIC®



Terapeuta M-S2 | 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Cechy charakterystyczne:

- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię HalloTRONIC®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Informacje do zamówień:

M-S2.F0: 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stoppek.

M-S2.F4: 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stoppek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stoppek.

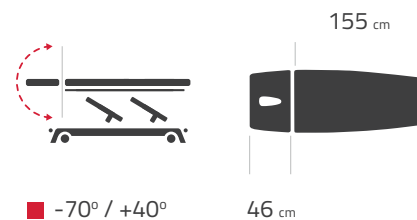


PAS

HalloTRONIC®



M-S2



Terapeuta M-S3 / M-P3

3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Cechy charakterystyczne:

- pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu (M-P3),
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych,
- rączka zwalnająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- ergonomiczny design,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Informacje do zamówień:

M-S3.F0: 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

M-S3.F4: 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

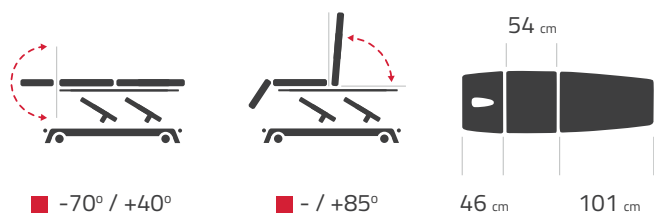
M-P3.F0: 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

M-P3.F4: 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.




HalloTRONIC®

M-S3



M-P3

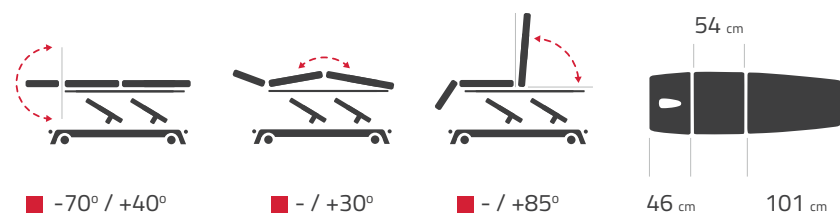

Terapeuta M-S5 / M-P5 | 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Cechy charakterystyczne:

- pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu (M-P5),
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych,
- rączka zwalnająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- ergonomiczny design,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Informacje do zamówień:

M-S5.F0: 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

M-S5.F4: 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

M-P5.F0: 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

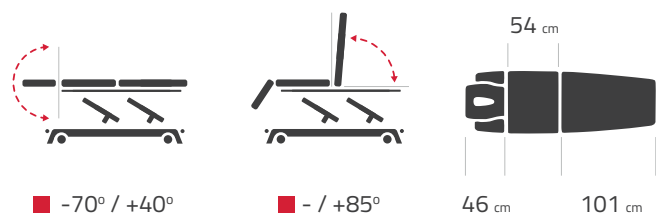
M-P5.F4: 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.




HalloTRONIC®



M-S5



M-P5

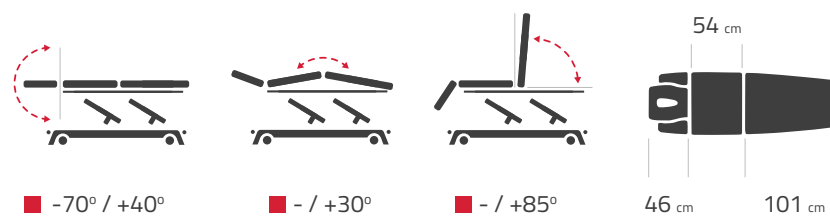

Terapeuta M-S7 / M-P7 | 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

Cechy charakterystyczne:

- pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu (M-P7),
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej,
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych,
- rączka zwalnająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- ergonomiczny design,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu.

Informacje do zamówień:

M-S7.F0: 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

M-S7.F4: 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

M-P7.F0: 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

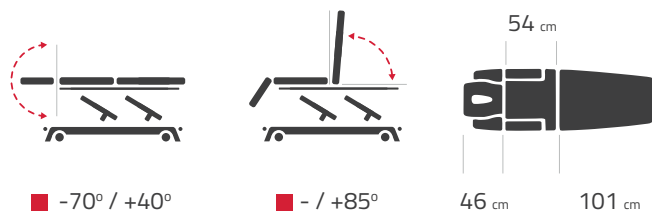
M-P7.F4: 7-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z pozycją Pivota oraz systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek, małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.




HalloTRONIC®



M-S7



M-P7

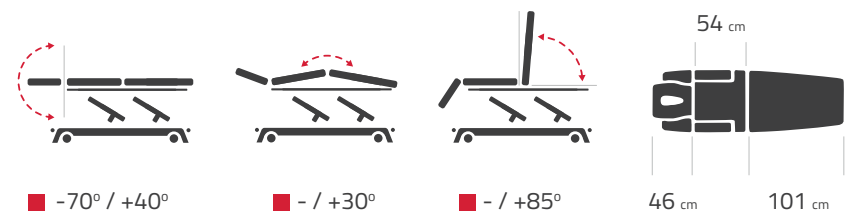



Wykorzystaj wszystkie możliwości terapii

— Zróżnicowane potrzeby Twoich Pacjentów wymagają stosowania różnych technik manualnych. Szeroka oferta akcesoriów dedykowanych do stołów z linii Terapeuta, ułatwi Ci codzienną pracę i pozwoli na przeprowadzenie efektywnego zabiegu.

Informacje do zamówień:

Numer:

Opis:

001	Wieszak do ręczników papierowych (1)
002-xx	Bananki do stabilizacji (2)
003	Pas do stabilizacji (3)
004	Klin Kaltenborna (4)
005-xx	Klin (70 x 60 x 25 cm) (5)
006-xx	Klin (50 x 35 x 20 cm) (6)
007-xx	Wałek (60 x 15 cm) (7)
008-xx	Półwałek (60 x 15 x 10 cm) (8)
009-xx	Półwałek (60 x 15 x 15 cm) (9)
010-xx	Klin (40 x 30 x 12 cm) (10)
011-xx	Wałek (60 x 10 cm) (11)
012-xx	Wałek (60 x 20 cm) (12)

Przy zamawianiu wybranych akcesoriów prosimy o podanie numeru części oraz koloru tapicerki, np.: aby zamówić beżowy wałek proszę wpisać: Wałek 007-01.

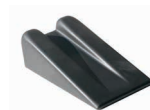
Wieszak do ręczników
papierowych



1



3



4



5



6



7



8



9



10



11



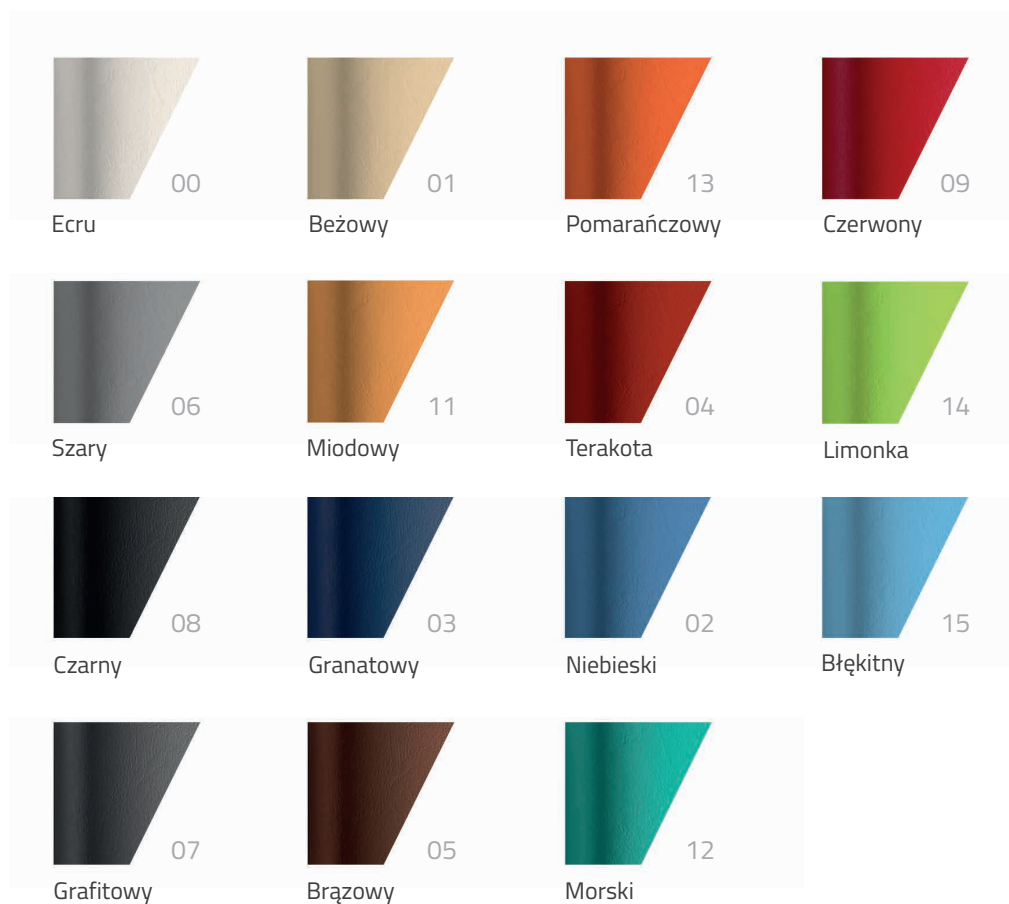
12





Stwórz niepowtarzalne wnętrze gabinetu

— Dzięki bogatej paletce kolorystycznej oraz unikatowym właściwościom tapicerka spełnia oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.



Odporna na działanie wysokich temperatur



Odporna na ciecze (woda, krew, solanka)



Miękka, elastyczna i komfortowa powłoka



Wysoce wytrzymała, odporna na zadrapania



Można czyścić wybranymi środkami do dezynfekcji, ale zalecamy czyszczenie tapicerki wyłącznie wodą z mydłem.

Dane techniczne:

Tapicerka: skóra ekologiczna.
Najwyższa jakość i funkcjonalność.

Spójna wizja

Nowoczesny gabinet rehabilitacji łączy elegancki design z ergonomicznym i funkcjonalnym wyposażeniem. Dbamy o to, aby Twój gabinet został zaprojektowany z dbałością o każdy detal.

Wykorzystując kilkudziesięcioletnie doświadczenie w branży medycznej, kompleksowo wyposażamy największe placówki rehabilitacyjne i mniejsze gabinety.

Dla Ciebie tworzymy miejsce, które umożliwia komfortowe warunki pracy, a Twoim Pacjentom gwarantuje wyjątkowe doznania.

www.meden.com.pl/oferta

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 K.C. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektów bez wpływu na zasadnicze funkcje wyrobu i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Pomimo dołożenia wszelkich starań kolory zaprezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.



Meden-Inmed Sp. z o. o.
Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Tel.: +48 785 811 099

fizjoterapia@meden.com.pl
www.meden.com.pl



Skonfiguruj stół rehabilitacyjny dopasowany do potrzeb Twojej praktyki na:
www.meden.com.pl/terapeuta

