
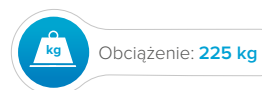


Terapeuta M-S7 | 7-sekcyjny stół do masażu

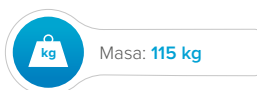

Cechy charakterystyczne:

- 7-sekcyjny stół do masażu,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^{\circ}$),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- **SmartS4Arms** - innowacyjny system płynnej, bezśrubowej regulacji bocznych zagłówek, oparty o mechanizm przesuwany z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówek w czasie terapii,
- opuszczane boczki sekcji środkowej z półautomatycznym systemem blokowania,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do $+85^{\circ}$),
- rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- ergonomiczny design, np.: umiejscowienie sprężyny gazowej zagłówka poza światłem otworu na twarz zwiększające komfort pacjenta,
- 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia,
- malowana proszkowo, bardzo stabilna stalowa rama,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- **Hallotronic®** - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- wieszak na ręcznik papierowy (opcja).

Dostępne modele:

M-S7.F0: 7-sekcyjny stół z systemem jezdny, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

M-S7.F4: 7-sekcyjny stół z systemem jezdny, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Ustawienia i wymiary:

