

SALUS TALENT PRO / SALUS TALENT PRO URO

URZĄDZENIA DO GŁĘBOKIEJ STYMULACJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Głęboka stymulacja elektromagnetyczna

Salus Talent Pro to pierwsze na rynku urządzenie magnetoterapeutyczne, za pomocą którego można uzyskać odczuwalną intensywność podczas stosowania, a także indukcję magnetyczną do 3 Tesli przy częstotliwości do 100 Hz.

Salus Talent Pro to wysoko indukcyjny, głęboko penetrujący, pulsacyjny stymulator elektromagnetyczny pozwalający na miejscowe przyłożenie precyzyjnego pola elektromagnetycznego przenikającego warstwy odzieży, tkanek oraz kości, stymulując wyznaczony obszar w głębi ciała.

Ludzkie ciało stanowi dobry przewodnik dla pola magnetycznego. W momencie przyłożenia **wysokoenergetycznego pulsacyjnego pola magnetycznego**, tkanki są stymulowane w miarę penetracji tego pola w głąb organizmu. W efekcie pobudzane są:

- komórki nerwowe,
- mięśnie,
- naczynia krwionośne.

Korzyści wyływające z użytku Salus Talent:

- zabiegi w miejscach niedostępnych dla innych terapii,
- przenikanie do 10 cm w głąb tkanki,
- szybki powrót do sprawności fizycznej,
- skuteczna i bezinwazyjna terapia,
- bezbolesne zabiegi,
- bezpieczny w użyciu.

W przeciwieństwie do stymulacji elektrycznej, działającej jedynie na powierzchni, stymulacja wywołana silnym **polem magnetycznym** przenika głęboko do wnętrza organizmu, pobudzając tkanki.



Główne obszary zastosowań Salus Talent:


- rehabilitacja,
- medycyna sportowa,
- neurologia,
- ortopedia,
- uroinekologia.

Ta ulotka zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Właściwości

Salus Talent Pro:

- indukcja magnetyczna do 3 Tesli,
- częstotliwość do 100 Hz,
- kolorowy ekran dotykowy 8",
- duży aplikator ze specjalnym uchwytem, zapewniającym komfort użytkownika,
- mały aplikator do ręcznego opracowania obszaru zabiegowego,
- 20 programów automatycznych,
- 20 programów manualnych,
- 20 programów użytkownika,
- skuteczna bezinwazyjna terapia,
- bezpieczny w użyciu,
- programy i akcesoria do zabiegów uroinekologicznych (opcja dodatkowa).

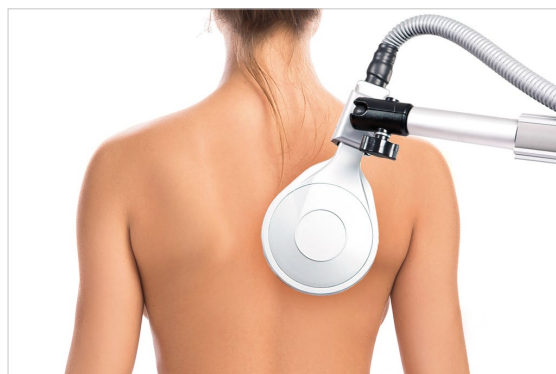

Wskazania do użycia Salus Talent Pro:

- schorzenia kręgosłupa,
- ostry / przewlekły ból odc. C, Th, L-S (lumbago),
- rwa kulszowa (ischialgia),
- spondyloza (zmiany zwyrodnieniowe kręgów),
- zaburzenia w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego,
- bark zamrożony (ograniczenie ruchomości wskutek zmian zapalnych lub zwyrodnieniowych),
- zwyrodnienia stawów,
- reumatoidalne zapalenie stawów,
- uszkodzenie nerwów obwodowych,
- osłabienie / zanik mięśni,
- zaburzenia układu moczowo-płciowego,
- nietrzymanie moczu,
- ból prostaty,
- stany pourazowe.

Wśród przeciwwskazań do zabiegów głębokiej stymulacji elektromagnetycznej znajduje się:

- ciąża i okres karmienia,
- podwyższona temperatura ciała,
- aktywne nowotwory,
- obecność rozrusznika serca, pompy insulinowej, metalowych implantów,
- ciężka, niestabilizowana niewydolność układu krążenia.

Dane techniczne:

Ekran:	kolorowy ekran dotykowy 8"
Programy automatyczne:	20
Programy manualne:	20
Programy użytkownika:	20
Maksymalna indukcja magnetyczna:	3 Tesle
Maksymalna częstotliwość [Hz]:	100
Czas zabiegu [min]:	1-60
Liczba kanałów:	2
Aplikatory:	
- duży aplikator [cm]:	ø 16
- mały aplikator ręczny [cm]:	ø 11,5
Wymiary [cm]:	54 x 50 x 107 - 173 (z uchwytem)
Waga [kg]:	60
Zasilanie:	220-230 V, 50-60 Hz
Czas trwania impulsu:	CH1: 420 µs, CH2: 456 µs
Maksymalna intensywność stymulacji [kT/s]:	22,4

Programy automatyczne Salus Talent Pro:

Protokół:

	Wskazanie:
A1	świeże skręcenie stawu, obrzęk (małe stawy)
A2	świeże skręcenie stawu, obrzęk (duże stawy)
A3	ostry ból stawu skokowego
A4	ostry ból stawu łokciowego
A5	ostry ból stawu biodrowego / miednicy
A6	bark zamrożony - stan ostry
A7	ostry ból odc. C, Th kręgosłupa
A8	ostry ból odc. L-S Th kręgosłupa
A9	choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych
A10	choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa
A11	przewlekły stan zapalny stawów
A12	przewlekłe bóle mięśniowe
A13	przewlekły ból stawu skokowego
A14	przewlekły ból stawu łokciowego
A15	przewlekły ból stawu biodrowego / miednicy
A16	bark zamrożony - stan przewlekły
A17	przewlekły ból C, Th kręgosłupa
A18	przewlekły ból odcinka L-S kręgosłupa
A19	wzmacnianie mięśni, trening mięśni
A20	intensywna stymulacja mięśni

Fotel Comfichair z wyprofilowaną kieszenią

Estetycznie wykonany, solidny i wygodny **fotel**. Posiada specjalnie wyprofilowaną kieszeń na aplikator urządzenia do stymulacji magnetycznej.

Cechy charakterystyczne:

- stabilna podstawa,
- aluminiowa podstawa na 5-skrzydłowych nóżkach z poliuretanu,
- sprężyna gazowa o skoku 160 mm,
- tapicerka premium,
- wysoka jakość,
- łatwy w użytkowaniu i utrzymaniu w czystości.

Wskazania dotyczące fotela Comfichair przy użyciu urządzenia Salus Talent Pro:

- ból prostaty,
- nietrzymanie moczu,
- dysfunkcje seksualne,
- regeneracja poporodowa,
- wzmocnienie mięśni dna miednicy,
- przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego.



Istnieje możliwość doposażenia urządzenia do wersji **Salus Talent Pro Uro** w fotel do stymulacji mięśni krocza **Comfichair**.



Meden-Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 50 / 53, fizjoterapia@meden.com.pl
www.meden.com.pl, www.sklep.meden.com.pl

Opiekun produktu:

Iga Karolewska
tel.: +48 785 810 455, ikarolewska@meden.com.pl