



435

HEMODIALIZA

PSILIAKOS
KATALOG PRODUKTÓW / PRODUCT CATALOGUE
ŁÓŻKA I WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.



SERIA 435


ŁÓŻKO DO HEMODIALIZY Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI

SPECYFIKACJA

- Wytrzymała metalowa rama malowana proszkowo (proszek epoksydowy).
- 5 siłowników autonomicznych, 1 jednostka sterująca, 1 pilot pacjenta.
- 4 elastyczne odbojniki.
- Zaczepy na stojak na kroplówkę i drążek do podnoszenia.
- Uchwyt na worek na mocz.
- Plastikowa rama na szczyt łóżka i materac z przezroczystą membraną ochronną i regulacją długości w zakresie 20 cm.
- 4-sekcyjne leżysko wykonane z ABS.
- Regulowane podłokietniki (opcjonalnie: z plastikowymi panelami bocznymi).
- Zdejmowana poduszka pod głowę z regulacją wysokości.
- Materac piankowy 12 cm z poszewką, podążający za ruchami leżyska.



ZAKRES RUCHU – WYMIARY

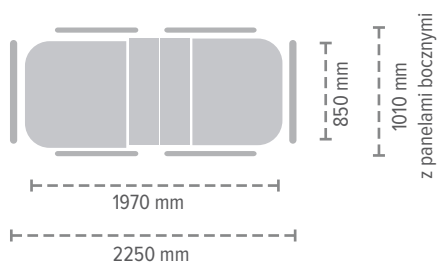

Sekcja oparcia pleców 70°
Elektryczna regulacja




Trendelenburg 12°
Anti-Trendelenburg 12°
Elektryczna regulacja



Regulacja sekcji oparcia nóg 30°
Elektryczna regulacja

WYPOSAŻENIE

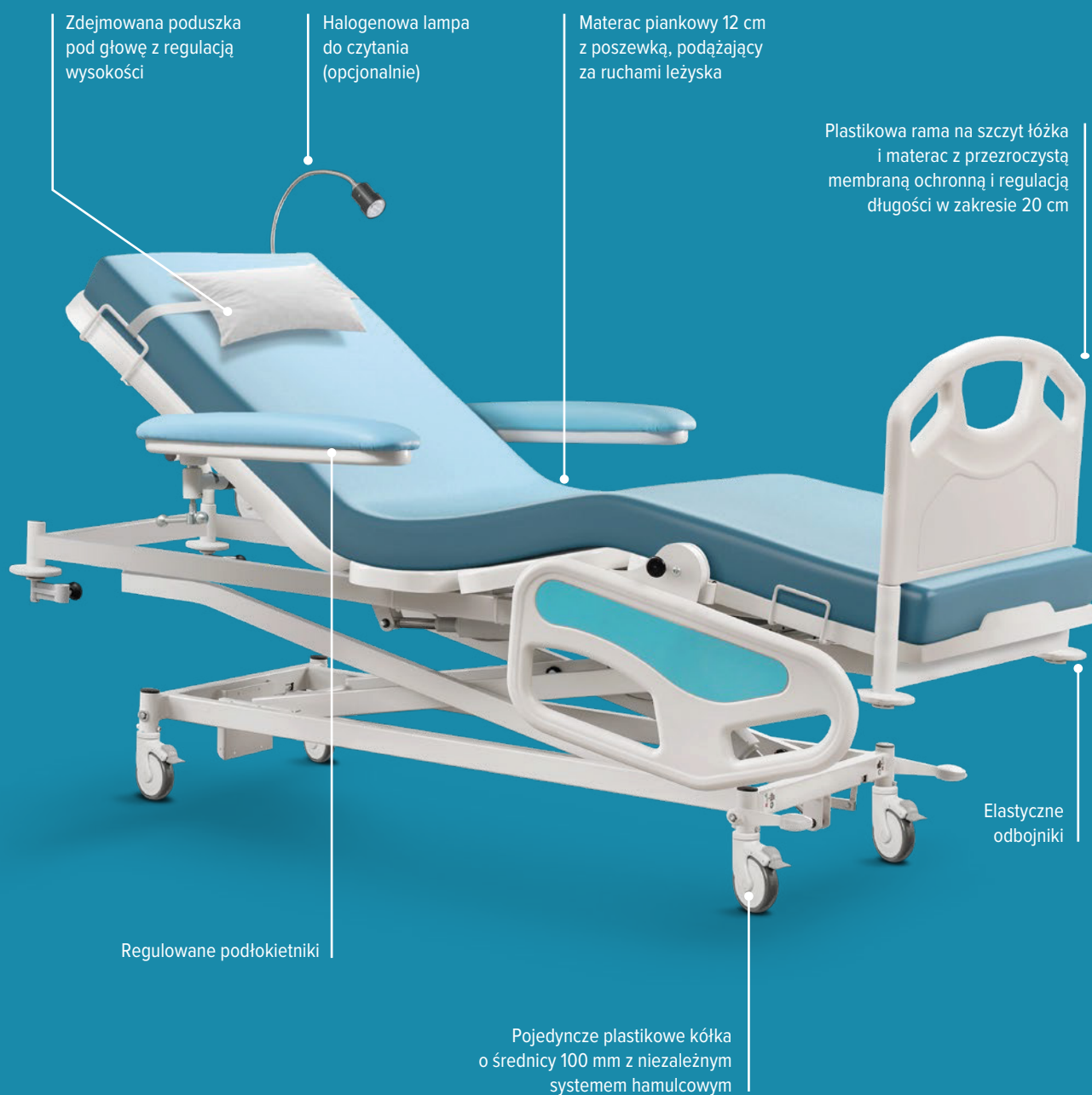

OPCJE PANELI BOCZNYCH



PLASTIKOWE PANELE BOCZNE (opcjonalnie)

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka.



PANEL PLASTIKOWY (opcjonalnie)

Zdemowany szczyt wykonany z nadającego się do recyklingu wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odporny na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące.

(Opcjonalnie: z kolorowymi lub nadrukowanymi panelami)



REGULOWANY SZCZYT

Plastikowa rama na szczyt łóżka i materac z przezroczystą membraną ochronną i regulacją długości w zakresie 20 cm.

WYPOSAŻENIE



RKO

Mechaniczny system natychmiastowego poziomowania w nagłych przypadkach RKO znajdujący się po obu stronach łóżka. Mechaniczny system RKO można wybrać opcjonalnie, aby automatycznie wypoziomować łóżko w najniższej pozycji.



OCHRONA ANTYBAKTERYJNA (opcjonalnie)

Przeciwdrobnoustrojowe malowanie części metalowych i przeciwdrobnoustrojowa kompozycja części z tworzyw sztucznych z jonami srebra Ag.



PRZEWODOWY KONTROLER PACJENTA


Przewodowy kontroler pacjenta, łatwy do wymiany nawet przez niewyspecjalizowany personel.

(Opcjonalnie: automatyczna blokada po określonym czasie)



ALARM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED PRZECIĄŻENIEM (opcjonalnie)

System ochrony silnika przed przeciążeniem z alarmem dźwiękowym. System zatrzymuje pracę silników w przypadku, gdy obciążenie przekroczy limit.

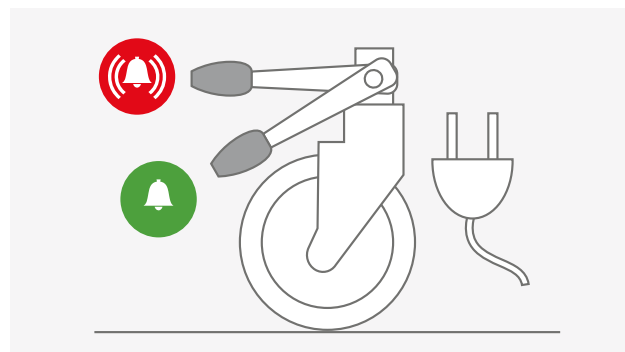

ALARM HAMOWANIA (opcjonalnie)

Alarm dźwiękowy w przypadku podłączenia łóżka do zasilania, a hamulce są wyłączone.



5. KOŁO (opcjonalnie)

Aktywacja mechaniczna lub elektryczna



OŚWIETLENIE NOCNE (opcjonalnie)

Wskaźnik niskiego położenia

SZYNA NA AKCESORIA

Szyrna nośna z hakami do montażu różnych elementów wyposażenia

AKCESORIA



METALOWY WYSIĘGNIK Z UCHWYTEM (opcjonalnie)



LAMPA HALOGENOWA (opcjonalnie)



WAGA CYFROWA (opcjonalnie)



UCHWYT NA KROPLÓWKĘ (opcjonalnie)

Stojak na kroplówkę z 2 lub 4 haczykami



ALARM SŁABEJ BATERII (opcjonalnie)



WBUDOWANE UZIEMIENIE (opcjonalnie)




BATERIA (opcjonalnie)

Bateria zapewniająca autonomię ruchów elektrycznych

DOSTĘPNE KOLORY

PRZYKŁADOWE KOLORY

RAMY METALOWE



RAL 9002

Szary biały



RAL 9006

Srebrny aluminiowy

CZĘŚCI PLASTIKOWE



RAL 1018

Żółty jasny



RAL 3020

Czerwony kubański



RAL 6019

Seledynowy średni



RAL 6032

Zielony sygnałowy



RAL 7040

Szary popielaty



RAL 5024


Niebieski pastelowy



RAL 1028


Żółty melonowy

POWIERZCHNIE LAMINOWANE



2262

Biały



2209

Jasny szary



2235

Szary



2633

Ciemny szary



8533

Ciemny zielony




2008

Jasny zielony




2054

Żółty



8514

Niebieski







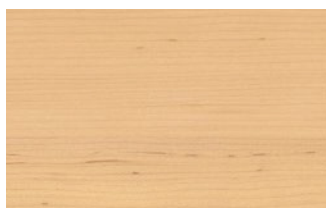


1619

Tekstura klonu

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.

TAPICERKA

			
13000 Beżowy (jasny)	13001 Białły	13010 Beżowy	13103 Żółty (jasny)
			
13102 Beżowy (ciemny)	13219 Różowy	13201 Czerwony	13250 Koralowy (błady)
			
13256 Przypalony pomarańczowy	13220 Malinowy (ciemny)	13303 Czekoladowy (jasny)	13093 Fioletowy (jasny)
			
13275 Czekoladowy	13403 Khaki (jasny)	13401 Letnia zieleń	13404 Khaki
			
13410 Turkusowy	13420 Zielony (ciemny)	13405 Turkusowy (jasny)	13503 Szary (chłodny)
			
13507 Niebieski (jasny)	13504 Niebieski (Ciepły)	13523 Kobaltowy (ciemny)	13501 Niebieski (ciemny)
			
13901 Czarny	13801 Żółty	13802 Fuksja	13803 Fioletowy

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.



Dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.: 01012108

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 13485:2003
No.: 01212004

