



3303
SERIA

PSILIAKOS

PRODUCT CATALOGUE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
HOSPITAL EQUIPMENT - DESIGN AND MANUFACTURING

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



3303

4-SEKCYJNE ŁÓŻKO SZPITALNE Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI




SPECYFIKACJA

- Łóżko elektryczne, wykonane w nowoczesnej technologii z wysokiej jakości trwałych materiałów, odpowiednie do użytku szpitalnego.
- Metalowa rama malowana proszkowo, odporna na płyny dezynfekujące stosowane w szpitalach.
- Wymiary leżyska wynoszą 200 x 85 cm.
- Sekcje opracia pleców, miednicy, ud i nóg wykonane ze zdejmowanego, formowanego tworzywa sztucznego (ABS) zaprojektowanego z myślą o łatwym czyszczeniu i dezynfekcji. Powyższe elementy można łatwo wymienić w przypadku zużycia.
- Wytrzymała metalowa rama z bezpiecznym obciążeniem roboczym 260 kg, bez ograniczenia ruchów.
- Maks. waga pacjenta 220 kg.
Maks. bezpieczne obciążenie 260 kg.
- 4 Elastyczne odbojniki na rogach łóżka.
- 2 uchwyty do zamocowania wieszaka kroplówki i wysięgnika do podnoszenia się pacjenta.
- Wyposażone w dwie szyny i haki do montażu różnych akcesoriów.
- Łóżko jest zgodne z europejską dyrektywą IEC60601-2-52 i 60601-1 oraz rozporządzeniem dotyczącym sprzętu medycznego 2017/745.
- Poziom ochrony części elektrycznych IPX6.



ZAKRES RUCHU – WYMIARY

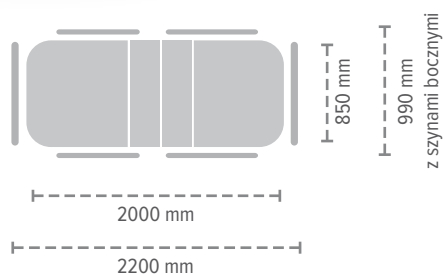

Elektryczna regulacja wysokości.
Zakres: 445-795 mm, z kółkami 150 mm



Sekcja oparcia pleców 70°
Elektryczna regulacja



Sekcja uniesienia ud i podudzi 32°
Elektryczna regulacja




Ręczna regulacja sekcji
oparcia nóg




Trendelenburg 17°
Anti-Trendelenburg 17°
Elektryczna regulacja

*Wszystkie zakresy ruchów i wymiary mogą być dostosowane do potrzeb klienta.

WYPOSAŻENIE

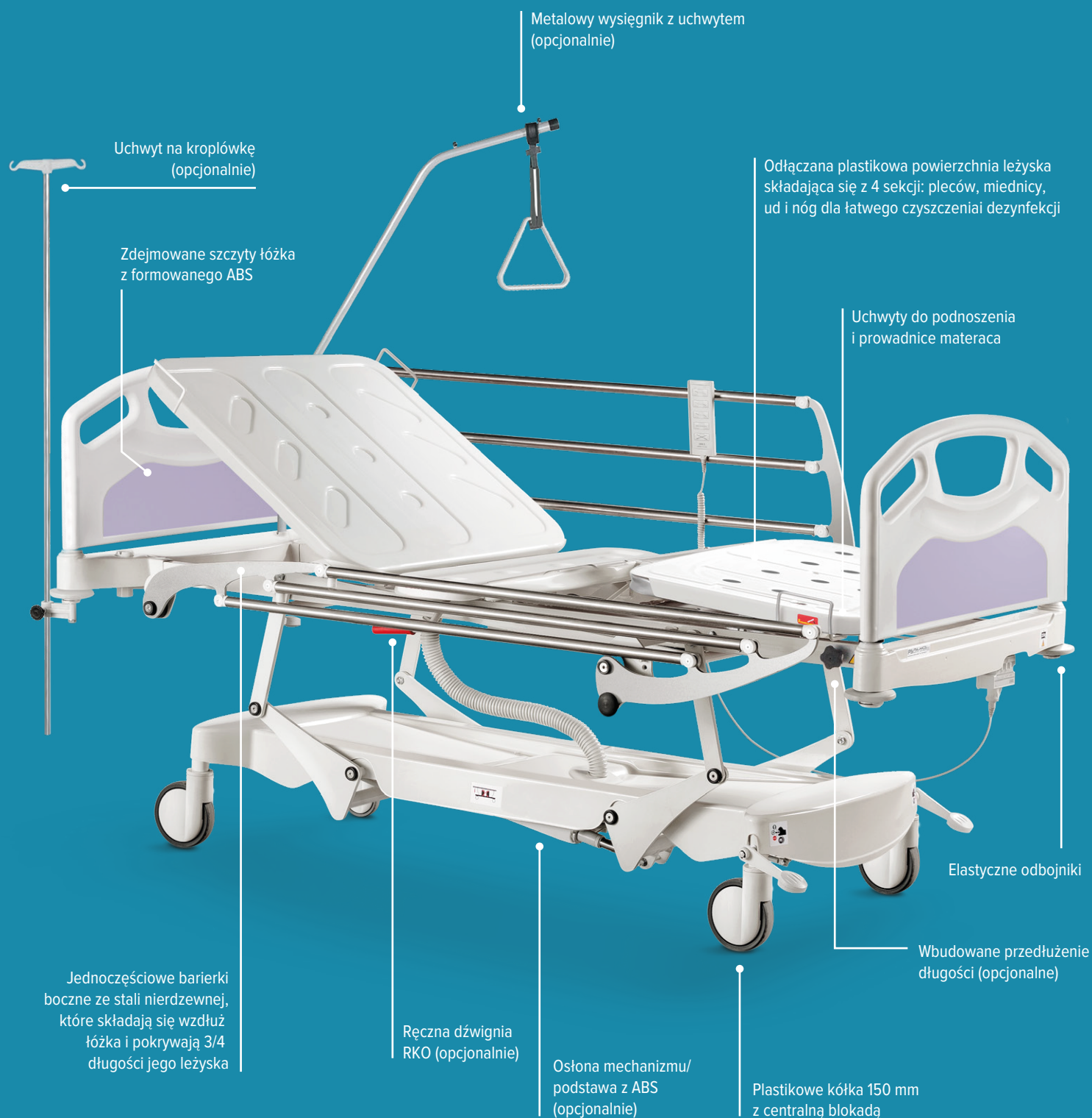


RAMA

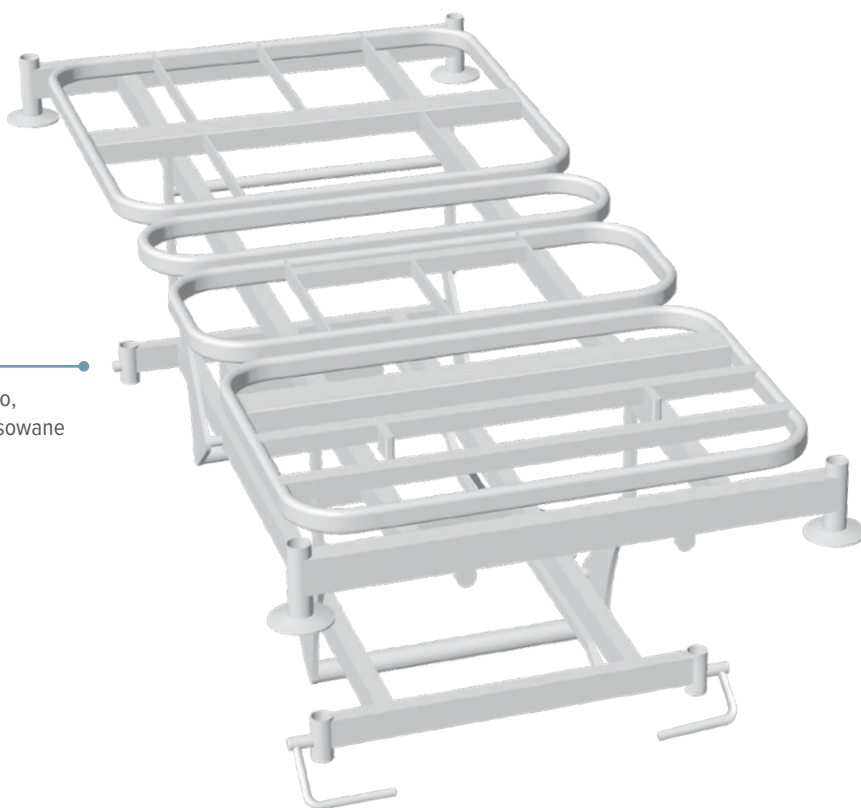

Metalowa rama malowana proszkowo,
odporna na płyny dezynfekujące stosowane
w szpitalach.

Opcjonalnie: Farba antybakteryjna.

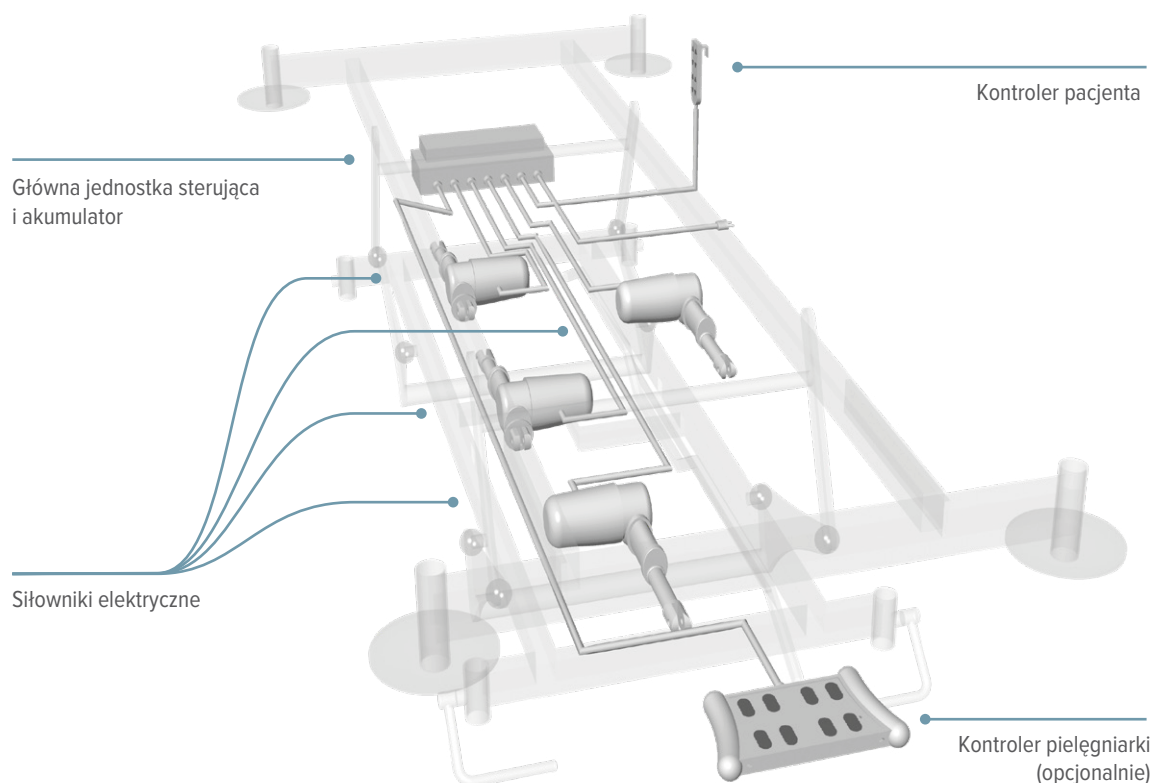

OPCJE PANELI BOCZNYCH



PLASTIKOWE PANELE BOCZNE 3/4 (opcjonalnie)

Dwuczęściowe barierki boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka i pokrywającymi 3/4 długości leżyska.



Wskaźniki kąta

Zintegrowane poziomy do kontroli kąta nachylenia powierzchni leżącej.



PLASTIKOWE PANELE BOCZNE PEŁNEJ DŁUGOŚCI (opcjonalnie)

Dwuczęściowe barierki boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka i pokrywającymi 4/4 długości leżyska.




Wskaźniki kąta

Zintegrowane poziomy do kontroli kąta nachylenia powierzchni leżącej.



BARIERKI BOCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ (wersja podstawowa)

Jednoczęściowe barierki boczne ze stali nierdzewnej, które podążają za ruchem łóżka i pokrywają 3/4 długości leżyska.

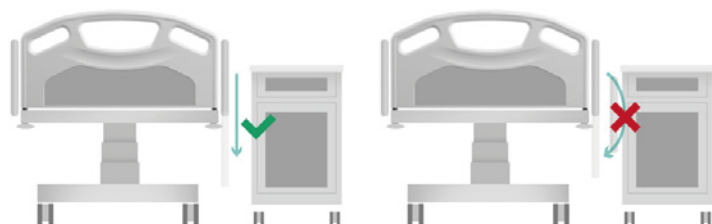

FUNKCJA PANELI BOCZNYCH

Panele boczne składają się pionowo za pomocą mechanizmu sterującego, aby nie zajmować dodatkowej przestrzeni podczas ruchów w górę i w dół oraz aby uniknąć kolizji z meblami znajdującymi się w pobliżu.

PANELE DO WEZGŁOWIA I PODNÓŻKA



PANELE PLASTIKOWE (wersja podstawowa)

Zdemowane szczyty łóżka wykonane z nadającego się do recyklingu wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące.


(Opcjonalnie: Z kolorowymi lub nadrukowanymi panelami)



ALUMINIOWE RAMY Z DREWNIANYMI PANELAMI (opcjonalnie)



PANELE DREWNIANE (opcjonalnie)

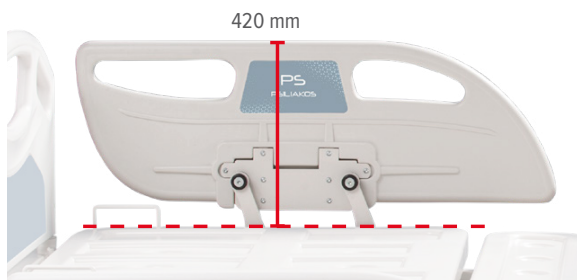


WYSOKOŚĆ PANELI BOCZNYCH

Maksymalna wysokość barierki bocznej od górnej części leża: 420 mm, gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo pacjenta.

FUNKCJA PRZESUWANIA PANELI BOCZNYCH

Panele boczne można przesuwać do dołu, co ułatwia bezpośredni dostęp do pacjenta oraz usprawnia poruszanie się po wąskich korytarzach szpitalnych.

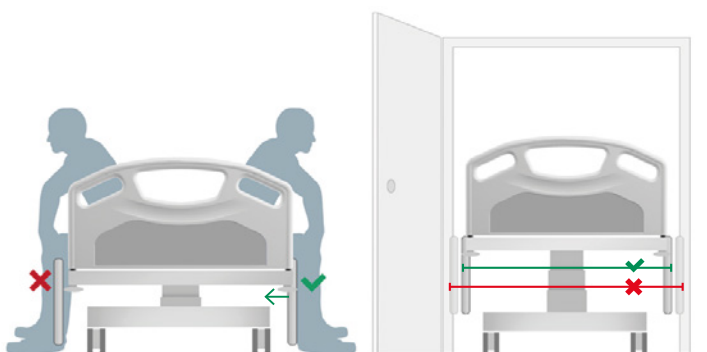

WYPOSAŻENIE



FUNKCJA AUTOKONTUR

Jednoczesne podnoszenie sekcji pleców i ud.



RKO (opcjonalnie)

Mechaniczny system natychmiastowego poziomowania w nagłych przypadkach RKO znajdujący się po obu stronach łóżka. Mechaniczny system RKO można wybrać opcjonalnie, aby automatycznie wypoziomować łóżko w najniższej pozycji.



PRZEDŁUŻENIE DŁUGOŚCI (opcjonalnie)


Przedłużenie o 18 lub 25 cm dzięki zintegrowanemu mechanizmowi teleskopowemu.



MECHANIZM BLOKADY RAMY (opcjonalnie)



OŚWIETLENIE NOCNE (opcjonalnie)

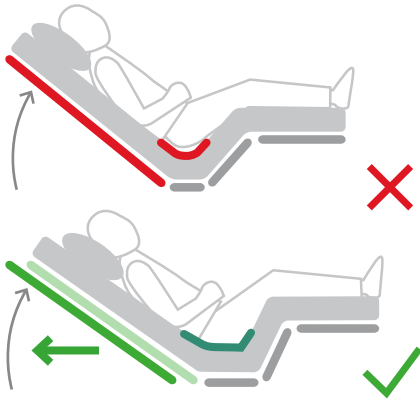

AUTOMATYCZNA REGRESJA

Część pleców ma wbudowaną funkcję ruchu do tyłu i odchyła się, aby uniknąć nacisku na okolice brzucha.



RENTGEN PLECÓW (opcjonalnie)

Radioprzezierna sekcja oparcia pleców wykonana z laminatu HPL z uchwytem na kasety.



5.KOŁO (opcjonalnie)

Aktywacja mechaniczna lub elektryczna.



SZYNA NA AKCESORIA

Szlina nośna z hakami do montażu różnych elementów wyposażenia.



PRZEWODOWY KONTROLER PACJENTA

Przewodowy kontroler pacjenta, łatwy do wymiany nawet przez niewyspecjalizowany personel.
(Opcjonalnie: Automatyczna blokada po określonym czasie)



ZINTEGROWANE ELEMENTY STERUJĄCE NA PANELU BOCZNYM (opcjonalnie)

Kontroler pacjenta zintegrowany z barierkami bocznymi.



KONTROLER PIELĘGNIARKI (opcjonalnie)

Przewodowy kontroler pielęgniarki do wykonywania wszystkich ruchów.

Kontroler ma możliwość częściowego zablokowania niektórych lub wszystkich ruchów.

Pozycje resuscytacji krążeniowo-oddechowej i fotela cardio również mogą być ustawiane przy pomocy kontrolera.




OCHRONA ANTYBAKTERYJNA (opcjonalnie)

Przeciwdrobnoustrojowe malowanie części metalowych i przeciwdrobnoustrojowa kompozycja części z tworzyw sztucznych z jonami srebra Ag.



KÓŁKA


Kółka o średnicy 150 mm z centralną blokadą.

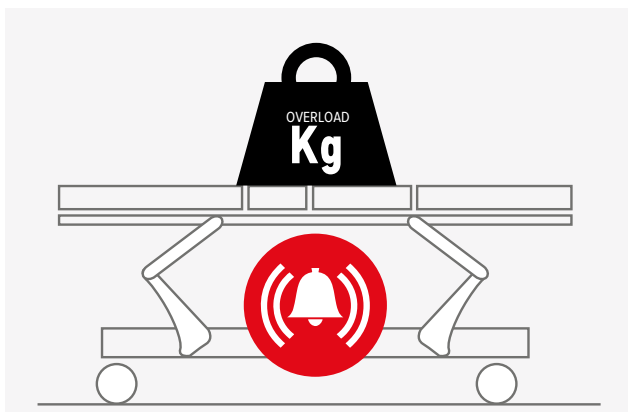

ALARM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED PRZECIĄŻENIEM (opcjonalnie)

System ochrony silnika przed przeciążeniem z alarmem dźwiękowym.

System zatrzymuje pracę silników w przypadku, gdy obciążenie przekroczy limit.

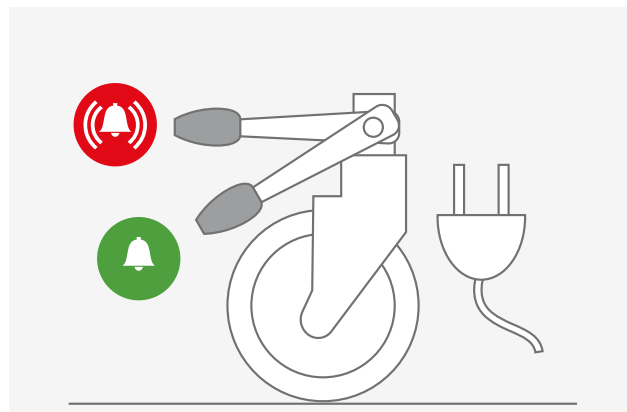

ALARM HAMOWANIA (opcjonalnie)

Alarm dźwiękowy w przypadku podłączenia łóżka do zasilania, a hamulce są wyłączone.

AKCESORIA



UCHWYT NA KARTĘ PACJENTA (opcjonalnie)



MIEJSCE NA POŚCIEL (opcjonalnie)



NIERDZEWNA RAMA WYCIĄGOWA
(opcjonalnie)



METALOWY WYSIĘGNIK Z UCHWYTEM
(opcjonalnie)



TV (opcjonalnie)
11" telewizor



MIEJSCE NA BUTLĘ Z TLENEM
(opcjonalnie)



STOJAK NA KROPLÓWKĘ
(opcjonalnie)

Stojak na kroplówkę z 2 lub 4 haczykami.




BATERIA (opcjonalnie)

Bateria zapewniająca autonomię ruchów elektrycznych.

DOSTĘPNE KOLORY DLA RAM METALOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY



RAL 9002

Szary biały



RAL 9006

Srebrny aluminiowy

DOSTĘPNE KOLORY CZĘŚCI PLASTIKOWYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY



RAL 1018

Żółty jasny



RAL 3020

Czerwony kubański



RAL 6019

Seledynowy średni



RAL 6032

Zielony sygnałowy



RAL 7040

Szary popielaty



RAL 5024

Niebieski pastelowy




RAL 1028

Żółty melonowy

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.


DOSTĘPNE KOLORY DLA POWIERZCHNI LAMINOWANYCH

PRZYKŁADOWE KOLORY



2262

Biały



2209

Jasny szary



2235

Szary




2633

Ciemny szary




8533

Ciemny zielony




2008

Jasny zielony



2054

Żółty



8514

Niebieski



1619

Tekstura klonu

POWYŻSZE ODCIENIE MOGĄ SIĘ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ OD RZECZYWISTYCH.










"Aghia Sofia"
Children Hospital

DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA



Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, obecnym w ponad 40 krajach.

Leonidas Psiliakos
Dyrektor generalny

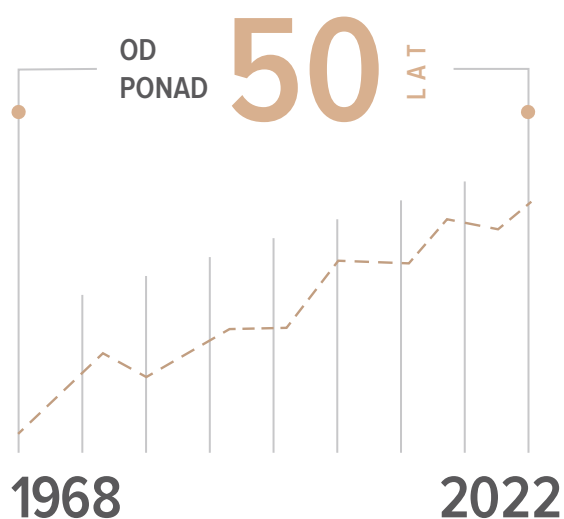

MEDICA Düsseldorf




ZDRAVOOKHRANENIYE Moskwa



ARAB HEALTH Dubaj

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.: 01012108

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 13485:2003
No.: 01212004

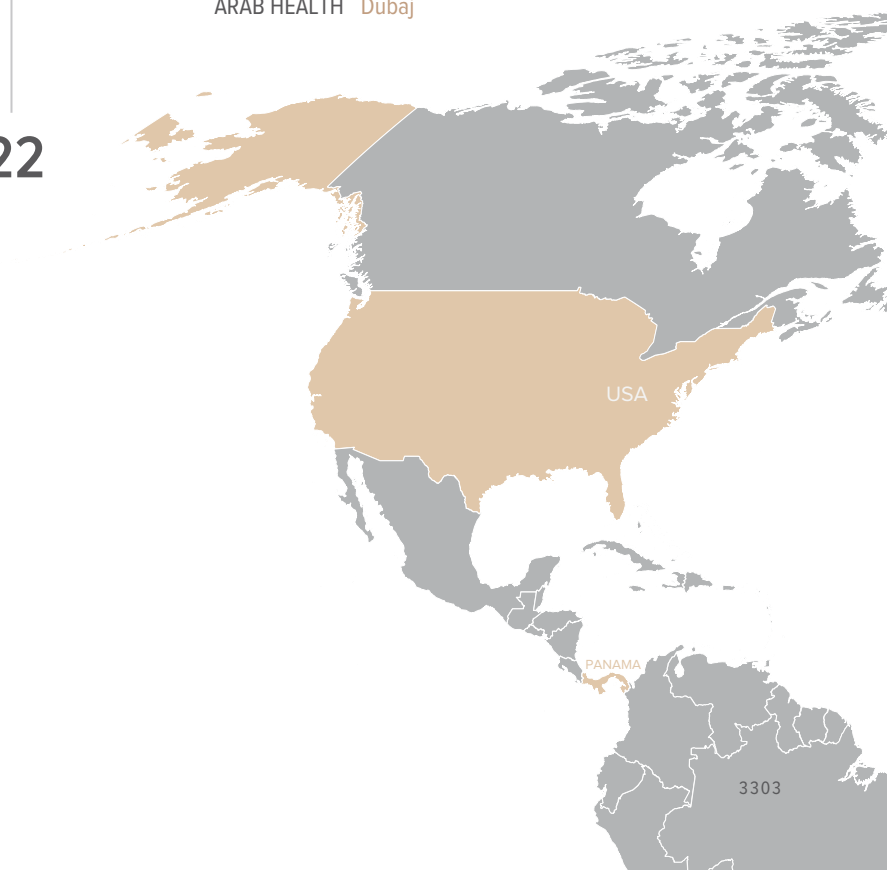

OBECNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA



Nasza firma uczestniczy w najważniejszych międzynarodowych targach.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWA



Nasza elastyczność, długoterminowa konsekwencja, jakość naszych produktów i ich szeroka gama, którą oferujemy, zaowocowały naszą obecnością i realizacją projektów w wielu dużych miastach za granicą.


Działamy w następujących krajach:

Albania
Algeria
Bahrajn
Bułgaria
Wybrzeże Kości Słoniowej
Chorwacja
Cypr
Egipt
Estonia
Francja
Macedonia Północna

Niemcy
Ghana
Iran
Irak
Izrael
Włochy
Jordania
Łotwa
Liban
Litwa
Libia

Malta
Mołdawia
Maroko
Holandia
Nigeria
Ukraina
Panama
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja

Arabia Saudyjska
Skopje
Serbia
Hiszpania
Szwajcaria
Tunezja
ZEA
Wielka Brytania
USA

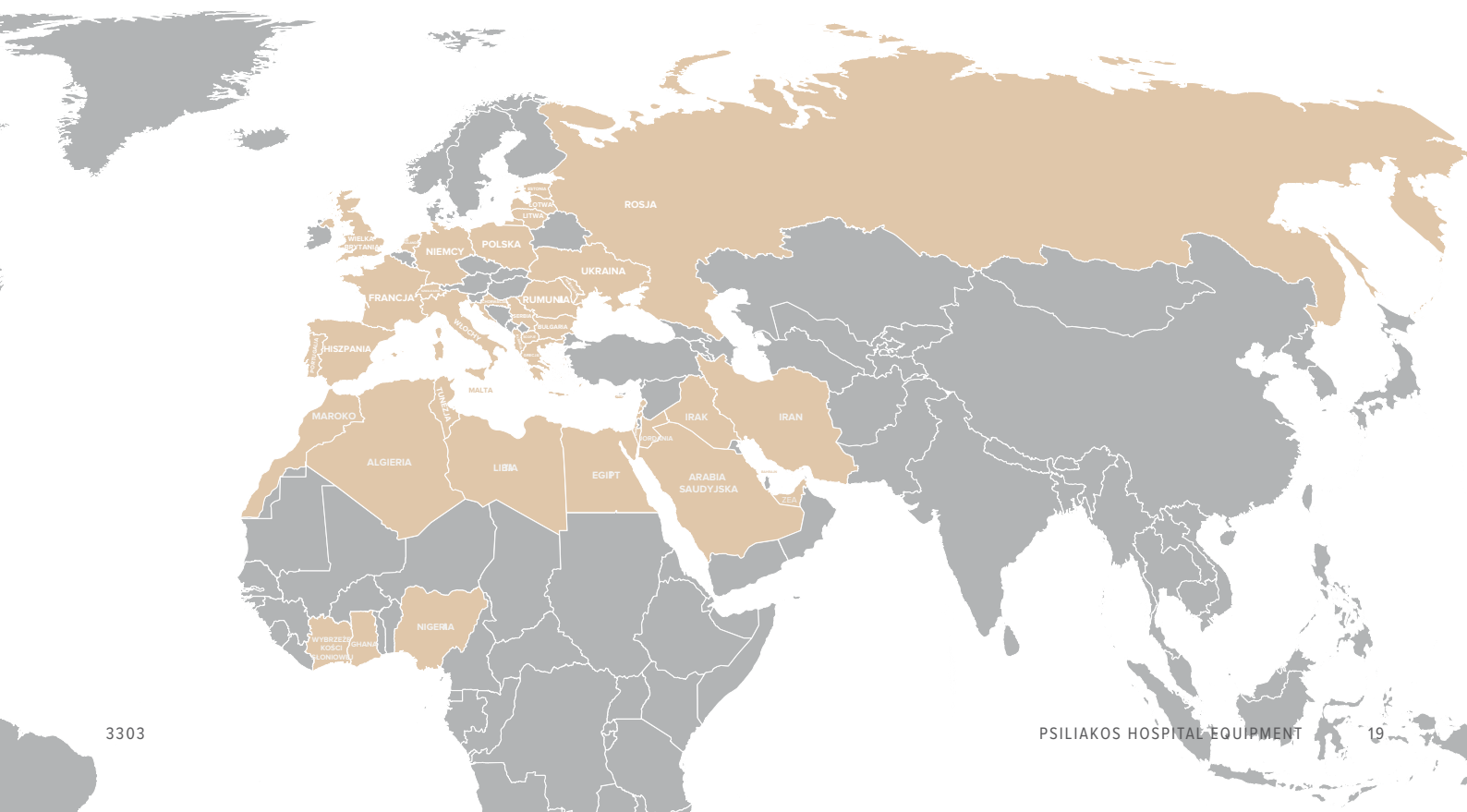



Dystrybutor:



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 57, sklep@meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 9001:2008
No.: 01012108

TÜV
AUSTRIA
HELLAS
EN ISO 13485:2003
No.: 01212004

