
Karty katalogowe

Meden-Inmed Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 50 / 53
fizjoterapia@meden.com.pl
www.meden.com.pl

Te ulotki zawierają informacje dotyczące wyrobów medycznych, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel medyczny i stosowane zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Aquaray to wanna terapeutyczna o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów hydroterapii. Główną funkcją wanny **Aquaray** jest automatyczny hydromasaż strefowy. W zależności od wykonania, wanna **Aquaray** wyposażona jest w dysze do hydromasażu, które pracują w 5 albo 3 strefach lub 1 strefie niecki wanny.



Długość: **225 cm**



Wysokość: **71 cm**



Szerokość: **88 cm**



Masa: **210 kg**



Pojemność: **160-320 l**

Cechy charakterystyczne:

- niecka wanny dostępna w kolorze białym lub calypso,
- niecka wykonana z żelkotu, wzmocnionego włóknem szklanym,
- ekonomiczne zużycie wody - około 160 l,
- 1 strefa wyposażona w 26 dysz do hydromasażu,
- regulacja intensywności hydromasażu poprzez napowietrzenie dysz
- 98 otworów powietrznych do masażu perełkowego,
- system dezynfekcji układu wodnego wanny,
- system automatycznego napełniania wanny wodą,
- 3 programy standardowe: (P1-P3) + 17 programów użytkownika (P4-P20),
- nowoczesny, dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem,
- 2 czujniki temperatury,
- 2 czujniki poziomu wody,
- słuchawka prysznicowa,
- wyprofilowane miejsca dla ramion i nóg, umożliwiające zachowanie właściwej pozycji pacjenta podczas zabiegu.


Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa (min.) [l]:	160
Pojemność do przelewu [l]:	320
Napełnianie* [min]:	ok. 4
Spust [min]:	ok. 2,5
Pobór prądu [A]:	22
Zasilanie [V/Hz]:	230/50
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	225 x 88 x 71
Masa [kg]:	170 (210 z pełnym wyposażeniem)

* do min. poziomu wody - w zależności od ciśnienia w instalacji wodnej (zalecany przepływ ~ 70 l / min)

Akcesoria standardowe:

- stopień ułatwiający wejście do wanny,
- zagłówek,
- podpórka pod nogi dla pacjentów o niższym wzroście.

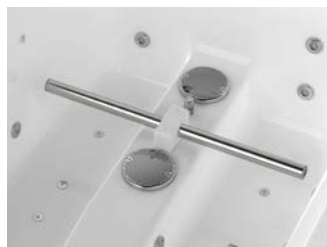

Dodatkowe opcje wyposażenia:

CHROMO 12: 12 pojedynczych źródeł światła

CHROMO 24: 24 pojedyncze źródła światła

CHROMO 36: 36 pojedynczych źródeł światła

AUDIO: możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego AUDIO

AROMA: zbiornik na zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku

3 STREFY: wyposażone w 26 dysz do hydromasażu lub

5 STREF: wyposażonych w 36 dysz do hydromasażu

HOSE: bicz wodny do manualnego masażu podwodnego z regulacją ciśnienia

BATERIA TERMOSTATYCZNA (wydłużony czas napełniania do 20%)

OZON: generator ozonu

PODGRZEWACZ

Wanna dostępna również w wersji balneologicznej - zapytaj naszego handlowca o **Aquaray Balneo**.

