

The Art of Endoscopy®



POLYDIAGNOST

MICROPERC®

“the all seeing needle“

Wysokiej rozdzielczości półsztywna szeroko
kątowna 10.000 pikselowa optyka ze zintegrowanym
światłowodem.

Zewnętrzna średnica tylko 0,9 mm

Od początku delikatny i bezpieczny
Micro-PCNL



Przezskórna nefrolitotomia



Płaszcz roboczy do włókna laserowego 4,8 Fr

Płaszcze robocze do litotrypsji pneumatycznej 8 Fr i 10,5 Fr

view micro – see macro®


MICRO PCNL z MICROPERC®



“The all seeing needle” - punkcja nerki pod kontrolą



Kontrola i terapia przez płaszcz 4,8 Fr i 8 Fr

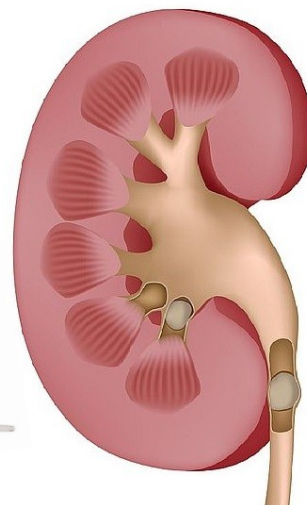

MicroPerc® pasuje do wszystkich standardowych kamer medycznych i światłowodów

Zestaw aplikacyjny PCNL zawiera:

Specjalne igły z możliwością płukania, płaszcz 4,8 Fr, płaszcz 8 Fr z poszerzadłem, drut prowadzący, adapter 3- wejściowy, adapter Tuohy Borst, linia infuzyjna, zawór trójdrożny.

Kompletny zestaw PCNL można stosować w włókniach laserowych lub sondami fali uderzeniowej. W przypadkach potrzeby stosowania płaszczy o większej średnicy dostępny jest wielorazowy płaszcz 10,5 Fr z metalowym poszerzadłem.

Nr katalogowy	Opis produktu	Ilość
PD-PN-1008	Zestaw PCNL 4,8 Fr i 8 Fr, jednorazowy	10
PD-PN-0020	Płaszcz 10,5 Fr z poszerzadłem, wielorazowy	1
PD-PN-0030	Adapter 2 wejściowy do płaszcza 10,5 Fr, wielorazowy	1
PD-TD-0060	Zestaw szczotek do płaszcza 10,5 Fr, 10 sztuk	1
PD-TD-0040	Zestaw szczotek do adaptera 2 wejściowego, 10 sztuk	1
PD-FS-4001	Okular stało ogniskowy, czarny, mocowany do ramienia trójpřzegubowego	1
PD-PN-0080	Optyka wysokiej rozdzielczości, 120 stopni, półsztywna, 267 x 9 mm	1
PD-DS-1210	Blokada optyki 26 mm	1
PD-TD-0020	Zestaw szczotek do blokady, 5 sztuk	1
PD-AC-0093	Trójpřzegubowy uchwyt z mocowaniem zaciskowym do optyki i okularu	1