


# Pozostały sprzęt do kinezyterapii



Przyłóżkowe Urządzenie Rehabilitacyjne (**PUR**) wraz z osprzętem (linki, podwieszki, obciążniki, pasy stabilizujące) daje możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń rehabilitacyjnych. PUR umożliwia wczesne uruchomienie chorego i prowadzenie usprawniania równoległe z leczeniem podstawowym. Zamontowane kółka jezdne z hamulcem pozwalają na łatwe przemieszczanie PUR-a i obsługę wielu chorych bez konieczności ich przewożenia na salę rehabilitacyjną.

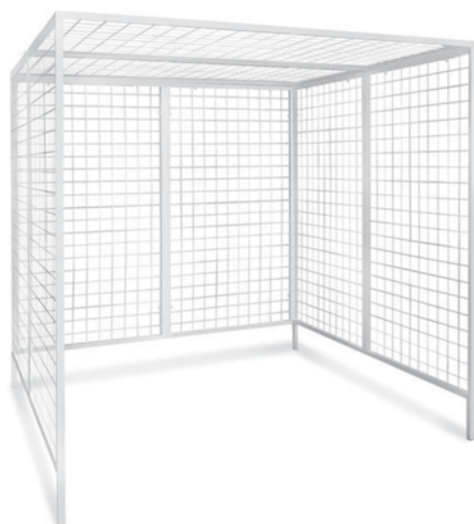

Kabina **UGUL** jest podstawowym elementem Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego (UGUL). Przeznaczona jest do stosowania kinezyterapii indywidualnej z kilkoma pacjentami równocześnie. Stosuje się w niej zawieszania całkowite, ćwiczenia czynne w odciążeniu oraz czynne z oporem i z zastosowaniem systemu bloczkowo-ciężarkowego. Istnieje możliwość zastosowania wyciągu Perschl'a. Przewieszka wraz z kabiną tworzy dodatkowo dobrze oprzyrządowane stanowisko.



Rotor **RG** jest to rotor do ćwiczeń kończyn górnych z łatwą regulacją oporu. Idealnie nadaje się do mocowania na kracie kabiny UGUL.



Rotor **RD** jest to rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z łatwą regulacją oporu. Posiada wysuwany dyszel, zakończony chwytakiem do stabilizacji na pionowym lub poziomym przedmiocie.



Poręcz do nauki chodu są wykonane na stalowej konstrukcji i przystosowane są do ćwiczeń związanych z reedukacją chodu. Dzięki możliwości regulacji wysokości poręcz może być wykorzystane do ćwiczeń z dziećmi z wadami rozwojowymi kończyn dolnych.

# Pozostały sprzęt do kinezyterapii



Fotel **UPR-01 B** stosowany do ćwiczeń oporowych stawu kolanowego oraz mięśni okołostawowych. Daje możliwość profesjonalnej rehabilitacji pacjentów po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie stawów obwodowych oraz po różnego typu urazach stawów i układu kostno-mięśniowego. Konstrukcja zwykła nierozkładana. Wyposażony jest w: jedno urządzenie rehabilitacyjne, dodatkowy uchwyt do ćwiczeń kończyn górnych, komplet ciężarków 10 kg oraz komplet pasów stabilizacyjnych. W ofercie znajdują się również inne fotele do ćwiczeń oporowych kończyn dolnych i górnych.



**UCS** jest to bardzo funkcjonalne urządzenie do ćwiczeń stawu skokowego umożliwiające ćwiczenie w pozycji siedzącej: zginanie, prostowanie, rozciąganie albo rotacje podczas ćwiczeń z obciążeniem jak i bez. Posiada możliwość ustawienia kąta i zablokowanie rotacji stopy wzdłuż podłużnej jak i poprzecznej osi, tak samo jak możliwość dodania obciążenia w tych kierunkach. Pełną regulację dopasowania stopy umożliwiają skórzane paski.



Tablice do ćwiczeń manipulacyjnych ręki z oporem i bez. Dzięki regulacji wysokości, obrotowemu statywowi oraz licznym przyrządom do ćwiczeń ręki są to bardzo funkcjonalne urządzenia, niezbędne w każdej przychodni rehabilitacyjnej.



**Wzmocniona, rozkładana tablica z nadrukowaną siatką posturograficzną** rozwijana z aluminiowej, stabilnej kasety. Nadruk siatki posturograficznej naniesiony na trwały i odporny laminat o wymiarach 85 x 200 cm.



Lustra korekcyjne są wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie. Rama lustra wykonana jest z kształowników stalowych. Środkowy element lustra posiada naciętą siatkę posturograficzną.

