

WINBACK®

YOUR BODY IS BACK



PHYSIO



SPORT

WINBACK


Zwycięski powrót!

Winback pomaga przyspieszyć rehabilitację zawodników kontuzjowanych, aby mogli jak najszybciej powrócić do uprawianych dyscyplin.

Dostępny w **23 krajach**.
70 partnerów zespoły i federacje sportowe.



PARTNER MEDYCZNY FEDERACJI KRAJOWYCH

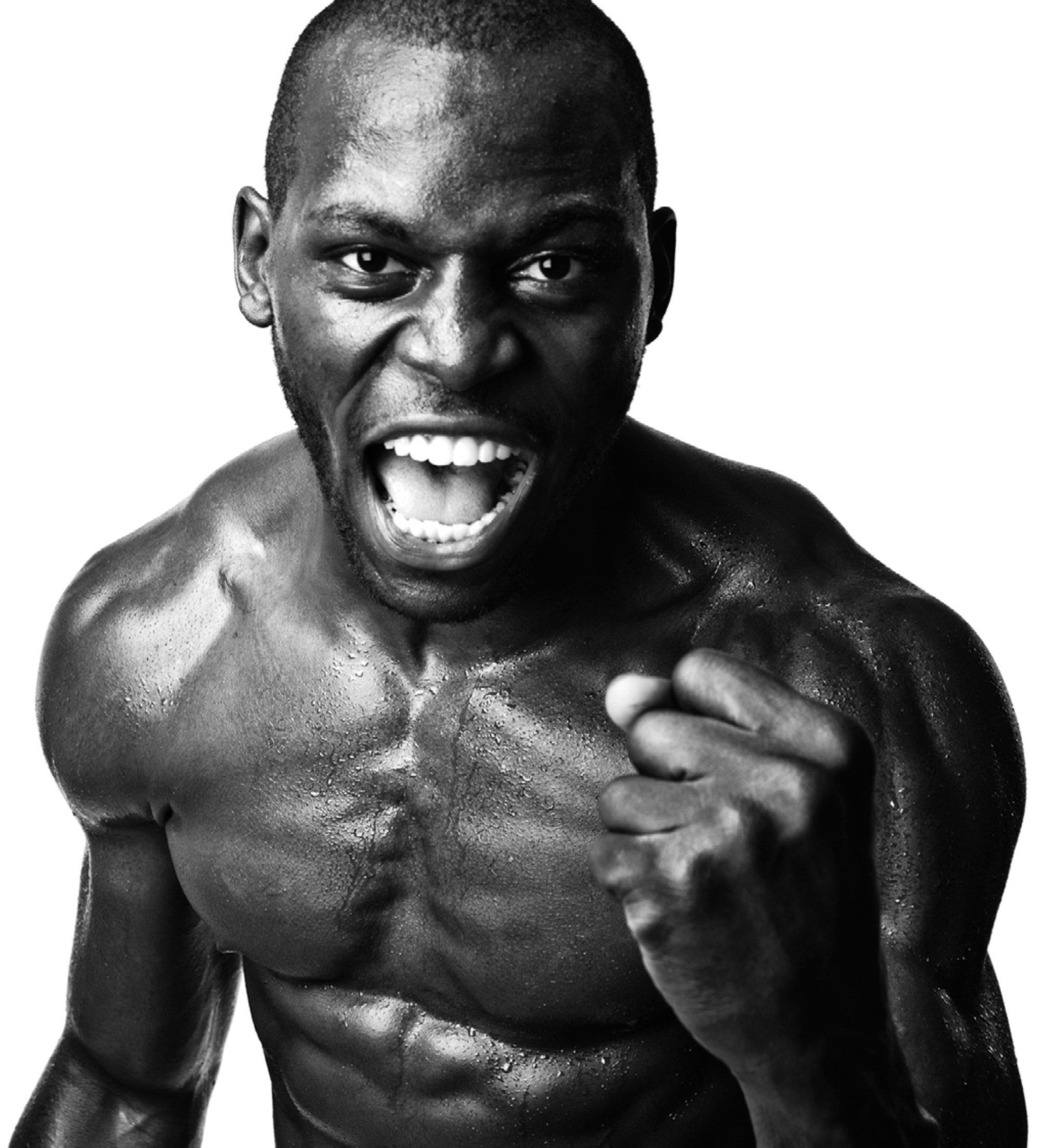

OPINIE KLIENTÓW

W ciągu 3 lat ponad 1000 pracowników służby zdrowia i branży sportowej zaczęło używać urządzeń Winback. Osoby posługujące się Winback są najlepiej przygotowane do rozmowy na ten temat, więc zapytaliśmy, co sądzą.

Postawa - sieć - eksperci - wyniki

Terapia Winback Tecar przyspiesza proces rehabilitacji i zapewnia szybszy powrót do aktywności fizycznej po zerwaniu ścięgna Achillesa.

CHRISTOPHE BUÉE - CEO WINBACK



Mogę poddawać terapii głęboko położone tkanki w sposób bezbolesny. Urazy, a nawet przewlekłe schorzenia takie jak bark zamrożony, można leczyć znacznie szybciej.

SERGE MAS - FIZJOTERAPEUTA OSTEOPATA

Najbardziej spodobała mi się skuteczność technologii Winback w drenażu. FixPads pozwoliły mi zachować swobodne ręce i wykonywać ruchy, jak zwykle, ale z dodatkową mocą terapii Tecar.

LOÏC DECHAINE - FIZJOTERAPEUTA



Winback nie jest po prostu kolejnym urządzeniem, to doskonałe uzupełnienie technik manualnych wykorzystywanych w naszej codziennej praktyce.

FRÉDÉRIC DELACOUR - FIZJOTERAPEUTA OSTEOPATA



Winback jest częścią mojego codziennego życia, uzupełnia i wzmacnia moją pracę manualną. Modułowa konstrukcja oznacza, że mogę ją dostosować do każdego rodzaju leczenia, od bardzo delikatnej rehabilitacji dłoni do terapii uda wyczynowego sportowca.

AUORE CHAMBAUDU - FIZJOTERAPEUTKA



2500
fizjoterapeutów
Przeszkolonych w zakresie leczenia

10 000
zabiegów Winback
dziennie we Francji



TERAPIA WINBACK TECAR

TERAPIA WINBACK TECAR wzmacnia moc twojego masażu, aby dotrzeć do struktur głębokich, do których dostęp jest utrudniony.

Energia WINBACK łączy łatwą obsługę i intuicyjną funkcjonalność. Możesz skoncentrować się na ruchu, a energia podąży za każdym Twoim najmniejszym gestem oraz zapewni niezrównany komfort i elastyczność pracy.

FIZJOLOGICZNY BIO AKCELERATOR

REHABILITACJA

2X

SZYBSZA ⁽¹⁾

Zapewnij swoim pacjentom szybszą, bardziej komfortową i bezbolesną regenerację.

① POZBĄDŹ SIĘ BÓLU

Energia Winback blokuje informacje związane z bólem na ponad 48 godzin. Twój pacjent ma dobre samopoczucie, jest zrelaksowany, dzięki czemu terapia jest bardziej skuteczna.

② PRZYŚPIESZ GOJENIE

Energia emitowana przez WINBACK usprawnia procesy regeneracyjne organizmu poprzez ogólne przyspieszenie tempa wymian wewnątrz i zewnątrz komórkowych. Efekty zabiegu będą się utrzymywać długo po zakończeniu sesji.

③ UWOLNIJ RUCH

Energia Winback uwalnia napięcia (przykurcze, obrzęki, zwłóknienia) przez miejscową rewaskularyzację. W ciągu zaledwie 2 minut można bez wysiłku złagodzić głęboki przykurcz. Energia krąży w uszkodzonej tkance jeszcze raz, a pacjent odzyskuje zakres ruchomości.

(1) T.E.C.A.R terapia nelle tendinopatie della cuffia dei rotatori: nostra esperienza. G. Sanguedolce, C. Venza, P. Cataldo, G. Letizia Mauro – Cattedra de Medicina Fisica e Riabilitativa Università degli Studi Palermo. EUROPA MEDICO PHYSICA – September 2009.

JAK TO DZIAŁA?

Energia Winback to energia fal radiowych związana z promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym przez prąd zmienny o częstotliwości od **300 kHz** do **1 MHz**.

Przyspiesza "naturalną regenerację" tkanek. Jej niska intensywność oznacza, że jest całkowicie nieinwazyjna i w 100% naturalna dla organizmu ludzkiego.

TERAPIA WINBACK TECAR może działać na różnych głębokościach. Badania prowadzone przez Winback doprowadziły do wdrożenia 3 częstotliwości pracy urządzenia, umożliwiających oddziaływanie powierzchniowe, pół-głębokie i głębokie.

GOJENIE
97%
BARDZIEJ EFEKTYWNE ⁽¹⁾

Energia Winback pobudza wymianę wewnątrz i zewnątrz komórkową, a zatem usprawnia proces gojenia tkanek.

WASKULARYZACJA
6X
SZYBSZA ⁽¹⁾

Naturalna oporność tkanek przekształca energię fal radiowych w ciepło (diatermia). Miejscowy wzrost temperatury zwiększa unaczynienie obszarów ograniczonych (zwłóknienia, przykurcze) i umożliwia ruch.

NATYCHMIASTOWA
i UTRZYMUJĄCA SIĘ
ULGA W BÓLU

przez ponad 48 godzin. Ból pacjenta jest zredukowany w bardzo krótkim czasie.

1 MHz
DZIAŁANIE POWIERZCHOWNE

500 KHz
DZIAŁANIE PÓŁ-GŁĘBOKIE

300 KHz
DZIAŁANIE GŁĘBOKIE

Przeciwwskazania: rozrusznik serca/ICD, pompa insulinowa, neurostymulator, ciężkie nadciśnienie/ niedociśnienie tętnicze, nowotwory, zabiegi w okolicach chrząstki wzrostowej u dzieci, zakrzepowe zapalenie żył

Środki ostrożności: w przypadku obecności w ciele pacjenta materiałów do osteosyntezy zabieg można wykonać, jednak należy zachować szczególną ostrożność przy dawkowaniu mocy urządzenia (max 50% dostępnej mocy).

(1) W ciągu 6 sesji, 97% skuteczności w zakresie urazów mięśni i stawów. Ocena efektów leczenia wieloczęstotliwościowego, diatermicznego. S. Piolani, A. Soldati, F. Speziale, P. Bonifacci, T. Cuzzani, M. Scacchetti, A. Marsotti, S. Alberti, M. Cagnani, R. Marzavillo, A. Garvalli, G. Poletti. Publication Sport & Medicina. Styczeń/Luty 2009r. Stosowane częstotliwości 500 kHz, 750 kHz i 1 MHz. (2) Badanie kliniczne Transferu elektrycznego w hipertermii w leczeniu lumbago. K. TAKAHASHI, N. TSUZUKI, K. ZHONG-SHI - Klinika chirurgii ortopedycznej - Saitama Medical Center - Oddział fizjoterapii Sci 11 :45-51, 1999. Stosowana częstotliwość to 650 kHz (3) Terapia T.E.C.A.R. Pooperacyjne leczenie złamań kości udowej. A. TERRANOVA, G. VERMIGLIO, S. ARENA, A. CICCIO, S. DI DIOI, M. VERMIGLIO - Vol. 44 - Suppl. 1 to No. 3 EUROPA MEDICOPHYSICA - Oct. 2008. Stosowana częstotliwość to 500 kHz

DZIAŁANIE POWIERZCHOWNE/ DZIAŁANIE GŁĘBOKIE

Nazwa **TECAR** pochodzi od połączenia transferu energii (TE) oraz elektrod: pojemnościowych **CET** i rezystywnych **RET** (CAR), za pomocą których jest ona przenoszona. Dzięki elektrodom **CET** i **RET** można przesyłać energię do ciała pacjenta w sposób ogólny lub miejscowy, powierzchniowy lub głęboki.



DZIAŁANIE POWIERZCHOWNE


TKANKA MIĘKKA = CET skupia energię w mięśniach i innych tkankach miękkich. Działanie ma charakter miejscowy, powierzchniowy lub półgłęboki. (DEEPCET)

MIEŚNIE, POWIĘZIE, TRZEWIA,
UKŁAD LIMFATYCZNY
I NACZYNIOWY.

DZIAŁANIE GŁĘBOKIE

TKANKA TWARDA = RET skupia energię we wszystkich twardej tkankach, takich jak stawy, ścięgna i kości. Działanie jest wielostawowe i głębokie.

WIĘZADŁA, STAWY, ŚCIĘGNA,
OKOSTNA, KOŚCI.

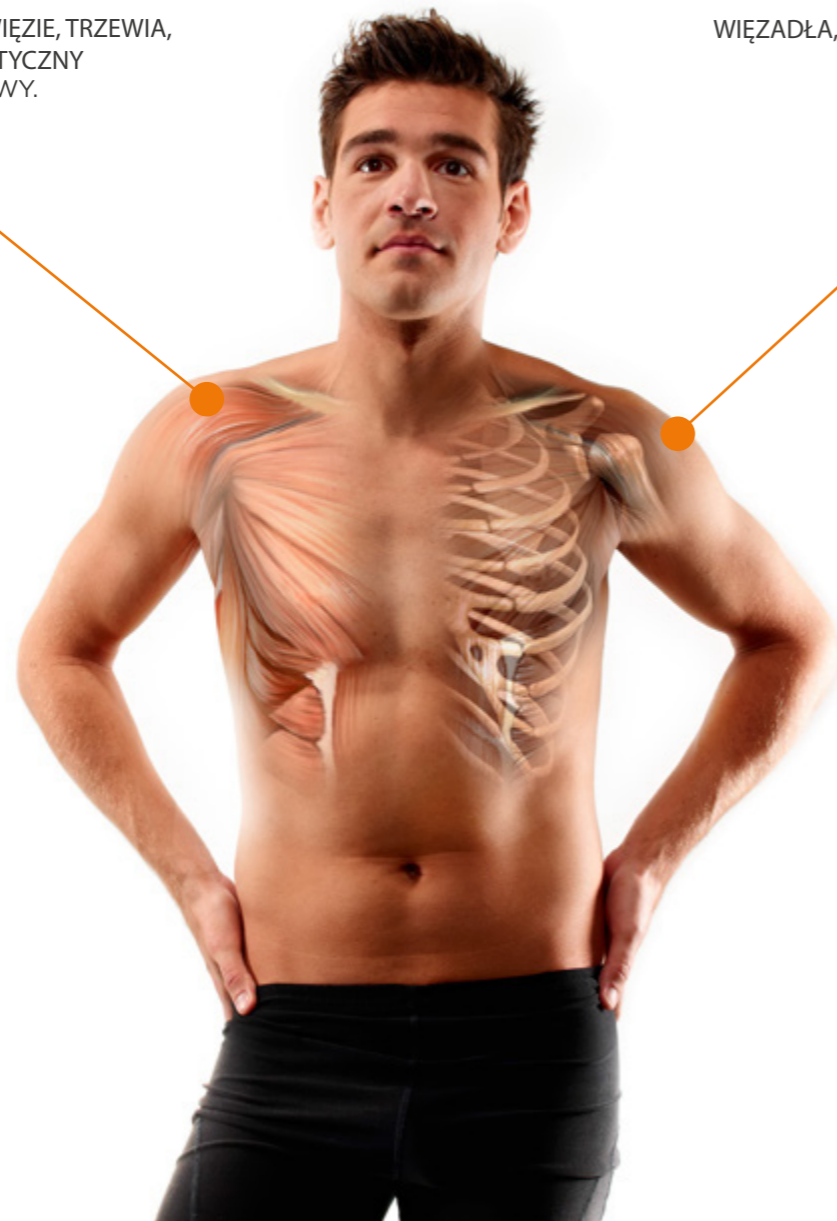

SWOBODA PRACY Z CIAŁEM PACJENTA



TRYB RĘCZNY (1.0)



TRYB ZE SWOBODNYMI
RĘKAMI (2.0)



TRYB EKSPERTA (3.0)

TRYB EKSPRESOWY (4.0)



TRYB INTELIGENTNY (5.0)

TRYB RĘCZNY 1.0

1 MOBILNA ELEKTRODA + 1 STAŁA ELEKTRODA




MOBILNA ELEKTRODA (CET LUB RET)

Przesuwanie MOBILNEJ elektrody zwiększa efektywność masażu. Za pomocą mobilnej elektrody **CET** oddziałujesz miejscowo na tkanki miękkie. Za pomocą mobilnej elektrody **RET** przenosisz energię w głąb tkanek twardych.



ELEKTRODA NEUTRALNA (PŁYTA ZWROTNA)

Twoja druga elektroda jest nieruchoma. Pozostaje w kontakcie z ciałem pacjenta i zamyka obwód elektryczny wraz z elektrodą mobilną.

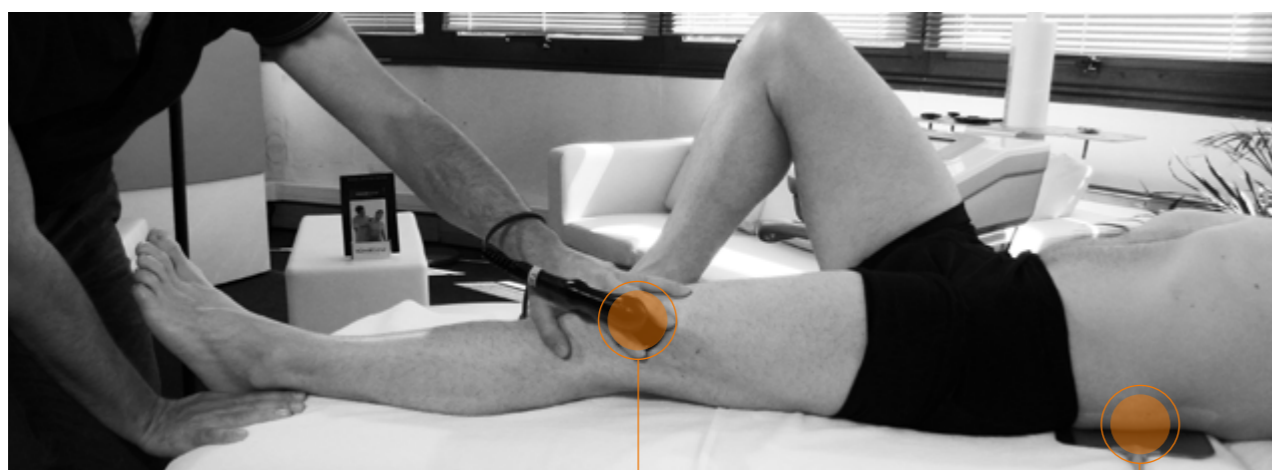

ELEKTRODA MOBILNA

ELEKTRODA NEUTRALNA

Odległość między dwoma elektrodami jest ważna i umożliwia leczenie dużego obszaru wielostawowego, np. kończyn dolnych. Pacjent wygodnie leży na stole do masażu, dzięki czemu możesz swobodnie pracować w trybie głębokim.



Za pomocą techniki **MyBACK** twoja ręka zastępuje elektrodę mobilną. **Energia Winback** przenika do ciała pacjenta poprzez rękę terapeuty. Ta całkowicie nieinwazyjna technika zapewnia wyjątkowe doświadczenie, w którym skutki energii można odczuć bezpośrednio... tj. łagodzenie przykurczu w ciągu kilku chwil jest w zasięgu Twoich rąk. Niezapomniany efekt.

Zrosty mięśnia czworogłowego: Twoja pracująca ręka emituje energię Winback. W ten sposób możesz pozbyć się szybko zrostów tkankowych.


Samoprzylepna elektroda neutralna zastępuje tradycyjną płytę zwrotną. Przyczepiając elektrodę do skóry pacjenta, możesz zastosować bardziej dynamiczne leczenie (mobilizacja) lub nawet leczyć pacjenta bez stołu do masażu. Każda elektroda samoprzylepna jest przeznaczona dla jednego pacjenta na 5-6 zabiegów. Jest to zgodne z surowymi standardami higieny szpitalnej.



TRYB ZE SWOBODNYMI RĘKAMI 2.0

TYLKO OD
WINBACK

2 ELEKTRODY STAŁE

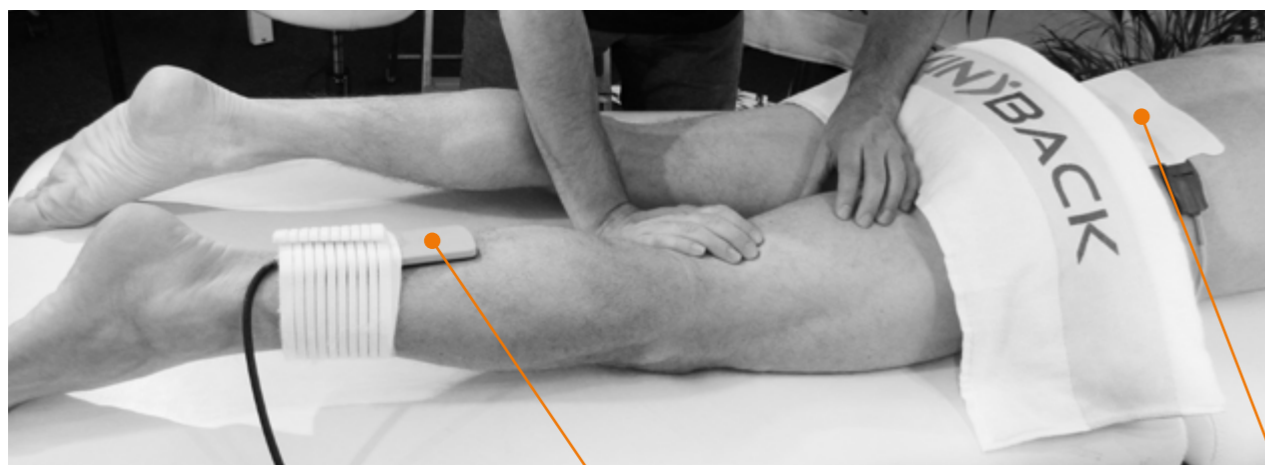

ELEKTRODA STAŁA (RET)



SAMOPRZYLEPNA
ELEKTRODA NEUTRALNA


Przytwierdzenie dwóch elektrod do ciała pacjenta całkowicie uwalnia ręce terapeuty.

TECAR 2.0 to "szwajcarski scyzoryk" energii Winback, istnieje tak wiele sposobów, aby go używać, że nie sposób je wszystkie opisać. 3 przykłady typowych, obecnie stosowanych zabiegów.

TERAPIA DYNAMICZNA

Dzięki wielu elektrodom, wszystkie aktywne techniki są kompatybilne z trybem oporowym. Możemy efektywnie rozluźnić pasmo biodrowo-piszczelowe np. poprzez rozciąganie, techniki mięśniowo-powięziowe.

Pacjent może również niezależnie wykonywać wszystkie ćwiczenia gimnastyczne.

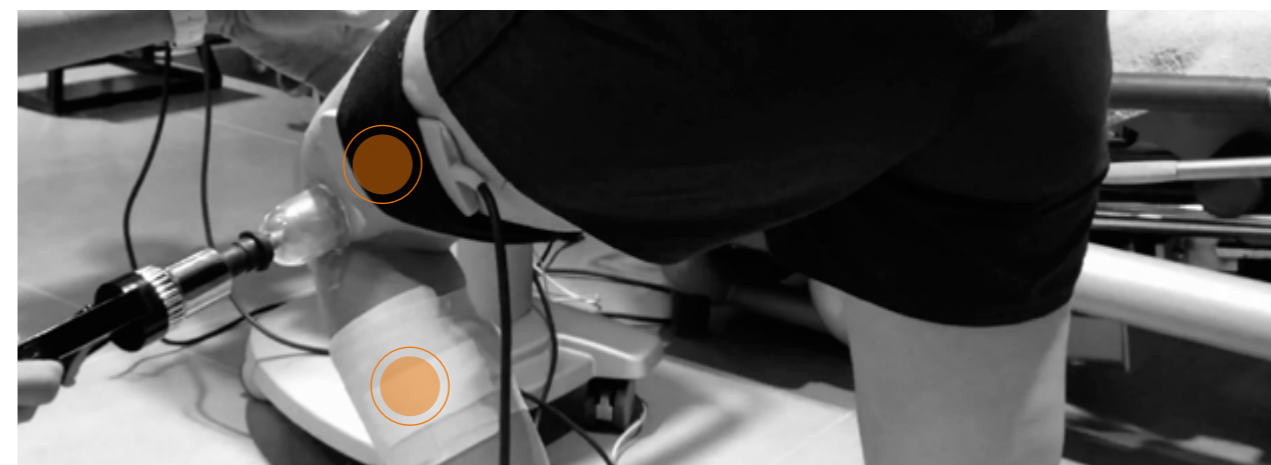

LECZENIE WSPOMAGAJĄCE

Winback zwiększa możliwość użycia elektrod na ciele pacjenta. Dzięki Tecar 2.0 możliwe jest zastosowanie dwóch stałych elektrod, z których jedna zastępuje płytę zwrotną. Elektrody te emitują energię na przemian. Kiedy jedna elektroda emituje, druga odbiera. Umożliwia to przekazywanie jednorodnej energii.

Zabieg autonomiczny trwa zazwyczaj 10-15 min. Dzięki funkcji low pulse i dynamicznemu dostosowaniu częstotliwości, Winback oferuje autonomiczną aplikację, w celu redukcji podwyższonego napięcia w tkankach poddawanych terapii.

Zastosowanie prądu w elektrodach stałych koncentruje go na obszarach objętych terapią przez 10-15 minut. Opcja ta umożliwia optymalizację zabiegu i opracowanie nowych protokołów.



LECZENIE ZE SWOBODNĄ RĘKĄ

BRANSOLETKI MYBACK:

Nowe bransoletki MYBACK - niezbędne dla terapeutów manualnych. Ręka terapeuty ubrana w bransoletkę zamyka obwód elektryczny z ciałem pacjenta. Jej założenie i przygotowanie się do leczenia pacjenta zajmuje kilka sekund. Co więcej, nie potrzebujesz już kremu na rękach. Połączenie skóry i bransoletki daje optymalną powierzchnię kontaktową...

Bransoletka oferuje swobodny ruch rąk i oszczędność czasu, co jest niezbędne dla terapeutów manualnych.

<-Leczenie bólu szyi przy użyciu bransoletki Winback (swobodne ręce).

TRYB EKSPERCKI 3.0

2 ELEKTRODY MOBILNE (1 W KAŻDEJ RĘCE)



MOBILNA ELEKTRODA (CET LUB RET)

CET działa na miejscowe tkanki miękkie.
RET dystrybuuje energię w głąb tkanek twardych.



MOBILNA ELEKTRODA (PŁYTA ZWROTNA)

Druga elektroda zastępuje elektrodę neutralną pochodzącą z Tecar 1.0, umożliwiając precyzyjne rozprowadzanie energii przy pomocy obu rąk.

Przełącz się na tryb ekspercki ze skoncentrowaną i dynamiczną energią. Każda elektroda naprzemiennie emituje energię WINBACK, oferując skoncentrowane i bardzo szybkie leczenie (poniżej 10 minut) na ściśle ukierunkowany staw lub części ciała. Elektroniczne zarządzanie energią WINBACK pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

KONFLIKT BARKOWY:

Praca z dwoma aktywnymi elektrodami. Energia WINBACK jest emitowana pomiędzy obiema rękami. Aplikacja ta jest szczególnie skuteczna w terapii złożonych struktur, takich jak obręcz barkowa. Mobilna energia oznacza, że uraz można wyleczyć ze wszystkich stron. Cały zakres ruchów barku zostanie przywrócony w krótkim czasie z nieporównywalną wygodą. Zastosowanie wiedzy będzie w tym zakresie nieograniczone. Pozycjonowanie pacjenta jest łatwiejsze i szybsze, już nigdy nie odpuścisz sesji z WINBACK!



TYLKO OD
WINBACK



Technologia WINBACK pozwala terapeutom korzystać z pełnej swobody swoich ruchów i zapewnia pacjentowi szybsze leczenie.

TECAR umożliwia terapeutom połączenie technologii wykorzystującej prąd wysokiej częstotliwości stymulujący metabolizm komórkowy z jego zdolnościami manualnymi.

Dlatego też terapeuta nie potrzebuje zaprogramowanego narzędzia, ale intuicyjnej technologii, dostosowanej do jego własnych metod pracy.

WINBACK to innowacyjne urządzenie, które przyspiesza sesje terapii manualnej. Akcesoria stosowane wyłącznie w Winback pozwalają na dotarcie bodźca terapeutycznego do wszystkich uszkodzonych tkanek w rekordowym czasie.



TRYB EKSPRESOWY 4.0

2 ELEKTRODY W JEDNEJ


TECAR 4.0 Winback opiera się na połączeniu technologii wysokiej częstotliwości, w której dwie elektrody będące w kontakcie z pacjentem są połączone w 1. Takie połączenie zapewnia skoncentrowaną i powierzchniową energię, która stymuluje natychmiastową reakcję w tkance.

TECAR 4.0 Obie elektrody zostały zintegrowane w jednej głowicy, która koncentruje energię na małych obszarach ciała bez konieczności stosowania dużej mocy. Dzięki zastosowaniu 3 biegunów, tryb ten posiada bieguny nadajnika/odbiornika w jednej głowicy, które są sparowane poprzez skomplikowany algorytm.

Ilość energii jest optymalna dla stymulacji komórek na powierzchni kilku centymetrów.

6X SZYBCIEJ

NIŻ TRADYCYJNE LECZENIE TECAR

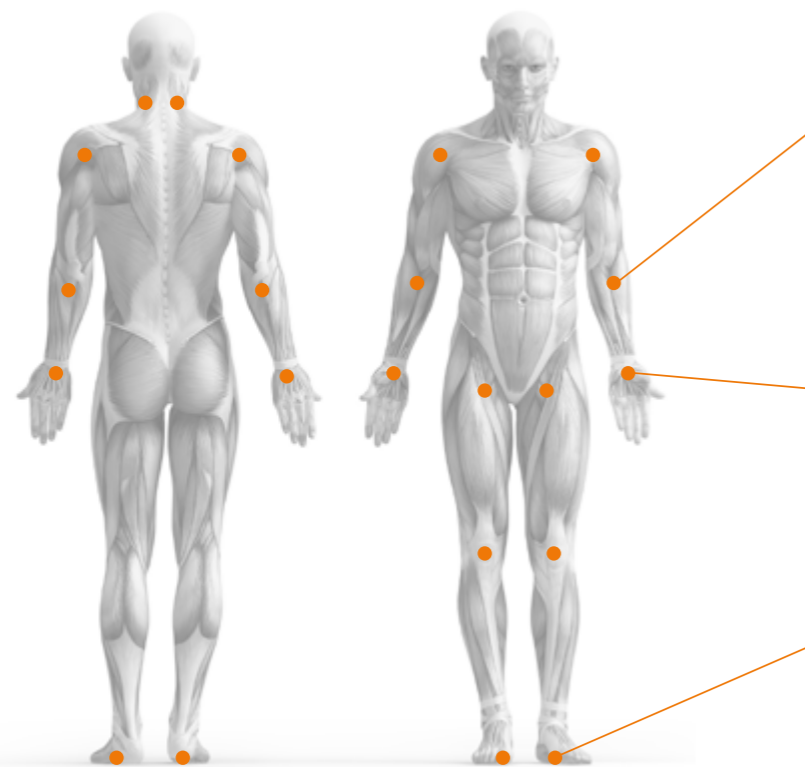


3X MNIJSZE ZUŻYCIE ENERGII

NIŻ TRADYCYJNE LECZENIE TECAR



MIX3 LUB TRÓJ-BIEGUNOWE (BODY & FOCUS)

MIX3 posiada ręczną elektrodę z trzema dynamicznymi biegunami, które przełączają się naprzemiennie między prądem emitującym i odbierającym. 2 z 3 biegunów są aktywne jednocześnie. Dostępne są dwa rozmiary MIX3: Body & Focus, w zależności od wielkości obszaru leczenia i poziomu delikatności skóry. MIX3 jest dedykowany do powierzchniowych warstw tkanki. MIX3 działa przy unikalnej częstotliwości 1 MHz i jest szczególnie odpowiedni dla bardzo powierzchniowej stymulacji.

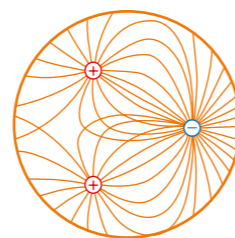

MIX3 (TRIPOLAIRE)

TRYB INTELIGENTNY 5.0

3 ELEKTRODY DYSTRYBUUJĄCE ENERGIĘ

Leczenie **WINBACK** Tecar jest jeszcze bardziej zaawansowane z nowym **TECARTHERAPY 5.0**: Trzy elektrody pozostają w kontakcie z pacjentem, emitując energię z dwóch ruchomych lub stałych elektrod.

Nowa funkcja oznacza, że zrównoważona energia może być przenoszona na dwie części, np. dwie nogi można leczyć w tym samym czasie. Nowe ustawienie oznacza także, że możesz wykonywać masaż utrzymując obie ręce aktywne... Leczenie będzie szybsze i bardziej efektywne.

Dostępne są 2 wersje Tecar 5.0: **TECAR 5 RET** lub **TECAR 5 MIX**

TYLKO OD
WINBACK

RET

Dwie elektrody **RET** pracują jednocześnie ze stałą płytą zwrotną. Elektrody mogą być ustawione w tryb Tecar 1, 2 lub 3.



PŁYTA ZWROTNA

TWOJE PROGRAMY WINBACK

Energia Winback posiada cechy, które powodują, że leczenie jest jeszcze bardziej efektywne. Przy mniejszym zużyciu energii, można uzyskać skuteczne, trwałe rezultaty oraz większy komfort dla swoich pacjentów. Na co czekasz?

WINBACK
Właściwa technologia dla
moich pacjentów

TERAPIA TKANEK POŁOŻONYCH POWIERZCHOWNIE I GŁĘBOKO

DEEPCET: SZYBKO ŁAGODZI NAPIĘCIA
RET +: WIĘKSZY KOMFORT DLA TERAPEUTY

BACK 1 & 3SE

DODATKOWE TRYBY PRACY UMOŻLIWIAJĄCE ZARZĄDZANIE MOCĄ

LOW PULSE: ZAPALENIE I WĘZŁY CHŁONNE
SUPER PULSE: MAKSYMALNA MOC CELEM ZŁAGODZENIA NAPIĘCIA

BACK 1S & BACK 3SE

OPTYMALIZACJA CZASU LECZENIA

- **PREDEFINIOWANE** USTAWIENIE CIĄGŁEGO TRYBU CET NA 30% MOCY
- **AUTOMATYCZNE** WYKRYCIE ELEKTRODY CET I RET
- **FUNKCJA TIC:** ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIJSZENIE MOCY O 10% POPRZEZ KILKUKROTNE KLEPNIĘCIE ELEKTRODĄ CIAŁA PACJENTA

100% kompatybilny z elektrodami

DYNAMICZNA CZĘSTOTLIWOŚĆ DYNAMICZNY AUTOSKAN


DYNAMIC: SKANUJE TKANKI NA ZMIENNEJ GŁĘBOKOŚCI
SWAP: DZIAŁANIE WIELOTKANKOWE

Tylko BACK 3SE

PODWÓJNE DZIAŁANIE TECAR + ELEKTROTHERAPIA

LOW BEAT: ZMNIJSZONE NAPIĘCIE + CYRKULACJA
SUPER BEAT: POWIERZCHOWNE OBSZARY

Tylko BACK 3SE

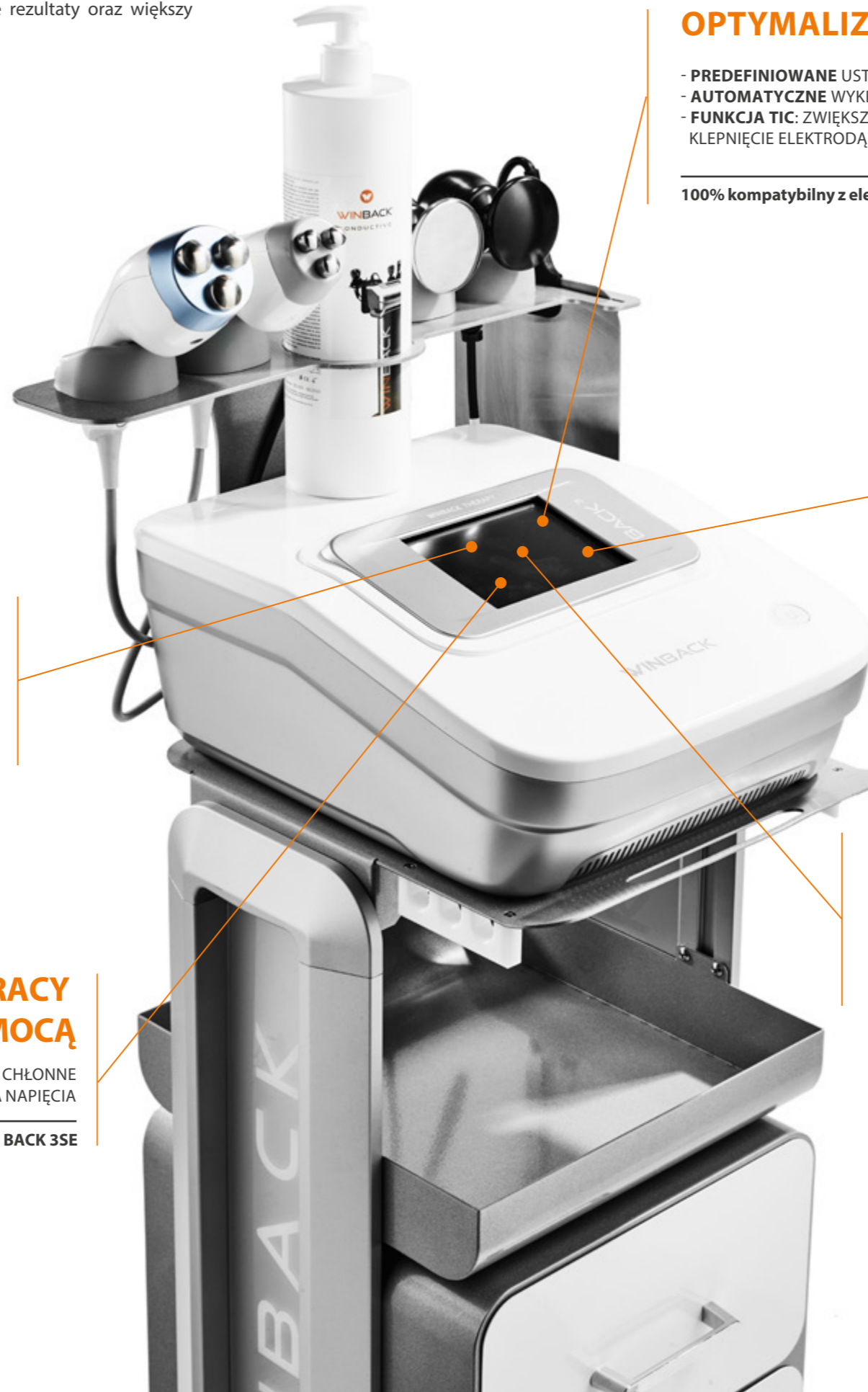



SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

Podczas szkolenia zapoznasz się z podstawami teoretycznymi terapii TECAR oraz zobaczysz, jak można w praktyce wykorzystać wszystkie zalety WINBACK.



AKADEMIA WINBACK ŁĄCZY FIZJOTERAPEUTÓW, ABY DZIELILI SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ

Akademia WINBACK zobowiązała się dzielić się swoją wiedzą z wami i waszymi współpracownikami na całym świecie. Akademia udostępnia swoje szkolenia, fora i portale społecznościowe. Masz możliwość wymieniać się doświadczeniami i uczyć się o sposobach pracy z WINBACK ze swoimi kolegami, którzy już posiadają urządzenie.

RÓŻNE POZIOMY SZKOLENIA, ABY DOSKONAŁIĆ SWOJĄ WIEDZĘ:

My START pozwala zrozumieć energię WINBACK i sposób korzystania z własnych technik. Wszystkie prezentowane innowacje pomogą zwiększyć efektywność Twojej pracy.

My PRACTICE obejmuje wszystkie zastosowania energii WINBACK. Praktyczne szkolenie symuluje warunki w pracy podczas leczenia pacjenta. Szkolenie to pozwala odkryć nowe domeny terapeutyczne w zakresie rehabilitacji, zdrowia, sportu i urody.



SPOŁECZNOŚĆ 100 EKSPERTÓW JEST ZAWSZE Z TOBĄ

Masz pytanie? Dyskusje i debaty z kolegami odbywają się na żywo na naszej stronie Facebook.

Podziel się swoimi pytaniami, doświadczeniem, wynikami - od razu otrzymasz opinię kolegów.



Winback słucha swoich terapeutów. Opracowaliśmy gamę produktów Winback, która dostosowuje się do Twoich ruchów, czasu leczenia i wymagań.

INTUICJA Z TWOIM DOŚWIADCZENIEM W ZAKRESIE TERAPII MANUALNEJ

Winback poprawi efektywność Twoich technik, ponieważ może być stosowany z wieloma znanymi metodami pracy z pacjentem: terapią manualną, osteopatią, terapią wisceralną, masażem blizn, drenażem limfatycznym, terapią próżniową, terapią punktów spustowych, terapią łańcuchów mięśniowo-powięziowych.



WSZECHSTRONNOŚĆ DLA TWOICH POTRZEB


Niezależnie od obszaru (fizjoterapia, sport), protokół WINBACK sprawdza się wszędzie.



PHYSIO




SPORT

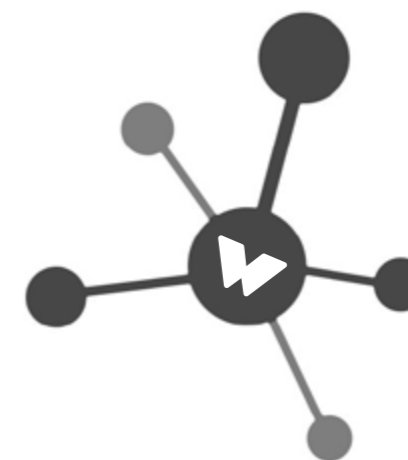

KOMPATYBILNY Z INNYMI URZĄDZENIAMI DO TERAPII

Winback może być stosowany z wieloma innymi urządzeniami terapeutycznymi przed, po lub jednocześnie celem poprawy efektywności. Można go stosować m.in. z: urządzeniami do elektrostymulacji, terapii uciskowej, terapii wibracyjnej, poduszkami i platformami do ćwiczeń propriocepcji, TRX, taśmami elastycznymi, piłkami szwedzkimi, tapingiem i wieloma innymi.

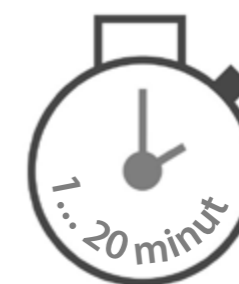

ELASTYCZNY DLA TWOICH SESJI

Twój czas jest cenny, a rozkład dnia nieustannie się zmienia. WINBACK pozwala dostosować sesje do Twoich potrzeb tak, aby pozostać efektywnym. Przymocuj elektrody do automatycznego leczenia w zaledwie 1 minutę. Kilka dodatkowych minut umożliwia miejscowe skoncentrowanie energii. Tryb automatyczny, tryb ręczny... wybór należy do Ciebie.



NASZ ZAKRES

FIZJOTERAPIA - SPORT



WINBACK
YOUR BODY IS BACK

WINBACK®

PHYSIO

WINBACK może być stosowany we wszystkich stanach ostrych i przewlekłych. Wyniki leczenia są widoczne już od pierwszej sesji (zwiększona sprawność ruchowa, działanie przeciwbólowe, rewaskularyzacja, usprawnienie procesów gojenia).

WSKAZANIA

Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, przerwanie błędnego koła bólu zapalenia/sztywności, przywrócenie ruchomości stawów, zmniejszenie obrzęku, drenaż, usprawnienie procesów gojenia tkanek.

REUMATOLOGIA

Zmiany zwyrodnieniowe: ulga w bólu, głęboki drenaż obrzęku, uwolniony zakres ruchu. Przewlekłe zapalenie ścięgien, epicondylalgia, ból szyi, ostre i przewlekłe bóle kręgosłupa, zapalenie torebki, sztywność stawów.

BÓL

Szybka likwidacja bólu jest niezbędna dla skutecznej rehabilitacji. Fizjoterapeuta może szybciej rozpocząć bardziej intensywne zabiegi. Efekt przeciwbólowy utrzymuje się ponad 48 godzin.

DRENAŻ LIMFATYCZNY

WINBACK stymuluje mięśnie gładkie i resorpcję płynu z przestrzeni śródmiąższowej, co przyspiesza manualny drenaż limfatyczny. Leczenie koncentruje się na działaniu mechanicznym, które jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem odprowadzania nadmiaru płynu.

Czas trwania: 10 do 25 minut - Ilość: 3-7 sesji
Częstotliwość: od jednej do trzech sesji w tygodniu

Guy Everts, belgijski fizjoterapeuta masażysta: «Przez pięć miesięcy leczyłem grupę 10 pacjentów z fibromialgią, przy użyciu WINBACK. Dzisiaj: 4 z 10 pacjentów widują co 6 tygodni, 4 pacjentów raz na miesiąc i 2 pacjentów co dwa tygodnie. Moi pacjenci ogólnie czują się mniej zmęczeni i silniejsi psychicznie.»



WINBACK[®]

S P O R T

WINBACK Sport oferuje szeroką gamę zabiegów wykonywanych przez wykwalifikowanych specjalistów w odprężającej atmosferze. Sportowiec może czerpać korzyści z ekskluzywnego i indywidualnie opracowanego zabiegu.

TRAUMATOLOGIA

WINBACK Sport może być stosowany w nagłych przypadkach związanych z uszkodzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Energia Winback wraz z natychmiastowym rozpoczęciem terapii zmniejsza stopień urazu i zapewnia szybki oraz efektywny powrót do aktywności fizycznej. Urazy powinny być poddawane leczeniu jak najszybciej, aby zatrzymać proces zapalny i umożliwić odbudowę uszkodzonych tkanek. Zmniejszenie obrzęków i wysięków w okresie przedoperacyjnym ułatwia przeprowadzenie zabiegu operacyjnego oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań w okresie pooperacyjnym.

WSKAZANIA

Skręcenia, naderwania mięśni, złamania, terapia przed- i pooperacyjna. W ostrych stanach pourazowych (od 1 do 3 dnia tylko działanie nietermiczne): łagodzenie bólu i stanów zapalnych, działanie przeciwobrzękowe. Przewlekłe urazy lub powikłania pourazowe: działanie fibrynolityczne.

REGENERACJA

Po zakończeniu zawodów lub intensywnego treningu, głęboki masaż z wykorzystaniem WINBACKa skutecznie rozluźnia mięśnie, które są napięte po intensywnym wysiłku. Te stymulujące i relaksujące bodźce regenerują struktury biomechaniczne szybciej przy jednoczesnej optymalizacji napięcia mięśniowego.

PROFILAKTYKA

Zadaniem fizjoterapeutów w dziedzinie sportu jest identyfikacja słabych ogniw w łańcuchu biomechanicznym zawodnika. Fizjoterapeuta łączy trening wzmacniający i rehabilitację w programie zapobiegania urazom. Dodatkowo poprawia postawę tak, aby zawodnik unikał ruchów, które zwiększają możliwość powstania kontuzji.



70 PARTNERÓW ZESPOŁY I FEDERACJE SPORTOWE.

PIŁKA NOŻNA - FRANCE : PSG CFA, FEMININ & PRO - OGC NICE - CHAMOIS NIORTAIS - FC BORDEAUX - FC LORIENT - NIMES OLYMPIQUE - FC RENNES - MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB - OLYMPIQUE LYONNAIS - FC NANTES - FC TOURS - PARIS FOOT CLUB - RACING CLUB DE LENS - ESTAC TROYES - SCO ANGERS - RED STAR - CFNC NIORT - FC VALENCIENNES - AL HILAL RYAD (SAU) - BOCA JUNIOR (ARG) - KV OSTENDE (BLG) - LEGIA WARSAW (PL) - USMA AIGER (ALG) - AL JAZEERA CLUB (UAE) - AL NASR CLUB (UAE) - AL WASL FOOTBALL (UAE) - POLAND NATIONAL TEAM - LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA (VALENCIA ,ESP) - DEPORTIVO LEGANES (MADRID ESP)

KOSZYKÓWKA - CHORALE DE ROANNE - ORLEANS LOIRET BASKET - BASKET - PERIGUEUX BBP - BASKET LANDES - SHARKS ANTIBES - CSK MOSCOU

RUGBY - BIARRITZ OLYMPIQUE - UBB - OYONNAX RUGBY - STADE TOULOUSAIN - USAP PERPIGNAN - MONTPELLIER HERAULT RUGBY

PIŁKA RĘCZNA - PSG HAND - PARIS VOLLEY - KNAK VOLLEY - ATLANTIS PALLAVOLO BRESCIA (VOLLEY BRESCIA)

SIATKÓWKA - EQUIPE AG2R LA MONDIALE - EQUIPE LA FRANCAISE DES JEUX - EQUIPE FORTUNEO VITAL CONCEPT - LOTTO SOUDAL

REPREZENTACJE NARODOWE - FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL - FEDERATION FRANCAISE DE JUDO - FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME - FEDERATION FRANCAISE DE NATATION - FEDERATION ESPAGNOLE DE TRIATHLON - FEDERATION RUSSE D'ESCRIME - FEDERATION COREENNE DE VOLLEYBALL - UNION ROYALE BELGE DES SOCIETES DE FOOTBALL (RED DEVILS) - FEDERATION ARGENTINE DE YACHTING

INSTYTUCJE - COMITE OLYMPIQUE DE COREE DU SUD - CNEA FONT ROMEU (CREPS) - CLINIQUE MILITAIRE DU SPORT - COMITE OLYMPIQUE HELLENIQUE



BACK 1S

Wersja, którą możesz zabrać wszędzie

BACK 1S oferuje wszystkie zalety technologii **WINBACK** przy minimalnej masie i maksymalnej wydajności! Przy zaledwie 4 kg, terapeuta może zabrać urządzenie gdzie tylko zechce.

Obszary zastosowania: FIZJOTERAPIA - SPORT

Moc: CET 400 VA – RET 100 Wat
Częstotliwość: 500 KHz & 300 KHz
Funkcje: DYNAMIC – LOW PULSE
SUPER PULSE – TIC

Szkolenie: MySTART
Waga: 4 kg

Wyposażenie standardowe:

TECAR 1.0:

ELEKTRODA MOBILNA CET / DEEPCET: 3 elektrody o różnej wielkości dla małych i dużych powierzchni (40, 60, 70 mm)

ELEKTRODA RUCHOMA RET: 3 elektrody o różnej wielkości dla małych i dużych powierzchni (40, 60, 70mm)

ELEKTRODA MOCOWANA: Elektroda neutralna +10 elektrod samoprzylepnych FLEX

Wyposażenie opcjonalne:

TECAR 2.0:

Elektroda mocowana RET (FIX PAD)
Elektroda bransoletka RET

TECAR 3.0:

Mobilna płyta zwrotna

TECAR 5.0:

Podwójny tryb RET

Walizka transportowa



2 lata gwarancji na sterownik, 4 miesiące gwarancji na akcesoria
Produkcja zgodnie z ISO9001 - ISO13485 - KIWA 1984.
Normy: MEDYCZNE CE



BACK 3SE

Wszystkie zalety WINBACK Tecar w Twoim zasięgu

Model **BACK 3SE** to górna półka zakresu WINBACK Tecar. Może być wyposażony aż w 5 grup akcesoriów Winback Tecar (od 1.0 do 5.0). Posiada stabilny wózek z szufladami i uchwytami na akcesoria.

BACK 3SE

Obszary zastosowania: FIZJOTERAPIA – SPORT – BEAUTY

Moc: CET 400 VA – RET 100 Wat
Częstotliwość: 1 Mhz, 500 Khz & 300 Khz
Funkcje: DYNAMIC – LOW PULSE
 SUPER PULSE – TIC
 RET+ / SWAP / BEAT

Szkolenie: MySTART – MyPRACTICE

Wyposażenie standardowe:

TECAR 1.0:

ELEKTRODA MOBILNA CET / DEEPCET: 3 elektrody o różnej wielkości dla małych i dużych powierzchni (40, 60, 70 mm)
 ELEKTRODA RUCHOMA RET: 3 elektrody o różnej wielkości dla małych i dużych powierzchni (40, 60, 70 mm)
 ELEKTRODA MOCOWANA: Elektroda neutralna +10 elektrod samoprzylepnych FLEX

TECAR 2.0:

Elektroda mocowana RET (FIX PAD)
 Elektroda bransoletka RET

TECAR 3.0:

Mobilna płyta zwrotna

TECAR 4.0:

Głowica multipolarna MIX 3 Face i MIX 3 Body

Wózek z szufladami

Wyposażenie opcjonalne:

TECAR 5.0:

Podwójny tryb RET

Walizka transportowa



2 lata gwarancji na sterownik, 4 miesiące gwarancji na akcesoria
 Produkcja zgodnie z ISO9001-ISO13485-KIWA 1984.
 Normy: MEDYCZNE CE



WINBACK

885 Av du Docteur Lefebvre, Twins 2
06270 Villeneuve Loubet - France

T. +33 (0)4 93 08 85 81

contact@winback.com
www.winback.com



Meden-Inmed sp. z o. o.

ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel. +48 608 685 649, +48 94 347 10 51
bpaprotny@meden.com.pl, www.meden.com.pl