



VELUS[®]JET
Hydro-Jet Massage

VelusJet to nowoczesne urządzenie do strefowego masażu membranowego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, terapeuta może dostosować parametry masażu do indywidualnych potrzeb i wymagań każdego klienta. Urządzenie charakteryzuje się intuicyjnym menu oraz prostą obsługą.

Velus-Jet został zarejestrowany jako urządzenie medyczne i spełnia wymagania dyrektywy dla wyrobów medycznych (klasa IIa).

Design

Oryginalny wygląd oraz wysoka jakość wykończenia sprawiają, że urządzenie pasuje do różnego typu wnętrz. Wymiary VelusJet pozwalają na instalację urządzenia nawet w niewielkich pomieszczeniach.


Chłodzenie

System chłodzenia kontroluje temperaturę wody, jak również monitoruje temperaturę otoczenia. Funkcje te pozwalają znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne oraz chronić środowisko.

Pompy


VelusJet jest wyposażony w 2 niezależne kontrolowane i obrotowe ramiona, na których umiejscowione są dysze oraz 2 niezależnie działające pompy wysokiego ciśnienia.

Duża ilość wbudowanych programów oraz możliwość ich indywidualnej konfiguracji pozwalają na tworzenie nielimitowanej liczby spersonalizowanych terapii. Programy mogą być przypisane do poszczególnych klientów, którzy mają dostęp do biblioteki medycznej.

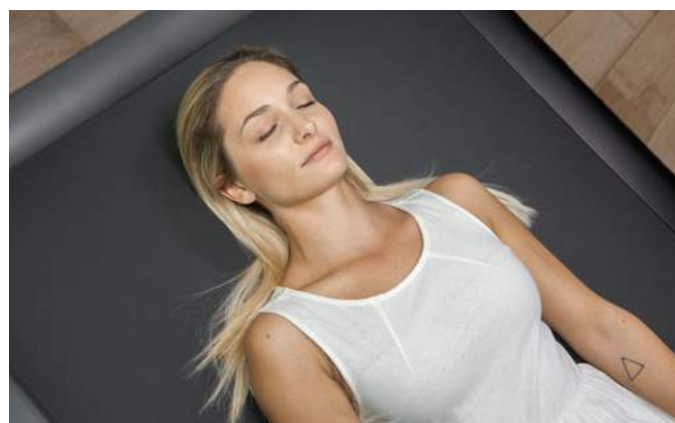

Masaże

VelusJet wyróżnia się niezwykłą funkcjonalnością. Użytkownik może precyzyjnie kontrolować wszystkie parametry masażu, w każdej ze stref.

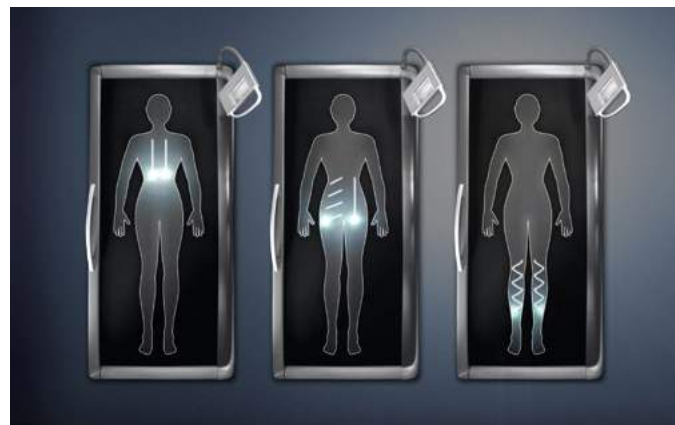

VelusJet to wielofunkcyjne urządzenie o szerokim spektrum zastosowań. System z 2 pompami pozwala na niezależne kontrolowanie dysz, co umożliwia wykorzystanie **VelusJet** zarówno w terapii 1-stronnej, jak i 2-stronnej.

Masaż może być wykonywany w różnych kierunkach w każdej ze stref. Oprócz klasycznego masażu urządzenie posiada wiele innych wbudowanych technik, np. masaż limfatyczny.


System umożliwia zmianę parametrów masażu w trakcie trwania zabiegu. Użytkownik może też w każdej chwili wybrać tryb manualny, aby skoncentrować się na terapii wybranej części ciała.

Panel użytkownika

W celu zwiększenia komfortu użytkowania, dotykowy panel sterowania może zostać ustawiony w dowolnej pozycji. Istnieje także możliwość zmiany wyglądu menu przez dostępne szablony albo dostosowanie poszczególnych parametrów.

Cechy charakterystyczne:

- oryginalny design,
- duża powierzchnia zabiegowa,
- maksymalne obciążenie – 210 kg,
- wytrzymała i solidna konstrukcja,
- energooszczędność – długi czas pracy,
- intuicyjna obsługa,
- indywidualne dostosowanie parametrów,
- kompleksowe wsparcie techniczne,
- możliwość wyboru ulubionej muzyki i zapachu.

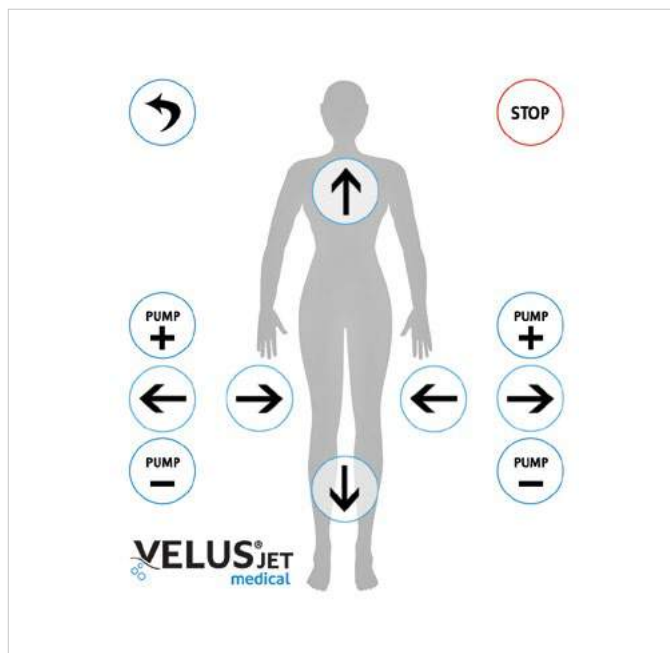

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia (wys. x szer. x dł.) [cm]:	50 x 103 x 212
Powierzchnia membrany [cm]:	195 x 81
Waga pusty/wypełniony [kg]:	185/515
Kontrola dysz:	oddzielna
Liczba pomp:	2
Ciśnienie [bar]:	2 x 6,3 (7,4)
Zużycie energii [kWh]:	2,8
System chłodzenia:	woda/powietrze
Temperatura wody:	programowalna
Maks. obciążenie [kg]:	210
Biblioteka medyczna:	bez limitu
Tryb manualny:	do wyboru
Czytnik kart i czytnik RFID:	standardowe wyposażenie
Podłączanie urządzeń zewnętrznych:	tak/2 urządzenia
Kompatybilność sieciowa:	LAN/WI-FI
Zdalna pomoc techniczna:	wbudowane