

**gymna**<sup>®</sup>



**Combi 400** łączy w sobie inteligentne rozwiązania z wiodącą technologią. Dzięki rewolucyjnemu kolorowemu ekranowi dotykowemu, urządzenie można obsługiwać w prosty i logiczny sposób. Oprogramowanie jest intuicyjnie zaprojektowane i w przejrzysty sposób prowadzi terapeutę przez dostępne funkcje.

## Możliwości zabiegowe:


- elektroterapia (2 niezależne kanały),
- terapia ultradźwiękowa (1 i 3 MHz), jono- i fonoforeza,
- laseroterapia,
- terapia skojarzona,
- jednoczesne leczenie dwóch pacjentów.

## Cechy charakterystyczne:

- hybrydowe głowice ultradźwiękowe z wizualną i akustyczną kontrolą kontaktu,
- 2 oddzielne regulatory napięcia,
- port USB do aktualizacji protokołów,
- ekran dotykowy,
- ponad 700 wbudowanych protokołów leczniczych,
- 12 programów diagnostycznych (krzywa I/t, reobaza, chronaksja),
- obrazy 3D ułatwiające prawidłowe umieszczenie elektrod,
- czytelne menu: klawisze bezpośredniego dostępu umożliwiające wybór pożądanego typu zabiegu z menu poprzez wybór z listy celów terapeutycznych, z listy wskazań lub poprzez wybór konkretnego numeru programu,
- 500 wolnych miejsc w pamięci (własny program / ulubione / wyniki diagnostyczne),
- zintegrowana lista przeciwwskazań,
- biblioteka anatomiczna,
- kolorowy dotykowy wyświetlacz TFT, o przekąt. 10,4 cala (SVGA: 800 x 600 px).

Sprawdź również model **Combi 400 V** – wyposażony dodatkowo w dwukanałowy moduł podciśnienia na:

[www.meden.com.pl/oferta](http://www.meden.com.pl/oferta)

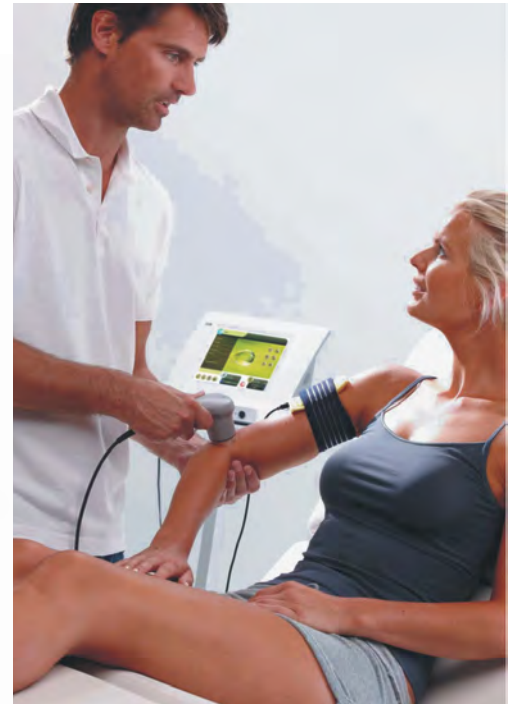

## Akcesoria standardowe:

- kable do elektrod (2 szt.),
- elektrody gumowe 6 x 8 (4 szt.),
- torebki wiskozowe 6 x 8 cm (4 szt.),
- pasy mocujące 5 x 60 cm (4 szt.),
- głowica ultradźwiękowa 4 cm<sup>2</sup> (1 i 3 MHz),
- skala VAS,
- rysik do ekranu dotykowego,
- żel kontaktowy 500 ml,
- złącze do testowania.

## Akcesoria dodatkowe:

- głowica ultradźwiękowa 1 cm<sup>2</sup> (1 i 3 MHz),
- sonda laserowa 1-diodowa o mocy 70,5 mW,
- sonda laserowa prysznicowa o mocy 54 mW.

