

Galaxy Mercury S2 Classic

2-sekcyjny stół
do masażu i rehabilitacji



Długość: **202 cm**



Wysokość: **50-101 cm**



Szerokość: **64 cm**



Waga: **76 kg**





Obciążenie: **200 kg**


Cechy charakterystyczne:

- 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^\circ$),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz (bez zaślepki),
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- system elektrycznej regulacji wysokości przy pomocy pilota (od 50 do 101 cm),
- autoryzacja przy pomocy kluczyka w pilocie ręcznego sterowania,
- antypoślizgowe gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wyziomowanie stołu.

Ustawienia i wymiary:

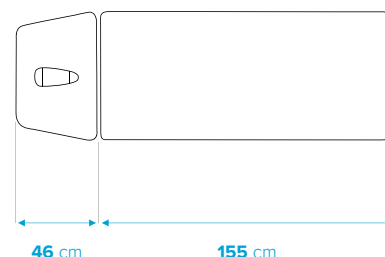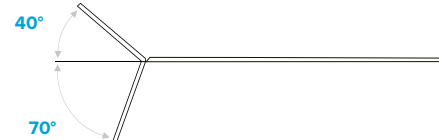

Rama Classic:

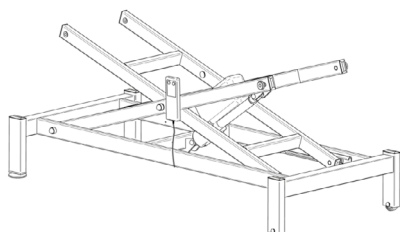

Dostępne modele:

Mercury S2 Classic: 2-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdny, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

