



Długość: **205 cm**



Wysokość: **50-101 cm**



Szerokość: **64 cm**



Waga: **92/104 kg**




Obciążenie: **200 kg**

## Cechy charakterystyczne:

- 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej (od  $-70^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$ ),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- opuszczane boczki zagłówek,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od  $0^{\circ}$  do  $+90^{\circ}$ ),
- rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- **Hallotronic®** - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu (od 50 do 101 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- malowana proszkowo rama wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- szerokość tapicerki 80 cm (opcja).

## Ustawienia i wymiary:

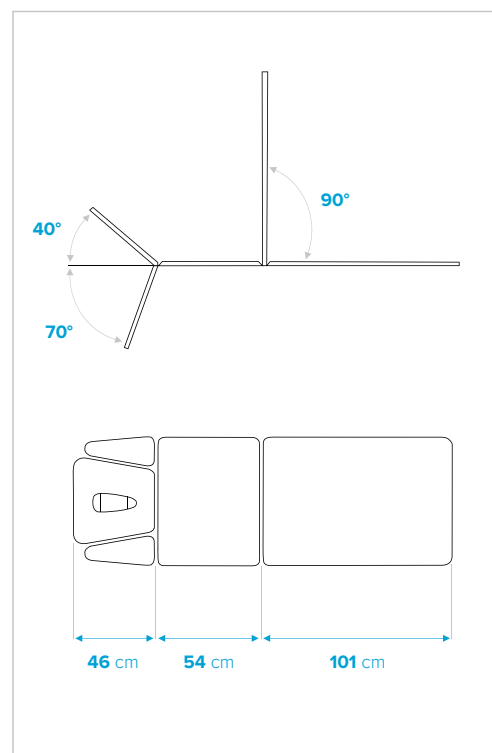

## Dostępne modele:

**Jupiter S5.F0:** 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

**Jupiter S5.F4:** 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

