
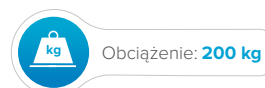
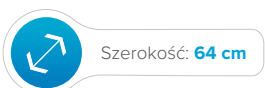


Galaxy Mercury S4

4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji

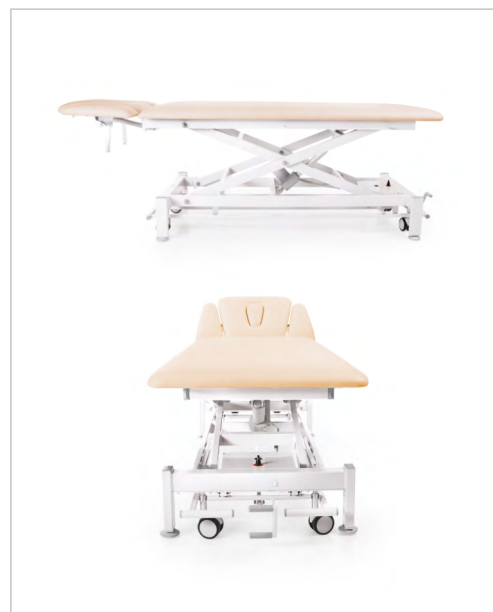

Cechy charakterystyczne:

- 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do $+40^\circ$),
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- opuszczane boczki zagłówek,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- **Hallotronic®** - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu (od 50 do 101 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- szerokość tapicerki 80 cm (opcja).

Dostępne modele:

Mercury S4.F0: 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 2 małych kółek i 2 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Mercury S4.F4: 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych, gumowych stopek.

Ustawienia i wymiary:

