
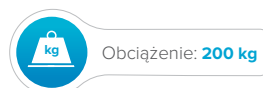


Safari Buffalo E2.C4-H | Wózek do transportu chorych

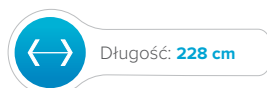

Stół transportowy przeznaczony do przewożenia pacjentów jest niezwykle mobilny i łatwy w użytkowaniu. Zaprojektowany został z myślą o znacznym zmniejszeniu wysiłku personelu medycznego, polepszeniu jakości opieki nad pacjentem i jego wygodzie.

Dwusekcyjny stół transportowy z hydraulicznie regulowaną wysokością leża na bazie ramy nożycowej, posiada centralnie blokowane cztery duże koła o średnicy 12,5 cm, które zwiększają zdolności manewrowe i pozwalają na transport pacjenta o wadze do 200 kg. Regulacja wysokości leża odbywa się siłownikiem hydraulicznym za pomocą łatwo dostępnych pedałów nożnych, znajdujących się po obu stronach stołu. Regulacja zagłówka odbywa się za pomocą sprężyn gazowych, sterowanych funkcjonalnym przyciskiem od strony głowy pacjenta.

Stół transportowy do przewożenia pacjentów wyposażony jest **standardowo** w obustronne składane barierki poziome, pochwyt do transportu po stronie zagłówka oraz nóg, odbojniki, wieszak na ręcznik papierowy o szerokości 60 cm umieszczony po stronie zagłówka oraz wieszak na kroplówkę, który można mocować po obydwu stronach wózka w łatwy i szybki sposób.

Stół transportowy posiada wysokiej jakości tapicerkę poliuretanową łatwą do dezynfekcji, która jest odporna na zabrudzenia i uszkodzenia.

Cechy charakterystyczne:

- dwusekcyjny stół do transportu pacjentów,
- regulacja wysokości leża za pomocą siłownika hydraulicznego z dźwigni nożną,
- ustawienie kąta nachylenia zagłówka za pomocą sprężyn gazowych,
- stabilna stalowa rama o konstrukcji nożycowej, malowana farbą proszkową,
- zestaw kołowy Tente o średnicy 12,5 cm z hamulcem centralnym,
- odbojniki na rogach wózka,
- tapicerka łatwa do dezynfekcji z wysokiej jakości materiału PU, niepalna oraz odporna na zabrudzenia i uszkodzenia,
- duży wybór kolorów tapicerki,
- funkcja Trendelenburga - pochylenia leża 0-12° (opcjonalnie).

Dane techniczne:

Ilość sekcji:	2
Kąt regulacji zagłówka [°]:	0/+70
Regulacja wysokości [cm]:	51-100
Wymiary (długość x szerokość) [cm]:	228x80
Długość zagłówka [cm]:	69
Waga [kg]:	135
Maksymalne obciążenie [kg]:	200



Opcjonalna funkcja Trendelenburga 0-12°