


## Zestaw do trakcji TRITON DTS 6E

### Opis produktu:

Wyposażony w szereg wyrafinowanych funkcji **Triton 6E** wykorzystuje nowoczesne technologie, aby w każdej chwili zapewnić terapię łatwą i pełną kontrolę.



### Zdjęcia produktu:

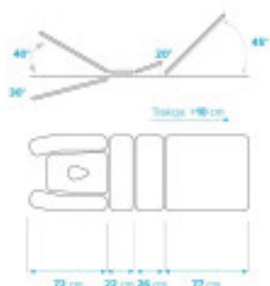

### Szczegółowy opis produktu:

## Zestaw do trakcji Triton DTS 6E

W pełni elektryczny i z całą gamą regulacji ten stół klasy premium w połączeniu z jednym z ciągników Triton zapewnia najlepsze możliwe wsparcie terapeutom chcącym przenieść terapię trakcją na wyższy poziom innowacji.

### Cechy charakterystyczne:

- jeden z najbardziej zaawansowanych elektrycznych stołów do trakcji, wspomagany przez 6 nowoczesnych silowników do regulacji sekcji głowy, klatki piersiowej, miednicy i kończyn dolnych,
- optymalne umieszczenie pilota zdalnego sterowania zapewnia łatwy dostęp do stołu,
- 6-sekcyjny stół zabiegowy zapewniający maksymalny komfort pacjenta w pozycji na brzuchu i na wznak, podczas terapii manualnej i trakcji,
- pochylenie sekcji miednicy regulowane w zakresie od 0° do 20°, aby zapewnić prawidłowe zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i rozwiązanie problemu asymetrii miednicy,
- sekcja zagłówek z regulacją pochylenia w zakresie od -30° do +40°, aby umożliwić łatwy dostęp do kręgosłupa piersiowego i szyjnego,
- system oświetlenia LED w ramie stołu, tryb cykliczny lub stały,
- podgrzewanie sekcji stołu zapewnia większy komfort pacjenta,
- łatwy transport i unieruchomienie w miejscu docelowym,
- pełna gama akcesoriów zaspokoi wymagania terapii każdego pacjenta.

### Budowa stołu:

1. Ruchomy zagłówek (-30° do +40°)
2. Intuicyjny pilot do kontroli wszystkich napędzanych elektrycznie elementów
3. Sekcja pochylenia miednicy (0° do +20°)
4. Regulowana sekcja kończyn dolnych (0° do +45°)
5. Ciągnik Triton z EMG (4798)
6. Opcjonalnie wałki pachowe (83215ME)
7. Uchwyt trakcji
8. Zintegrowany system kabli i przewodów zasilających
9. Oświetlenie
10. System autoryzacji użytkowników (PASS)
11. 4 chowane nóżki/kółka samonastawne
12. Regulowane podłokietniki (-30° do +40°)
13. Składany zagłówek

### Terapia trakcyjna

Terapia trakcyjna kręgosłupa zakłada rozciąganie kręgosłupa za pomocą stołu trakcyjnego lub podobnego urządzenia napędzanego silnikiem, pneumatycznie lub korzystającego z grawitacji.

Stosowana głównie w celu złagodzenia bólu i promowania optymalnego środowiska gojenia się zwyrodnienia, wypukliny lub przepukliny krążka międzykręgowego. Rozluźnia napięte mięśnie, rozszerza przestrzeń otworów międzykręgowych i w ten sposób zmniejsza ucisk i podrażnienie korzeni nerwowych oraz polepsza krążenie w obszarze tętnicy kręęgowej.

Tworzy niższe ciśnienie w krążku międzykręgowym w celu zmniejszenia przepukliny, rozciąga więzadło podłużne tylne, które dodatkowo pomaga w redukcji przepukliny i uwalnia przylegające korzenie nerwowe. Powoduje lepsze odprowadzanie metabolitów i mediatorów stanu zapalnego oraz większy napływ składników odżywczych, co sprzyja regeneracji uszkodzonego obszaru<sup>1,2,3</sup>.

### Główne wskazania:

- przepuklina krążka międzykręgowego,
- choroba zwyrodnieniowa krążka międzykręgowego,
- zespół bólowy dolnego odcinka pleców,
- zespół bólowy stawów międzywyrastkowych,
- ostry ból wyrostków stawowych,
- ucisk na korzenie nerwowe,
- dehydratacja i zmniejszenie wysokości krążków międzykręgowych,
- rwa kulszowa,
- hipomobilność, ograniczenie ruchomości segmentów kręgosłupa,
- nadmiernie napięte mięśnie przykręgosłupowe.

## Zestaw zawiera:

### Urządzenie TRITON - mechaniczna trakcja kręgosłupa

Urządzenie do trakcji (ciągnik) z ekranem dotykowym, kolorowy wyświetlacz LCD, karty pacjenta, procedury terapeutyczne, graficzna biblioteka anatomiczna z patologiami.

### Przystawka do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa Saunders Clinical Cervical TRC

Przystawka do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa wg Saundersa (ze strzemieniem) stanowi uzupełnienie aparatu do trakcji kręgosłupa Triton.

### Zestaw pasów do trakcji QuickWrap DTS

QuickWrap DTS to uniwersalny zestaw szybko mocowanych, specjalistycznych pasów do trakcji kręgosłupa.

### Knee Bolsters

Wałki pod kolana, zapewniające optymalne ułożenie ciała pacjenta podczas zabiegów trakcyjnych.

## Informacje:

Szerokość: 70 cm  
Długość: 277 cm  
Masa: 200 kg  
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -30 – +40°  
Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 20°  
Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 45°  
Linia: Triton  
Liczba sekcji: 6  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 48 – 95 cm  
Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
Maksymalne obciążenie: 275 kg  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Tak  
PAS: Tak  
Hallotronic: Nie

## Model:

Kolor tapicerki: 02 - Niebieski - Standard, 08 - Czarny - Standard

Smart4Arms: Nie