


Opaska na łokieć tenisisty Silistab Epi

Opis produktu:

W przypadku kontuzji łokcia, konieczne jest zaprzestanie wykonywania ćwiczeń obciążających mięśnie i ścięgna objęte urazem. Takie kontuzje mogą uniemożliwić poprawne funkcjonowanie przez wiele tygodni, dlatego aby przyspieszyć gojenie, bardzo ważna jest stabilizacja i kompresja kontuzjowanego obszaru. **Opaska na łokieć tenisisty Silistab Epi** marki Thuasne jest skuteczna w leczeniu i łagodzeniu zapalenia nadkłykcia przyśrodkowego lub boczного.

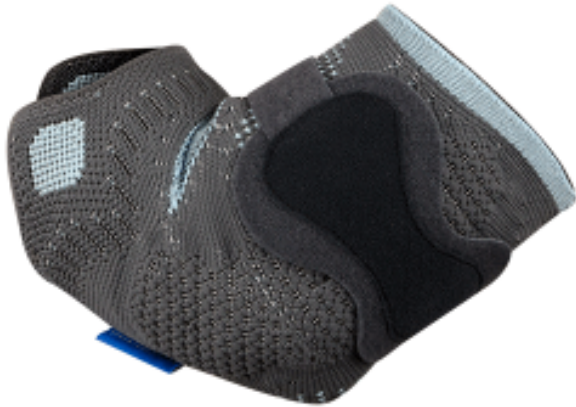

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Opaska na łokieć tenisisty Silistab Epi

Optymalny komfort

Chociaż większość ortez stawu łokciowego może ograniczać ruchy do dużego stopnia, opaska Silistab Epi została zaprojektowana z uwzględnieniem stref komfortu w okolicy zgięcia łokcia. Zapewniają one komfort przez cały czas użytkowania, nawet podczas zginania łokcia. Anatomiczny krój zapewnia maksymalną kompresję i wygodę. Ponadto opaska posiada silikonową wkładkę z wgłębieniami, która masuje skórę i łagodzi ból.

Refundacja NFZ

Orteza jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kod refundacji NFZ: L. 050

Opaska na łokieć tenisisty Silistab Epi — cechy:

Kompresja

Stabilizacja

Propriocepcja

Właściwości:

- **propriocepcja:** uciskowy splot dopasowany do budowy ciała, z regulowanym naciskiem,
- **wygoda:** opaska ma silikonowe wkładki i anatomiczny splot ze strefami komfortu w rejonie nadkłykcia,
- **łatwość dopasowania:** wizualne oznaczenia w zgięciu i na czubku łokcia dla precyzji umiejscowienia,
- **praktyczność:** specjalne patki służące do naciągania dla łatwego zakładania.

Wskazania:

- wstępna faza zapalenia ścięgien w rejonie nadkłykcia bocznego (**łokieć tenisisty**) lub przyśrodkowego,
- zapobieganie nawrotom i aktywne wsparcie aktywności sportowej,
- urazy związane z więzadłami i ścięgnami,
- stabilizacja przy pracy fizycznej.

Tabela rozmiarów:

Rozmiar ortezy:	Obwód przedramienia [cm]:
I	19 - 22
II	22 - 25
III	25 - 28
IV	28 - 31
V	31 - 34
VI	34 - 37

Zakładanie ortezy na łokieć tenisisty Silistab Epi:

Założ ortezę w taki sposób, aby elastyczny materiał w kolorze niebieskim znajdował się we wgłębieniu stawu łokciowego, a niebieskie nakładki były skierowane do góry

Ustaw wkładki z jednej i drugiej strony łokcia

Wyśrodkuj wycięcia na poziomie nadkłykci (przyśrodkowego i bocznego)

Jeżeli potrzebny jest dodatkowy ucisk, dołóż dodatkowy pasek umieszczając dwa szerokie pasma na wkładkach na wysokości przedramienia

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Bark / Łokieć

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 19-22 cm, Rozmiar II - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 22-25 cm, Rozmiar III - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 25-28 cm, Rozmiar IV - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 28-31 cm, Rozmiar V - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 31-34 cm, Rozmiar VI - szerokość: 8 cm - obwód przedramienia: 34-37 cm