

Stół do trakcji TRITON 6M


Opis produktu:

Triton 6M to zaawansowany stół do trakcji kręgosłupa wyposażony w urządzenie do mechanicznej trakcji kręgosłupa marki Chattanooga. Triton 6M wykorzystuje sprężyny gazowe i siłowniki elektryczne, aby zapewnić łatwą kontrolę ustawień stołu.

Aktualnie dostępny kolor: granatowy.



Zdjęcia produktu:

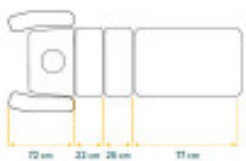

Szczegółowy opis produktu:

Stół TRITON 6M

6-sekcyjny stół do trakcji Triton 6M wykorzystuje sprężyny gazowe i siłowniki elektryczne, aby zapewnić łatwą kontrolę ustawień stołu. Regulacja ustawienia każdej sekcji zapewnia wiele możliwych opcji pozycjonowania pacjenta.

Stół do trakcji Triton 6M wraz z urządzeniem do mechanicznej trakcji kręgosłupa marki Chattanooga to optymalny wybór sprzętu niezbędnego w praktyce każdego terapeuty.

Cechy charakterystyczne:

- 6-sekcyjny stół zabiegowy zapewniający optymalny komfort pacjenta w pozycji na brzuchu i na wznak podczas terapii manualnej i trakcji,
- pochylenie sekcji miednicy regulowane w zakresie od 0° do 20°, aby zapewnić prawidłowe zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i rozwiązanie problemu asymetrii miednicy,
- sekcja zagłówka z regulacją pochylenia w zakresie od -30° do + 40°, aby umożliwić łatwy dostęp do kręgosłupa piersiowego i szyjnego,
- składane uchwyty do trakcji w podwieszeniu,
- sekcja kończyn dolnych z regulacją od 0° do 45°,
- sprężyny gazowe ułatwiają regulację sekcji głowy, miednicy, klatki piersiowej i kończyn dolnych, które są łatwo dostępne z każdej strony stołu,
- sterownik nożny / ręczny umożliwia łatwą regulację wysokości stołu i stosowanie, blokowanego mechanizmu bezpieczeństwa.
- pełna gama akcesoriów zaspokoi wymagania terapii każdego pacjenta.

Terapia trakcyjna

Terapia trakcyjna kręgosłupa zakłada rozciąganie kręgosłupa za pomocą stołu trakcyjnego lub podobnego urządzenia napędzanego silnikiem, pneumatycznie lub korzystającego z grawitacji.

Stosowana głównie w celu złagodzenia bólu i promowania optymalnego środowiska gojenia się zwyrodnienia, wypukliny lub przepukliny krążka międzykręgowego. Rozluźnia napięte mięśnie, rozszerza przestrzeń otworów międzykręgowych i w ten sposób zmniejsza ucisk i podrażnienie korzeni nerwowych oraz polepsza krążenie w obszarze tętnicy kręęgowej.

Tworzy niższe ciśnienie w krążku międzykręgowym w celu zmniejszenia przepukliny, rozciąga więzadło podłużne tylne, które dodatkowo pomaga w redukcji przepukliny i uwalnia przylegające korzenie nerwowe. Powoduje lepsze odprowadzanie metabolitów i mediatorów stanu zapalnego oraz większy napływ składników odżywczych, co sprzyja regeneracji uszkodzonego obszaru^{1,2,3}.

Główne wskazania:

- ból odcinka lędźwiowego (LBP)
- przepuklina dysku
- wypadnięcie dysku lędźwiowego
- choroba dysku lędźwiowego
- przepuklina dysku lędźwiowego
- pęknięcie krążka międzykręgowego
- przewlekły ból pleców

Informacje:

Szerokość: 70 cm

Model:

Długość: 217 cm

Masa: 165 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -25 -
+40°

Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 - 18°

Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 - 45°

Linia: Triton

Liczba sekcji: 6

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 48 - 95 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Nie

PAS: Nie

Hallotronic: Nie

Smart4Arms: Nie