


Stół do trakcji kręgosłupa Triton 6E

Opis produktu:

Stół do trakcji kręgosłupa Triton 6E wyposażony w szereg zaawansowanych funkcji wykorzystuje nowoczesne technologie, aby w każdej chwili zapewnić terapeutę łatwą i pełną kontrolę.



Zdjęcia produktu:

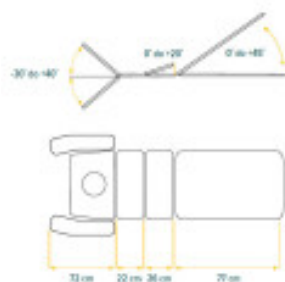

Szczegółowy opis produktu:

Stół do trakcji kręgosłupa Triton 6E

Wyposażony w szereg wyrafinowanych funkcji Triton 6E wykorzystuje nowoczesne technologie, aby w każdej chwili zapewnić terapeutę łatwą i pełną kontrolę. W pełni elektryczny i z całą gamą regulacji, ten stół klasy premium w połączeniu z jednym z ciągników Triton zapewnia najlepsze możliwe wsparcie terapeutom chcącym przenieść terapię trakcją na wyższy poziom innowacji.

Cechy charakterystyczne:

- jeden z najbardziej zaawansowanych elektrycznych stołów do trakcji, wspomagany przez 6

nowoczesnych siłowników do regulacji sekcji głowy, klatki piersiowej, miednicy i kończyn dolnych,

- optymalne umieszczenie pilota zdalnego sterowania zapewnia łatwy dostęp do stołu,
- 6-sekcyjny stół zabiegowy zapewniający maksymalny komfort pacjenta w pozycji na brzuchu i na wznak, podczas terapii manualnej i trakcji,
- pochylenie sekcji miednicy regulowane w zakresie od 0° do 20°, aby zapewnić prawidłowe zgięcie kręgosłupa lędźwiowego i rozwiązanie problemu asymetrii miednicy,
- sekcja zagłówka z regulacją pochylenia w zakresie od -30° do +40°, aby umożliwić łatwy dostęp do kręgosłupa piersiowego i szyjnego,
- system oświetlenia LED w ramie stołu, tryb cykliczny lub stały,
- podgrzewanie sekcji stołu zapewnia większy komfort pacjenta,
- łatwy transport i unieruchomienie w miejscu docelowym,
- pełna gama akcesoriów zaspokoi wymagania terapii każdego pacjenta.

Budowa stołu Triton 6E

Terapia trakcyjna

Terapia trakcyjna kręgosłupa zakłada rozciąganie kręgosłupa za pomocą stołu trakcyjnego lub podobnego urządzenia napędzanego silnikiem, pneumatycznie lub korzystającego z grawitacji.

Stosowana głównie w celu złagodzenia bólu i promowania optymalnego środowiska gojenia się zwyrodnienia, wypukliny lub przepukliny krążka międzykręgowego. Rozluźnia napięte mięśnie, rozszerza przestrzeń otworów międzykręgowych i w ten sposób zmniejsza ucisk i podrażnienie korzeni nerwowych oraz polepsza krążenie w obszarze tętnicy kręgowej.

Tworzy niższe ciśnienie w krążku międzykręgowym w celu zmniejszenia przepukliny, rozciąga więzadło podłużne tylne, które dodatkowo pomaga w redukcji przepukliny i uwalnia przylegające korzenie nerwowe. Powoduje lepsze odprowadzanie metabolitów i mediatorów stanu zapalnego oraz większy napływ składników odżywczych, co sprzyja regeneracji uszkodzonego obszaru^{1,2,3}.

Główne wskazania:

- przepuklina krążka międzykręgowego,
- choroba zwyrodnieniowa krążka międzykręgowego,
- zespół bólowy dolnego odcinka pleców,
- zespół bólowy stawów międzywyrostkowych,
- ostry ból wyrostków stawowych,
- ucisk na korzenie nerwowe,
- dehydratacja i zmniejszenie wysokości krążków międzykręgowych,
- rwa kulszowa,
- hipomobilność, ograniczenie ruchomości segmentów kręgosłupa,
- nadmiernie napięte mięśnie przykręgosłupowe.

Informacje:

Szerokość: 69 cm

Długość: 217 cm

Masa: 200 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -30 – +40°

Model:

Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 20°

Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 – 45°

Linia: Triton

Liczba sekcji: 6

Typ stołu: Regulowana wysokość

Zakres regulacji wysokości: 48 – 95 cm

Typ regulacji wysokości: Elektryczna

Maksymalne obciążenie: 200 kg

Funkcja pionizacji: Nie

Podgrzewane leże: Tak

PAS: Tak

Hallotronic: Nie

Smart4Arms: Nie