


## Zestaw do trakcji Galaxy Traction DTS T3

### Opis produktu:

**Galaxy T3** to profesjonalny stół, który umożliwia wykonanie trakcji kręgosłupa poprzez rozluźnienie napiętych mięśni oraz zwiększenie przestrzeni i otworów międzykręgowych z użyciem ciągnika trakcyjnego.



### Zdjęcia produktu:

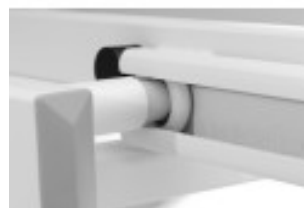

### Szczegółowy opis produktu:

## Galaxy Traction T3 - stół do trakcji

Zabiegi trakcyjne wykonuje się w celu zwiększenia sprawności statodynamicznej kręgosłupa poprzez rozluźnienie napiętych mięśni oraz zwiększenie przestrzeni i otworów międzykręgowych. W wyniku terapii następuje redukcja ucisku i podrażnienia korzeni nerwowych oraz poprawa krążenia w obszarze tętnicy kręgosłupowej.

### **Cechy charakterystyczne:**

- wersja 3-sekcyjna,
- elektryczna regulacja za pomocą ramy wokół podstawy stołu,
- regulowany zagłówek od -30 do +80° z wyprofilowanym otworem na twarz i zaślepką,
- specjalny uchwyt na pasy do trakcji ukryty pod zaślepką,
- szeroka gama kolorów tapicerki,
- stabilna konstrukcja krzyżakowa,
- regulowana półka pod aparat do trakcji,
- system jezdny F.0 (2 kółka i 2 antypoślizgowe stopki) lub F.4 (4 unoszone kółka i 4 antypoślizgowe stopki),
- PAS (Personal Authorization System) - magnetyczny klucz dostępu,
- kompatybilność z pasami do trakcji QuickWrap DTS oraz urządzeniem do trakcji kręgosłupa TRU-TRAC/TRITON firmy Chattanooga Group.

### **Zestaw zawiera:**

#### **Urządzenie TRITON - mechaniczna trakcja kręgosłupa**

Urządzenie do trakcji (ciągnik) z ekranem dotykowym, kolorowy wyświetlacz LCD, karty pacjenta, procedury terapeutyczne, graficzna biblioteka anatomiczna z patologiami.

#### **Przystawka do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa Saunders Clinical Cervical TRC**

Przystawka do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa wg Saundersa (ze strzemieniem) stanowi uzupełnienie aparatu do trakcji kręgosłupa Triton.

#### **Zestaw pasów do trakcji QuickWrap DTS**

QuickWrap DTS to uniwersalny zestaw szybko mocowanych, specjalistycznych pasów do trakcji kręgosłupa.

### **Terapia trakcyjna**

Terapia trakcyjna kręgosłupa zakłada rozciąganie kręgosłupa za pomocą stołu trakcyjnego lub podobnego urządzenia napędzanego silnikiem, pneumatycznie lub korzystającego z grawitacji.

Stosowana głównie w celu złagodzenia bólu i promowania optymalnego środowiska gojenia się zwyrodnienia, wypukliny lub przepukliny krążka międzykręgowego. Rozluźnia napięte mięśnie, rozszerza przestrzeń otworów międzykręgowych i w ten sposób zmniejsza ucisk i podrażnienie korzeni nerwowych oraz polepsza krążenie w obszarze tętnicy kręgosłupowej.

Tworzy niższe ciśnienie w krążku międzykręgowym w celu zmniejszenia przepukliny, rozciąga więzadło podłużne tylne, które dodatkowo pomaga w redukcji przepukliny i uwalnia przylegające korzenie nerwowe. Powoduje lepsze odprowadzanie metabolitów i mediatorów stanu zapalnego oraz większy napływ składników odżywczych, co sprzyja regeneracji uszkodzonego obszaru<sup>1,2,3</sup>.

### **Główne wskazania:**

- ból odcinka lędźwiowego (LBP)
- przepuklina dysku
- wypadnięcie dysku lędźwiowego
- choroba dysku lędźwiowego
- przepuklina dysku lędźwiowego
- pęknięcie krążka międzykręgowego
- przewlekły ból pleców

## Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Kliny
- Wałki i Półwałki
  
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP7
  
- Mata ochronna
- Zestaw mata i podkłady ochronne pod twarz
- Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
- Rolka bibułowa na stół do masażu
  
- Bananek
- Pas do stabilizacji

## Bibliografia:

1. Sarı et al., Computed tomographic evaluation of lumbar spinal structures during traction, *Physiotherapy Theory and Practice* 21 (2005) 311
2. Jioun Choi et al., Influences of spinal decompression therapy and general traction therapy on the pain, disability, and straight leg raising of patients with intervertebral disc herniation, *J. Phys. Ther. Sci.* Vol. 27, No. 2, 2015
3. Beattie et al., Outcomes After a Prone Lumbar Traction Protocol for Patients With Activity-Limiting Low Back Pain: A Prospective Case Series Study, *Arch Phys Med Rehabil* Vol 89, February 2008

## Informacje:

Szerokość: 70 cm  
Długość: 202 cm  
Masa: 128 kg  
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -10 – +80°  
Linia: Galaxy  
Liczba sekcji: 3  
Typ stołu: Regulowana wysokość  
Zakres regulacji wysokości: 48 – 98 cm  
Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
Maksymalne obciążenie: 200 kg  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Tak  
PAS: Tak

## Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard  
Galaxy trakcja - wersje: Galaxy Traction T3 - T3.F4, Galaxy Traction T3 - T3.F0

Hallotronic: Tak  
Smart4Arms: Nie  
Regulacja przesuwu sekcji tylnej: 15 cm