


## Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy model 88

### Opis produktu:



Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy model 88 to zaawansowane rozwiązanie medyczne dla pacjentów zagrożonych odleżynami.

Skuteczny w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia. Dostępny w wersji bariatrycznej (model 888). Współpracuje ze wszystkimi modelami pomp Revita. Wyposażony w pokrowiec membraMED®.

Materac nie zawiera pompy w zestawie. **Pompe należy dokupić osobno.**

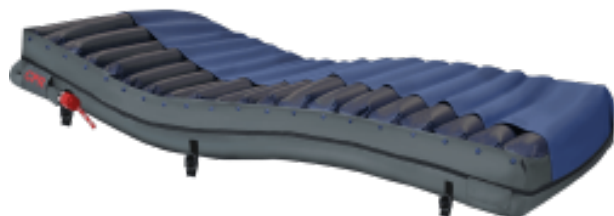

### Zdjęcia produktu:

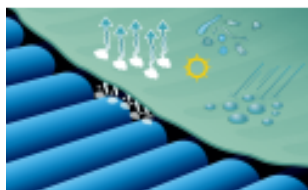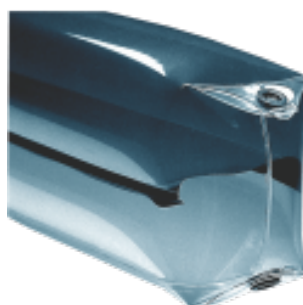

### Szczegółowy opis produktu:

ZAAWANSOWANA OCHRONA DLA WYMAGAJĄCYCH PACJENTÓW

## Materac zmiennociśnieniowy model 88

Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy model 88 to zaawansowane rozwiązanie medyczne dla pacjentów zagrożonych odleżynami. Łączy nowoczesne technologie z praktycznym podejściem, oferując kompleksową ochronę skóry i wyjątkowy komfort osobom długotrwale unieruchomionym.

Współpracuje ze wszystkimi modelami pomp Revita. Szczególnie polecamy konfigurację z pompami: Lux, Alfa, Beta, Ela, Dyna Best, Aga, Ada.

Zdjęcie przedstawia dodatkowy materac spodni.

## STRAŻNIK SUCHEJ SKÓRY

### AIR system (opcjonalnie)

Opcjonalnym elementem materaca jest **AIR system** – sieć mikrootworów dostarczających świeże powietrze bezpośrednio do skóry pacjenta. Technologia ta nie tylko **zwiększa przepływ suchego powietrza**, ograniczając zawilgocenie skóry, ale także **poprawia dotlenienie tkanek**, wspierając naturalne procesy regeneracyjne. Jednocześnie system **reguluje temperaturę**, zapobiegając przegrzaniu i poceniu się. W rezultacie skóra pacjenta pozostaje sucha i dobrze natleniona, co znacząco **zmniejsza ryzyko odleżyn**.

## OCHRONA BEZ OGRANICZEŃ WAGOWYCH

### Wersja bariatryczna (opcjonalnie)

Dla pacjentów z nadwagą lub otyłością dostępna jest specjalna wersja bariatryczna materaca:

- Posiada **trzy sekcje** dla lepszego rozłożenia ciśnienia.
- Zapewnia **wydajniejsze pompowanie**, kluczowe dla osób o większej masie ciała.
- Oferuje **lepszą cyrkulację powietrza** dla efektywnej regulacji temperatury i wilgotności.

Wersja ta odpowiada na specyficzne potrzeby profilaktyki odleżyn u osób z nadwagą, oferując identyczny poziom ochrony i komfortu.

## MATERAC W PIGUŃCE

### Najważniejsze informacje

#### Wysoka jakość

Materac wykonano z poliuretanu (PU), materiału trwałego i odpornego na zniszczenia. Odporność na środki dezynfekcyjne i wysokie temperatury (ponad 60°C) umożliwia skuteczne czyszczenie i sterylizację. Elastyczność PU zwiększa komfort pacjenta i wzmacnia działanie przeciwodleżynowe materaca.

#### Łatwa konserwacja

Materac zaprojektowano z myślą o praktyczności i łatwej konserwacji. Jego konstrukcja umożliwia szybką wymianę pojedynczych uszkodzonych komórek, eliminując potrzebę wymiany całego materaca. To znacząco obniża długoterminowe koszty eksploatacji.

#### Pokrowiec membraMED®

Pokrowiec membraMED®, rozciągający się w czterech kierunkach, dopasowuje się do kształtu materaca i ruchów pacjenta, chroniąc przed reinfekcją. Przepuszcza parę wodną, zmniejszając ryzyko maceracji skóry. Łatwy w czyszczeniu, można go prać, gotować i dezynfekować. Suwak po czterech stronach umożliwia szybką wymianę lub dostęp do materaca.

### Elastyczna konstrukcja komór

Wypinanie pojedynczych komór umożliwia odciążenie konkretnych obszarów ciała pacjenta, co wspomaga leczenie zaawansowanych odleżyn. Eliminuje to potrzebę dodatkowych udogodnień, jak krążki przeciwoodleżynowe, które mogą powodować nierównomierny rozkład ciśnienia i nowe problemy skórne.

### Filtracja powietrza

Pompy do materaców mogą mieć wymienialny filtr zewnętrzny – przeciwtłuszczowy lub antybakteryjny – oczyszczający zasysane powietrze. Zapewnia on mikrobiologiczną czystość powietrza w systemie, chroniąc przed zanieczyszczeniami organicznymi. Zwiększa to sprawność i trwałość systemu przeciwoodleżynowego, jednocześnie chroniąc rany pacjenta.

### Wspomaga układ krążenia

Materac wykorzystuje system zmiennego ciśnienia, cyklicznie modyfikujący punkty podparcia ciała pacjenta. Stymuluje to mikrokążenie, zwiększając przepływ krwi w uciskanych tkankach. Proces ten poprawia ukrwienie tkanek miękkich i wspomaga metabolizm, efektywnie redukując ryzyko odleżyn.

#### **Informacje:**

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy  
 Wysokość: 15/18/21 cm  
 Pokrowiec: membraMED  
 Wersja bariatryczna: Model 888  
 Wymiary: 106 x 122 x 15/18/21 cm  
 Wymiary: 202 x 85 x 15/18/21 cm  
 AIR system: Opcja  
 Funkcja transportowa: Tak  
 Ilość komór: 20 x2  
 Komory spodnie: Tak  
 Komory wymienne: Tak  
 Konstrukcja dna materaca wykonana ze wzmocnionej Codury®: Tak  
 Objętość: ≤ 230 l

#### **Model:**

Wersja materaca: standardowa (model 88),  
 bariatryczna (model 888)

Objętość:  $\leq 320$  l

Objętość:  $\leq 380$  l

Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do IV stopnia

Skuteczność medyczna (BMI):  $\leq 34$

Skuteczność medyczna (BMI):  $\leq 36$

Skuteczność medyczna (BMI):  $\leq 38$

Stabilny zagłówek: Opcja

System narożnych pasów stabilizujących materac: Tak

Waga pacjenta:  $\leq 280$  kg

Waga pacjenta:  $\leq 240$  kg

Waga pacjenta:  $\leq 260$  kg

Wzmocnione przewody powietrza: Opcja

Zawory kierunkowe: Tak

Średnica przewodów powietrza: 10 mm