

Materac przeciwoodleżynowy piankowy gofer 200x90




Opis produktu:

Specjalistyczny materac medyczny „**Gofer**” **200x90 cm (dostępne grubości 12 cm lub 15 cm)** to profesjonalny wyrób klasy I, stworzony do profilaktyki oraz wspomagania leczenia odleżyn. Wykonany z atestowanej pianki poliuretanowej N2838 o profilowanej strukturze gofrowej, zapewnia optymalną cyrkulację powietrza, odprowadzanie wilgoci oraz redukcję nacisku na tkanki. W zestawie z wodoodpornym, paroprzepuszczalnym i zmywalnym pokrowcem medycznym **Sanmed C460**, gwarantuje 100% higieny i ochronę mikrobiologiczną. Idealnie dopasowany do elektrycznych łóżek rehabilitacyjnych w opiece domowej, DPS, hospicjach i szpitalach.

12 lub 15 cm Wysokość do wyboru Pianka N2838
Profilowanie gofer Sanmed C460 Zmywalny
pokrowiec 8% VAT Wyrób medyczny

Zdjęcia produktu:

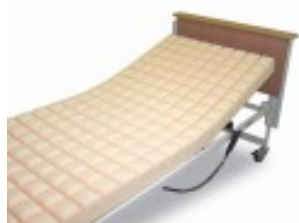

Szczegółowy opis produktu:

SPECJALISTYCZNY MEDYCZNY MATERAC PIANKOWY

Materac przeciwoodleżynowy „Gofer” Sanmed (Wariant 12 cm / 15 cm)

Zaawansowana ochrona przeciwwypocinowa, głęboka redukcja nacisku i łatwość dezynfekcji

Materac przeciwoleżynowy „Gofer” (dostępny w wariantach grubości 12 cm oraz 15 cm) zaprojektowano z myślą o pacjentach długotrwale unieruchomionych, wymagających profilaktyki oraz wspomagania leczenia ran odleżynowych. Wysokiej jakości profilowany blok pianki poliuretanowej gwarantuje właściwe zanurzenie ciała, redukując nacisk jednostkowy na punkty podparcia (biodra, kość krzyżową, pięty).

Połączenie gofrowanej struktury pianki N2838 z powłoką medyczną Sanmed C460 tworzy idealne środowisko do opieki nad pacjentami z problemem nietrzymania moczu – chroniąc wkład przed płynami ustrojowymi i ułatwiając szybką dezynfekcję powierzchniową.

200×90 cm Wymiar leża 12 / 15 cm Wysokość do wyboru N2838 Gęstość pianki Sanmed C460 Pokrowiec zmywalny

Najważniejsze atuty medyczne materaca Gofer Sanmed

Atestowany blok pianki N2838: gęstość ok. 28 kg/m³ zapobiega szybkiej utracie sprężystości, wygniataniu i kruszeniu się materiału pod ciężarem ciała.

Gofrowana struktura wentylacyjna: specjalne nacięcia wycinają kanały cyrkulacji powietrza, eliminując wilgoć, ciepło oraz niwelując niebezpieczne siły ścinające.

Wodoodporny pokrowiec Sanmed C460: szczelna bariera dla krwi, moczu i płynów ustrojowych przy zachowaniu pełnej paroprzepuszczalności (ochrona przed odparzeniami).

Szybka dezynfekcja powierzchniowa: sprawna higiena bez konieczności ciągłego ściągania pokrowca do prania – wystarczy przetarcie preparatem odkażającym.

Dwa warianty wysokości dopasowane do Twoich potrzeb

W zależności od wagi pacjenta, stopnia mobilności oraz przewidywanego czasu opieki, możesz wybrać wersję o grubości 12 cm lub podwyższony wariant 15 cm.

Wariant 12 cm vs 15 cm

Wersja 12 cm to uniwersalny standard opiekuńczy. Grubszy blok 15 cm oferuje jeszcze głębsze podparcie i jest w szczególności polecany dla osób o wyższej wadze ciała oraz pacjentów całkowicie leżących.

Izolacja od ramy łóżka

Wysoka sprężystość profilowanej pianki całkowicie eliminuje ryzyko wyczuwania przez pacjenta twardych lamel leża (drewnianych lub stalowych) nawet przy podniesionym segmencie pleców.

Kompatybilność z łózkami

Wymiary 200×90 cm pasują do leży większości łóżek rehabilitacyjnych, zachowując bezpieczny zapas wysokości dla bocznych barier ochronnych.

Pokrowiec Sanmed C460 - Zmywalna ochrona mikrobiologiczna

Bariera paroprzepuszczalna: Mikropory powłoki poliuretanowej zatrzymują cząsteczki wody, wypuszczając jednocześnie parę wodną. Zapobiega to maceracji naskórka i odparzeniom.

Zamek w kształcie litery „L”: Chroniony specjalną listwą osłonową przylegającą do ramy, zapobiegającą podsiąkaniu płynów wzdłuż suwaka.

Odporność na płyny i preparaty: Odporny na działanie płynów ustrojowych, parafiny, oliwki oraz preparatów dezynfekcyjnych (np. alkohol etylowy 70%, Terralin, Sekusept).

Okiem Eksperta

Połączenie gofrowanej pianki o gęstości N2838 z pokrowcem Sanmed C460 to zestaw idealny do opieki nad osobą leżącą, korzystającą z pieluchomajtek. Nawet w przypadku awarii pieluchy, wewnątrz materaca pozostaje suche i sterylne. Wystarczy przetrzeć pokrowiec płynem dezynfekującym. Jeśli budżet na to pozwala, przy długotrwałym leżeniu warto rozważyć wybór wariantu 15 cm dla uzyskania jeszcze lepszej sprężystości i ochrony stawów biodrowych.

Specyfikacja i dane techniczne materaca

Parametr strukturalny	Wartość / Specyfikacja techniczna
Wymiary użytkowe leża (Długość x Szerokość)	200 x 90 cm
Wysokość całkowita materaca (Opcje do wyboru)	12,0 cm lub 15,0 cm
Gatunek i typ pianki poliuretanowej	N2838 (Gęstość ok. 28 kg/m ³ , wysoka sprężystość)
Struktura wkładu piankowego	Profilowana nacięciami w kształcie gofra (kanały wentylacyjne)
Typ pokrowca ochronnego	Sanmed C460 (zmywalny, wodoodporny, paroprzepuszczalny)
Sposób zapinania pokrowca	Zamek błyskawiczny w kształcie litery „L” z klapą zabezpieczającą
Możliwości konserwacji i dezynfekcji pokrowca	Przetarcie powierzchniowe płynami odkażającymi lub dezynfekcja do 65°C
Klasyfikacja i stawka VAT	Certyfikowany wyrób medyczny - Stawka VAT 8%

Wskazówki eksploatacyjne i konserwacyjne

ZALECENIE DEZYNEFKCYJNE: Pokrowiec Sanmed C460 należy czyścić preparatami bezalkoholowymi lub środkami na bazie alkoholu etylowego do 70%. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy stosować preparatów zawierających aldehydy, które mogą uszkodzić ciągłość powłoki poliuretanowej!

* Produkt spełnia normy higieniczne i mikrobiologiczne stawiane wyrobom medycznym wielorazowego użytku w opiece szpitalnej i stacjonarnej.

Informacje:

Model:

Elbur - materac Sanmed: 12 cm, 15 cm