


Orionmed Balneo - Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego



Opis produktu:

Orionmed Balneo to specjalistyczna wanna terapeutyczna przeznaczona do **zaawansowanych zabiegów balneologicznych**, takich jak **kąpiele solankowe i kwasowęglowe**. Urządzenie łączy zalety **automatycznego hydromasażu** z możliwościami **klasycznej balneoterapii**, a jego konstrukcja z materiałów o wysokiej odporności chemicznej gwarantuje trwałość przy pracy z wodami mineralnymi. To doskonałe rozwiązanie dla sanatoriów i placówek rehabilitacyjnych, które chcą oferować skuteczne terapie z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych.

Zdjęcia produktu:

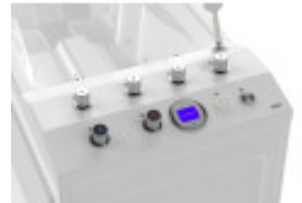

Szczegółowy opis produktu:

WANNA DO BALNEOTERAPII I HYDROMASAŻU

Orionmed Balneo

Orionmed Balneo to specjalistyczna wanna terapeutyczna, stworzona z myślą o ośrodkach prowadzących zaawansowane zabiegi balneologiczne, takie jak kąpiele solankowe i kwasowęglowe. Dzięki wzmocnionej konstrukcji i zastosowaniu materiałów o wysokiej odporności chemicznej wanna jest w pełni przystosowana do pracy z wodami mineralnymi.

Urządzenie łączy w sobie zalety automatycznego hydromasażu z możliwościami klasycznej balneoterapii. To idealne rozwiązanie dla sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych i placówek rehabilitacyjnych, które chcą poszerzyć swoją ofertę o skuteczne i poszukiwane przez pacjentów terapie z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych.

Technologia w służbie zdrowia

Konstrukcja wanny Orionmed Balneo została zaprojektowana tak, aby sprostać wymaganiom zabiegów balneologicznych. Ciepło wody leczniczej działa rozluźniająco, a jej składniki aktywne mogą być lepiej absorbowane przez skórę. Działanie to wspierane jest przez system hydromasażu.

- **Konstrukcja odporna na czynniki chemiczne** — niecka, armatura oraz wewnętrzne instalacje zostały wykonane z materiałów odpornych na działanie solanek oraz wody nasyconej dwutlenkiem węgla, co zapewnia długą i bezawaryjną eksploatację.
- **Wsparcie dla kąpieli leczniczych** — wanna umożliwia prowadzenie kąpieli solankowych, które poprzez drażniący wpływ soli na skórę mogą stymulować procesy regeneracyjne, oraz kąpieli kwasowęglowych. Mikromasaż wykonywany przez pęcherzyki CO₂ w połączeniu z jego wchłanianiem przez skórę może prowadzić do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi.
- **Ukierunkowany hydromasaż** — system 26 dysz wodnych pozwala na prowadzenie masażu całego ciała, wspomagając efekt terapeutyczny kąpieli balneologicznej. Intensywność masażu można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Kluczowe cechy i korzyści

- **Przystosowanie do balneoterapii** — materiały odporne na solankę i wody kwasowęglowe przekładają się na trwałość urządzenia w wymagających warunkach.
- **Wszechstronność zabiegowa** — wanna umożliwia wykonywanie zarówno hydromasażu w czystej wodzie, jak i specjalistycznych kąpieli solankowych oraz kwasowęglowych (przy podłączeniu saturatora).
- **Szybkie napełnianie** — specjalny układ napełniania przy dnie niecki skraca czas przygotowania do zabiegu do poniżej 2 minut.
- **Zautomatyzowana konserwacja** — wbudowane programy dezynfekcji, odkamieniania oraz przepłukiwania kanałów hydromasażu ułatwiają utrzymanie higieny i drożności systemu.
- **Intuicyjna obsługa** — czytelny, dotykowy panel sterowania pozwala na łatwe zarządzanie funkcjami wanny.
- **Bezpieczeństwo i ergonomia** — wyprofilowany kształt niecki, zintegrowane uchwyty oraz dołączone stopnie pomagają pacjentowi w zachowaniu bezpiecznej i komfortowej pozycji.

Korzyści dla Twojej placówki

- **Poszerzenie oferty o specjalistyczne zabiegi** — możliwość wprowadzenia do oferty poszukiwanych kąpeli leczniczych, takich jak solanki czy kąpiele kwasowęglowe.
- **Podniesienie prestiżu ośrodka** — inwestycja w specjalistyczny sprzęt do balneoterapii buduje wizerunek nowoczesnej i wszechstronnej placówki.
- **Elastyczna konfiguracja** — możliwość wyboru dedykowanej armatury (3-6 zaworów) pozwala na idealne dopasowanie wanny do mediów leczniczych dostępnych w placówce.
- **Optymalizacja pracy** — szybkie napełnianie i zautomatyzowane procesy konserwacyjne pozwalają na obsługę większej liczby pacjentów i redukują obciążenie personelu.

Praktyczne funkcje i zabezpieczenia podnoszące komfort pracy

- **Zabezpieczenie przed pracą "na sucho"** — pompa hydromasażu nie uruchomi się, jeśli w wannie nie ma odpowiedniej ilości wody, co chroni kluczowe komponenty przed uszkodzeniem.
- **Elektryczny czujnik poziomu wody** — system automatycznie kontroluje proces napełniania i sygnalizuje dźwiękiem osiągnięcie minimalnego oraz zabiegowego poziomu wody.
- **Manualny spust awaryjny** — w przypadku awarii zasilania, wannę w wersji Balneo można opróżnić ręcznie za pomocą łatwo dostępnego zaworu, co zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość pracy.
- **Automatyczny tryb uśpienia** — po 15 minutach bezczynności panel sterowania automatycznie się wygasza, co ogranicza zużycie energii.
- **Sygnalizacja potrzeby konserwacji** — urządzenie samo informuje o konieczności uzupełnienia płynu do dezynfekcji lub przeprowadzenia procesu odkamieniania za pomocą dedykowanych ikon na wyświetlaczu.

Szczegółowy opis opcji dodatkowych

CHROMO – Terapia kolorami

Opcja chromoterapii wzbogaca kąpiel o terapeutyczne i relaksacyjne działanie kolorów, przekształcając zabieg w kompleksowe doznanie wellness. System oparty jest na punktach świetlnych LED-RGB, które podświetlają wodę w wannie, tworząc wyjątkową atmosferę. Użytkownik może wybrać konfigurację z 12, 24 lub 36 pojedynczymi źródłami światła.

Panel sterowania pozwala na łatwy wybór jednego z kilku trybów oświetlenia:

- Wybrany kolor stały (czerwony, zielony, niebieski, żółty, błękitny, pomarańczowy, purpurowy, biały).
- Cykliczne przełączanie kolorów.
- Płynne, powolne przejścia pomiędzy kolorami podstawowymi.
- Dynamiczny "taniec światła" (miganie).
- Płynne, szybkie przejścia pomiędzy kolorami tęczy.

AUDIO – Kąpiel z muzyką

System AUDIO pozwala na odtwarzanie muzyki bezpośrednio podczas zabiegu, co sprzyja głębszej relaksacji pacjenta. Wanna wyposażona jest w wysokiej jakości głośniki, dyskretnie umieszczone w jej tylnej części. Moduł **Power Dynamics BT10** umożliwia bezprzewodowe połączenie Bluetooth z dowolnym urządzeniem zewnętrznym, takim jak telefon komórkowy.

Wybór armatury (ilości zaworów)

Modele w wersji Balneo i Balneo z funkcją AIR można zamówić z różną ilością zaworów, co pozwala

na podłączenie dedykowanych mediów leczniczych.

- **Armatura 3-zaworowa (standard):** Umożliwia podłączenie wody ciepłej, zimnej oraz obsługę prysznica ręcznego.
- **Armatura 4-zaworowa (opcja):** Dodatkowy zawór pozwala na podłączenie jednego medium leczniczego, np. wody nasyconej CO₂, solanki ciepłej lub solanki zimnej.
- **Armatura 5- i 6-zaworowa (opcja):** Pozwala na podłączenie dwóch lub trzech różnych mediów leczniczych, zapewniając maksymalną wszechstronność zabiegową bez konieczności przełączania źródeł zewnętrznych.

System do kąpeli kwasowęglowych

Ta opcja wyposaża wannę w dodatkowy zawór oraz instalację umożliwiającą bezpieczne przeprowadzanie kąpeli kwasowęglowych. System pozwala na podłączenie wanny do zewnętrznego źródła (saturatora) wody nasyconej dwutlenkiem węgla. Podczas zabiegu pęcherzyki CO₂ osadzające się na skórze pacjenta dokonują delikatnego mikromasażu. Jednocześnie nie wchłaniany przez skórę dwutlenek węgla powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, co może przyczyniać się do obniżenia ciśnienia krwi i poprawy krążenia.

Podpórka pod nogi

Ta prosta w montażu podpórka została zaprojektowana z myślą o pacjentach o niższym wzroście. Mocowana wewnątrz niecki, skutecznie skracając jej przestrzeń użytkową, zapewniając stabilne oparcie dla stóp. Dzięki temu pacjent nie zsuwa się w głąb wanny, utrzymując prawidłową i komfortową pozycję przez cały czas trwania zabiegu. Jest to kluczowe dla zachowania poczucia bezpieczeństwa oraz dla skuteczności terapii, ponieważ zapewnia, że dysze hydromasażu trafiają dokładnie w te partie ciała, które wymagają stymulacji.

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Porównanie modeli Orionmed

Cecha / Funkcja	Orionmed	Orionmed Balneo	Orionmed Balneo AIR
Główne przeznaczenie	Hydromasaż, Kąpiel perełkowa	Hydromasaż, Kąpiele balneologiczne	Wszystkie 3 terapie łącznie
Automatyczny hydromasaż strefowy	(26 dysz)	(26 dysz)	(26 dysz)
Kąpiel perełkowa (masaż powietrzny)	(126 dysz)		(126 dysz)
Przystosowanie do solanki / wody nasyconej CO ₂		(Standard)	(Standard)
Programy automatyczne	(Standard)		

(P1-P4)			
Podtrzymanie temperatury wody	(Standard)		
Bicz wodny (HOSE)	Opcja		
Aromaterapia (AROMA)	Opcja		
Chromoterapia (CHROMO)	Opcja	Opcja	Opcja
System audio (AUDIO)	Opcja	Opcja	Opcja
Minimalny czas napełniania	4 min	2 min	2 min
Konstrukcja i armatura	Akryl sanitarny	Materiały o wysokiej odporności chemicznej	Materiały o wysokiej odporności chemicznej

INTERAKTYWNA PREZENTACJA PRODUKTU 360°

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x
Kliknij dwukrotnie dla pełnego ekranu

Informacje:

Szerokość: 850 mm
Długość: 2140 mm
Przeznaczenie: Kąpiele balneologiczne (solanki, woda nasycona CO₂), hydromasaż
Wysokość: 850 mm
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Maksymalna masa pacjenta: 135 kg
Pojemność do przelewu: 320 l
Pobór prądu: 14 A
Czas napełniania: poniżej 2 min
Czas opróżniania: poniżej 4 min
Seria produktu: Orionmed
Model produktu: Orionmed Balneo
Pojemność do kąpieli: 160 l
Liczba dysz hydromasażu: 26 (w 3 strefach)
Masa bez wody: 160 kg
Klasa wyrobu medycznego: Klasa IIa
Główne przeznaczenie: Hydromasaż, kąpiele balneologiczne
Automatyczny hydromasaż strefowy: 26 dysz
Chromoterapia (CHROMO): Opcja
Minimalny czas napełniania: poniżej 2 min
Konstrukcja i armatura: Materiały o wysokiej odporności chemicznej
System AUDIO: Opcja
Przystosowanie do solanki / wody nasyconej CO₂:

Model:

Kolor: Calypso, Biały
Chrome 2R: nie, 12 źródeł światła, 24 źródła światła, 36 źródeł światła
Audio: nie, tak
Ilość zaworów: 3 zawory, 4 zawory, 5 zaworów, 6 zaworów
Podpórka pod nogi: nie, tak

Standard