

Manipulator maciczny SecuFix





Opis produktu:

Manipulator macicy do badania, diagnostyki, leczenia metodą laparoskopową z wykorzystaniem sprzętu endoskopowego oraz zabiegów:

całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH),
nadszyjkowego usunięcia macicy (LASH).

Zdjęcia produktu:

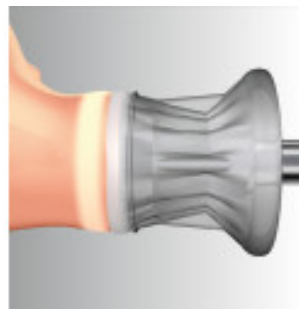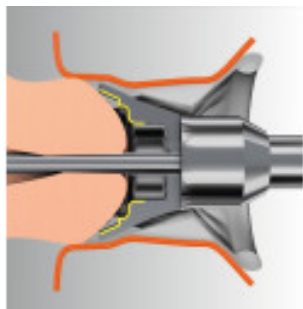

Szczegółowy opis produktu:

Manipulator maciczny SecuFix

Manipulator maciczny SecuFix jest stosowany w celu uzyskania widoku ściany pochwy metodą laparoskopową oraz wytworzenia odmy podczas otwierania tylnej ściany pochwy.

Kolpotransiluminator, sterylny (kapturek naszyjkowy i zestaw węży) – umożliwia bezpieczne zasysanie części pochwowej szyjki macicy, uzyskiwanie widoku ściany pochwy metodą laparoskopową oraz uszczelnianie pochwy.

Manipulator maciczny – wyposażony w uchwyt sondy domacicznej (za pomocą zatrzasku

sprężynowego sonda domaciczna może zostać ustawiona na ustaloną uprzednio długość i zamocowana), uchwyt na kapturek naszyjkowy i emisję światła do kapturka naszyjkowego.

Sonda domaciczna – umożliwia manipulację w obrębie macicy oraz wytwarzanie próżni za pomocą zestawu węży, w celu zassania części pochwowej szyjki macicy.

Zestaw zawiera:

manipulator maciczny $\varnothing$ 36 mm (8370701); sonda domaciczna $\varnothing$ 5 mm (8370702); kolpotransiluminator x 10 (41708370); uszczelka (10 szt.) (89.02); szczotka czyszcząca $\varnothing$ 5 mm, długość całkowita 400 mm (7970405); szczotka czyszcząca $\varnothing$ 9 mm, długość całkowita 400 mm (7970409).

Akcesoria dodatkowe / opcjonalne:

dren irygacyjny długość 0,6 m (163915); światłowód $\varnothing$ 3,5 mm, długość całkowita 2,3 m (8061.353); pojemnik/kontener do przechowywania i sterylizacji.

Zalety manipulatora SecuFix

Silikonowy (jednorazowy) kielich doskonale dopasowujący się do wszystkich rozmiarów szyjek macicy. Bezpieczeństwo koagulacji w obrębie kielicha. Próżniowe zassanie manipulatora zapobiega „sianiu” komórek nowotworowych. Sonda domaciczna ze skalą, wysunięcie regulowane w rękojeści. Oświetlenie w postaci aureoli na szyjce macicy (widoczne od strony pola laparoskopowego) uwidaczniające linię cięcia. Wymaga zastosowania źródła światła (stacjonarnego lub przenośnego np. bateryjnego).

Informacje:

Kategoria: Manipulatory maciczne

Model: