


Cewniki UroMax z balonikiem



Opis produktu:

Cewnik z balonikiem dylatacyjnym przeznaczony do rozszerzania dróg moczowych, w celu likwidacji jego zwężeń oraz łatwiejszego wprowadzania większych instrumentów chirurgicznych.

Zdjęcia produktu:

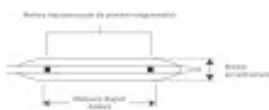

Szczegółowy opis produktu:

Cewniki UroMax Ultra™ z balonikiem

Cewnik z balonikiem dylatacyjnym przeznaczony do rozszerzania dróg moczowych, w celu likwidacji jego zwężeń oraz łatwiejszego wprowadzania większych instrumentów chirurgicznych.

- stworzony przy użyciu specjalnie ukształtowanych polimerów sprawiających, iż jest on bardzo trwały i bez trudu utrzymuje zewnętrzną średnicę w czasie napompowywania
- kontrolowane ciśnienie pompowania aż do 20ATM ułatwia wysoko-ciśnieniowe rozszerzanie ciasnych zwężeń
- pokryta warstwą HydroPlus™ powierzchnia balonika znacznie redukuje tarcie towarzyszące jego wprowadzaniu do układu moczowego oraz jego usuwaniu
- balonik został zaprojektowany w taki sposób, aby tworzywo z którego go wykonano mogło ciasno owinać się wokół cewnika w celu uzyskania jak najmniejszej średnicy co ułatwia jego wprowadzanie i usuwanie
- jego niezwykle wytrzymały trzon oraz stożkowa końcówka ułatwiają manewrowanie w ciasnych, krętych moczowodach
- widoczny na zdjęciach RTG znacznik poprawia widoczność położenia balonika
- dostępny jako zestaw lub jako pojedynczy cewnik, w skład zestawu wchodzi cewnik UroMax™ oraz urządzenie pompujące Encore™ 26 z miernikiem ciśnienia

- nie zawiera lateksu

Cewniki UroMax Ultra™ z balonikiem

Numer katalogowy	Średnica balonu		Długość balonu	Rozmiar cewnika		Długość robocza	Zalecan drotu pro
	(Fr)	(mm)		(Fr)	(mm)		
M0062251000	12	4,0	4	5,8	1,9	75	
M0062251010	15	5,0	4	5,8	1,9	75	
M0062251020	18	6,0	4	5,8	1,9	75	
M0062251030	21	7,0	4	5,8	1,9	75	
M0062251040	24	8,0	4	5,8	1,9	75	
M0062251050	30	10,0	4	5,8	1,9	75	
M0062251060	12	4,0	6	5,8	1,9	75	
M0062251070	15	5,0	6	5,8	1,9	75	
M0062251080	18	6,0	6	5,8	1,9	75	
M0062251090	21	7,0	6	5,8	1,9	75	
M0062251100	24	8,0	8	5,8	1,9	75	
M0062251110	30	10,0	8	5,8	1,9	75	
M0062251150	12	4,0	10	5,8	1,9	75	
M0062251160	15	5,0	10	5,8	1,9	75	
M0062251170	18	6,0	10	5,8	1,9	75	
M0062251180	21	7,0	10	5,8	1,9	75	

Cewniki UroMax Ultra™ z balonikiem (zestawy)

Numer katalogowy	Średnica balonu		Długość balonu	Rozmiar cewnika		Długość robocza	Zalecan drotu pro
	(Fr)	(mm)		(Fr)	(mm)		
M0062251200	12	4,0	4	5,8	1,9	75	
M0062251210	15	5,0	4	5,8	1,9	75	
M0062251220	18	6,0	4	5,8	1,9	75	
M0062251230	21	7,0	4	5,8	1,9	75	

M00622512 30	24	8,0	4	5,8	1,9	75	
M00622512 50	30	10,0	4	5,8	1,9	75	
M00622512 60	12	4,0	6	5,8	1,9	75	
M00622512 70	15	5,0	6	5,8	1,9	75	
M00622512 80	18	6,0	6	5,8	1,9	75	
M00622512 90	21	7,0	6	5,8	1,9	75	
M00622513 00	24	8,0	8	5,8	1,9	75	
M00622513 10	30	10,0	8	5,8	1,9	75	
M00622513 50	12	4,0	10	5,8	1,9	75	
M00622513 60	15	5,0	10	5,8	1,9	75	
M00622513 70	18	6,0	10	5,8	1,9	75	
M00622513 80	21	7,0	10	5,8	1,9	75	

Zestawy zawierają: Cewniki UroMax Ultra™ z balonem wysokociśnieniowym oraz pompkę Encore™ 26.

Informacje:

Model:

Urządzenie pompujące Encore™: nie, tak
 Balonik: 12 Fr x 4 cm, 15 Fr x 4 cm, 18 Fr x 4 cm,
 21 Fr x 4 cm, 24 Fr x 4 cm, 30 Fr x 4 cm, 12 Fr x
 6 cm, 15 Fr x 6 cm, 18 Fr x 6 cm, 21 Fr x 6 cm,
 24 Fr x 8 cm, 30 Fr x 8 cm, 12 Fr x 10 cm, 15 Fr x
 10 cm, 18 Fr x 10 cm, 21 Fr x 10 cm