


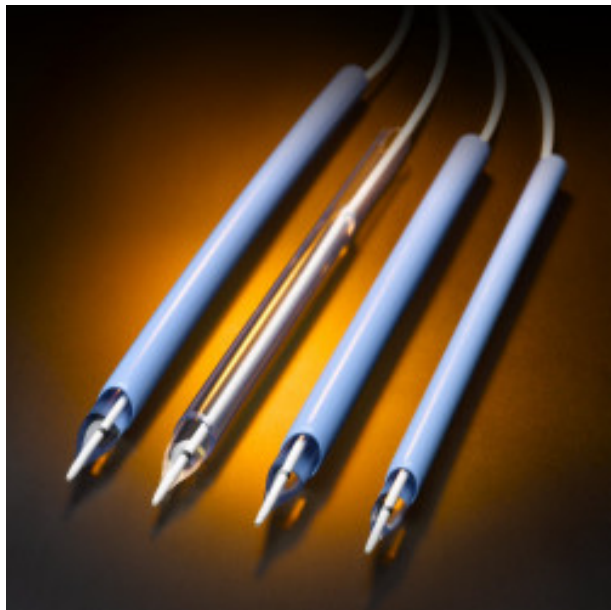


## Cewnik NephroMax do nefrostomii z wysokociśnieniowym balonikiem

### Opis produktu:

Cewnik z balonikiem stworzony do promieniowego rozszerzania przetoki nerkowej oraz wygodnego wprowadzania płaszcza roboczego. Dostępny w wielu rozmiarach.

### Zdjęcia produktu:

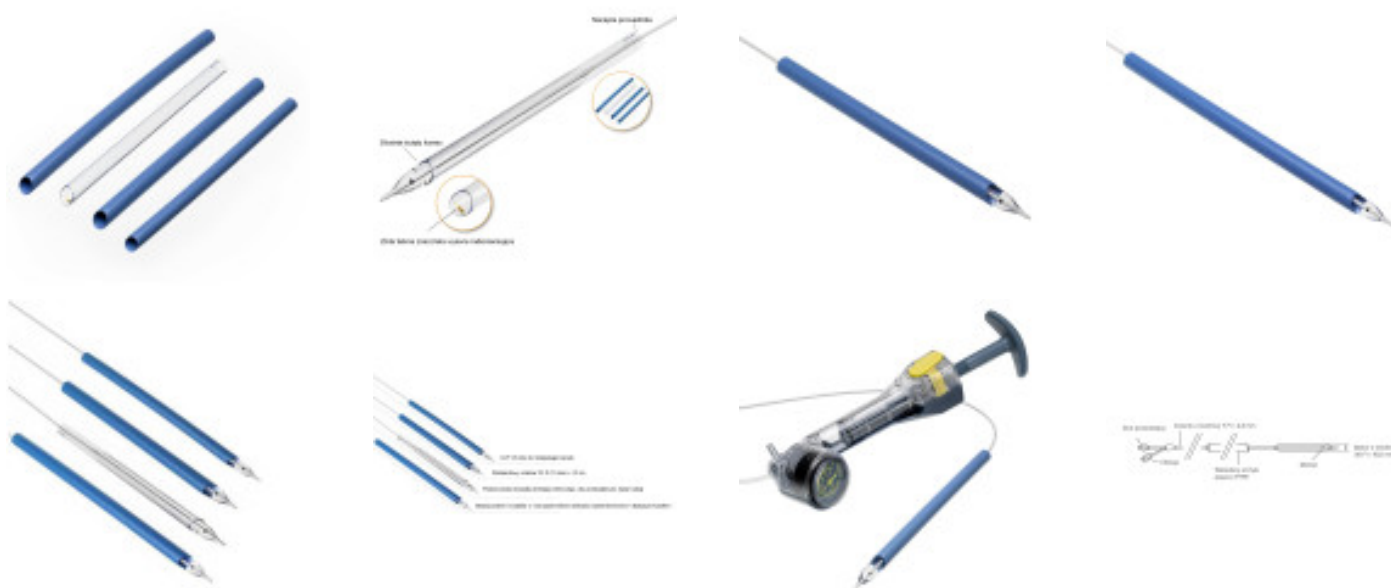

### Szczegółowy opis produktu:

Ten sprawdzony lider na rynku ma długą historię niezawodnego działania. Końcówka balona **NephroMax** jest zaprojektowana w taki sposób, aby zmniejszać ryzyko wystąpienia urazu i poprawiać dostęp do trudno dostępnych kielichów zaklinowanych złoгами.

- Dodatkowe opcje rozmiarów i konfiguracji umożliwiają leczenie większej liczby pacjentów.
- Nowa końcówka umożliwia większe zbliżenie do kamieni.
- Wyższe znamionowe ciśnienie rozrywające.

Wysokociśnieniowy **Nefrostomijny Cewnik Balonowy NephroMax** jest zaprojektowany dla celów rozszerzania promieniowego kanału nefrostomijnego i wygodnego umieszczenia koszulki

roboczej.

## Wiele konfiguracji

Dostępnych jest wiele rozmiarów dla różnych typów pacjentów, włącznie z koszulkami o dłuższych balonach dla pacjentów otyłych. Koszulka dostępu nerkowego wykonana została z PTFE i przezroczystego materiału.

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [img-9319-left-thickbox_default] | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 F (8 mm) do mniejszego kanału</li> <li>• Standardowy rozmiar 30 F (10 mm) x 12 cm</li> <li>• Przezroczysta koszulka dostępu nerkowego, aby zwizualizować kanał i złogi</li> <li>• Dłuższy balon i koszulka w celu zapewnienia większej wszechstronności i dłuższych kanałów</li> </ul> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Łatwość wprowadzania balonu

- Niski profil balonu ma ułatwiać wprowadzanie i zmniejszać ryzyko urazu u pacjenta.
- Taśma znacznika kontrastująca w promieniach RTG ma umożliwiać kontrolę nawigacji i gwarantować wprowadzenie.

## Ułatwione wprowadzanie koszulki

- Skośnie ścięty koniec ułatwia wprowadzanie.
- Koszulki Amplatza wytworzone ze sztywnego, odpornego na zginanie materiału PTFE są dostępne w wielu rozmiarach.
- Przezroczysta koszulka dostępu nerkowego ułatwia wizualizację **kamieni** wokół koszulki.- Złota taśma znacznika wysoce radiocieniująca potwierdza położenie.- Nacięcie przewodnika pozwala utrzymać przewód w miejscu i z dala od toru.

## Cewnik NephroMax™ do nefrostomii z wysokociśnieniowym balonikiem

| Numer katalogowy | Średnica balona |      | Długość balona | Rozmiar cewnika |      | Długość robocza | Wew. średnica/długość płaszcz |      | Typ           |
|------------------|-----------------|------|----------------|-----------------|------|-----------------|-------------------------------|------|---------------|
|                  | (Fr)            | (mm) |                | (Fr)            | (mm) |                 | (Fr)                          | (cm) |               |
| M0062101170      | 30              | 10   | 12             | 7               | 2,3  | 55              | 30                            | 17   | PTFE          |
| M0062101400      | 24              | 8    | 12             | 7               | 2,3  | 55              | 24                            | 17   | PTFE          |
| M0062101420      | 30              | 10   | 12             | 7               | 2,3  | 55              | 30                            | 17   | Przezroczysty |
| M0062101440      | 30              | 10   | 15             | 7               | 2,3  | 55              | 30                            | 20   | PTFE          |

Do zestawu dołączony jest zawór wysokociśnieniowy oraz płaszcz.

**Cewnik NephroMax™ do nefrostomii z wysokociśnieniowym balonikiem (zestaw)**

| Numer katalogowy | Średnica balona |      | Długość balona | Rozmiar cewnika |      | Długość robocza | Wew. średnica/długość płaszcz |      | Typ           |
|------------------|-----------------|------|----------------|-----------------|------|-----------------|-------------------------------|------|---------------|
|                  | (Fr)            | (mm) | (cm)           | (Fr)            | (mm) | (cm)            | (Fr)                          | (cm) |               |
| M0062101180      | 30              | 10   | 12             | 7               | 2,3  | 55              | 30                            | 17   | PTFE          |
| M0062101600      | 24              | 8    | 12             | 7               | 2,3  | 55              | 24                            | 17   | PTFE          |
| M0062101620      | 30              | 10   | 12             | 7               | 2,3  | 55              | 30                            | 17   | Przezroczysty |
| M0062101640      | 30              | 10   | 15             | 7               | 2,3  | 55              | 30                            | 20   | PTFE          |

Zestaw zawiera: Cewnik NephroMax™ do nefrostomii z wysokociśnieniowym balonikiem, płaszcz nerkowy, zawór wysokociśnieniowy, urządzenie pompujące Encore™ 26, 20ml z manometrem.

**Informacje:**
**Model:**

Balonik / długość płaszcz: 30 Fr x 12 cm / 17 cm, 24 Fr x 12 cm / 17 cm, 30 Fr x 15 cm / 20 cm, 30 Fr x 12 cm (typ przezroczysty) / 17 cm  
 Urządzenie pompujące Encore™: nie, tak