




System trans waginalny Advantage Fit

Opis produktu:

System trans waginalny Advantage Fit

Zdjęcia produktu:

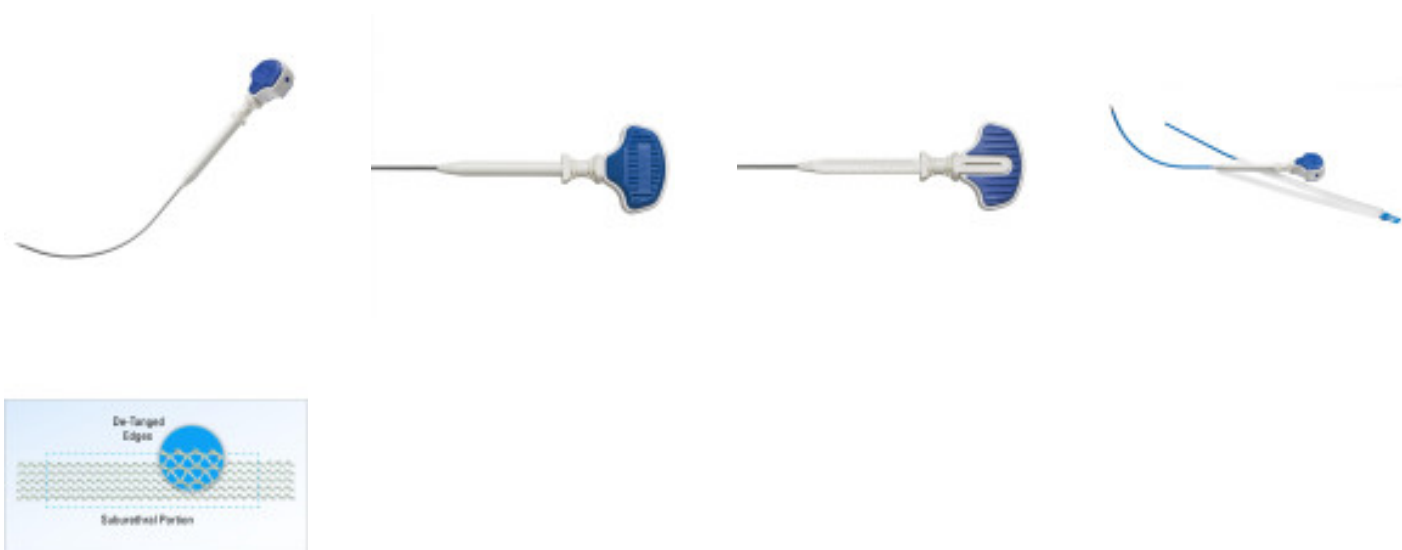

Szczegółowy opis produktu:

Parametr	System Gynecare TVT Exact™	System Advantage Fit	Główny czynnik różnicujący
Średnica trokara	3,0 mm	2,7 mm	System Advantage Fit jest o 10% cieńszy niż System TVT Exact, co zapewnia mniejszy kanał przez tkankę pacjenta
Promień trokara	106,5 mm	82,55 mm	Promień krzywizny Systemu Advantage Fit jest o 22% mniejszy, co

			ma umożliwiać większe zbliżenie trokara do kości łonowej
Elastyczność trokara	„Szttywny”	Nieznacznie elastyczny	Nieznaczna elastyczność Urządzenia Advantage ma zapewniać odbijanie się od kości łonowej i dostarczać informacji zwrotnej w zakresie kierunku
Kolor koszulki	Biały	Niebieski	Niebieska koszulka pomaga zapewnić lepszą widoczność podczas cystoskopii
Naprężanie siatki i usuwanie rękawa	Łatwo usuwany w celu zminimalizowania naprężenia wstępnego i zniekształcenia”	Wypustka środkująca mająca wspomagać regulację i ułatwiać usunięcie rękawa bez dalszego naprężania taśmy	Wypustka środkująca pozwala na wywieranie siły naprężającej tylko na rękaw siatki, zachowując jej integralność.
Szczegółowe informacje dotyczące siatki	Cięta laserowo na całej długości siatki. Jest to inna siatka niż opisywana w ich literaturze.	Wygładzona część podcewkowa	Część wygładzona ma zmniejszać podrażnienia w części podcewkowej

Informacje dotyczące zamówienia

Kod produktu	Opis
M0068502110	System Advantage Fit(1 Urządzenie Wprowadzające i 1 Moduł z Siatką)
M0068502111	System Advantage Fit SystemOpakowanie 5 szt.

Informacje:

Systemy do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu: System trans waginalny

Opcje produktu: