


Galaxy Traction T3 - stół do trakcji kręgosłupa

Opis produktu:

Galaxy T3 to profesjonalny stół, który umożliwia wykonanie trakcji kręgosłupa poprzez rozluźnienie napiętych mięśni oraz zwiększenie przestrzeni i otworów międzykręgowych z użyciem ciągnika trakcyjnego.



Zdjęcia produktu:

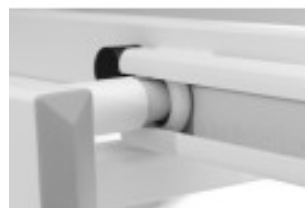

Szczegółowy opis produktu:

Galaxy Traction T3 - stół do trakcji

Zabiegi trakcyjne wykonuje się w celu zwiększenia sprawności statodynamicznej kręgosłupa poprzez rozluźnienie napiętych mięśni oraz zwiększenie przestrzeni i otworów międzykręgowych. W wyniku terapii następuje redukcja ucisku i podrażnienia korzeni nerwowych oraz poprawa krążenia w obszarze tętnicy kręgosłupowej.

Cechy charakterystyczne:

- wersja 3-sekcyjna,
- elektryczna regulacja za pomocą ramy wokół podstawy stołu,
- regulowany zagłówek od -30 do +80° z wyprofilowanym otworem na twarz i zaślepką,
- specjalny uchwyt na pasy do trakcji ukryty pod zaślepką,
- szeroka gama kolorów tapicerki,
- stabilna konstrukcja krzyżakowa,
- regulowana półka pod aparat do trakcji,
- system jezdny F.0 (2 kółka i 2 antypoślizgowe stopki) lub F.4 (4 unoszone kółka i 4 antypoślizgowe stopki),
- PAS (Personal Authorization System) - magnetyczny klucz dostępu,
- kompatybilność z pasami do trakcji QuickWrap DTS oraz urządzeniem do trakcji kręgosłupa TRU-TRAC/TRITON firmy Chattanooga Group.

Terapia trakcyjna

Terapia trakcyjna kręgosłupa zakłada rozciąganie kręgosłupa za pomocą stołu trakcyjnego lub podobnego urządzenia napędzanego silnikiem, pneumatycznie lub korzystającego z grawitacji.

Stosowana głównie w celu złagodzenia bólu i promowania optymalnego środowiska gojenia się zwyrodnienia, wypukliny lub przepukliny krążka międzykręgowego. Rozluźnia napięte mięśnie, rozszerza przestrzeń otworów międzykręgowych i w ten sposób zmniejsza ucisk i podrażnienie korzeni nerwowych oraz polepsza krążenie w obszarze tętnicy kręgosłupowej.

Tworzy niższe ciśnienie w krążku międzykręgowym w celu zmniejszenia przepukliny, rozciąga więzadło podłużne tylne, które dodatkowo pomaga w redukcji przepukliny i uwalnia przylegające korzenie nerwowe. Powoduje lepsze odprowadzanie metabolitów i mediatorów stanu zapalnego oraz większy napływ składników odżywczych, co sprzyja regeneracji uszkodzonego obszaru^{1,2,3}.

Główne wskazania:

- ból odcinka lędźwiowego (LBP)
- przepuklina dysku
- wypadnięcie dysku lędźwiowego
- choroba dysku lędźwiowego
- przepuklina dysku lędźwiowego
- pęknięcie krążka międzykręgowego
- przewlekły ból pleców

Akcesoria opcjonalne

- Klin Kaltenborna
- Kliny
- Wałki i Półwałki
- Wieszak na ręcznik papierowy TYP7

- Mata ochronna
 - Zestaw mata i podkłady ochronne pod twarz
 - Podkład higieniczny na twarz z wycięciem
 - Rolka bibułowa na stół do masażu
-
- Bananek
 - Pas do stabilizacji

Bibliografia:

1. Sarı et al., Computed tomographic evaluation of lumbar spinal structures during traction, *Physiotherapy Theory and Practice* 21 (2005) 311
2. Jioun Choi et al., Influences of spinal decompression therapy and general traction therapy on the pain, disability, and straight leg raising of patients with intervertebral disc herniation, *J. Phys. Ther. Sci.* Vol. 27, No. 2, 2015
3. Beattie et al., Outcomes After a Prone Lumbar Traction Protocol for Patients With Activity-Limiting Low Back Pain: A Prospective Case Series Study, *Arch Phys Med Rehabil* Vol 89, February 2008

Informacje:

Szerokość: 70 cm
Długość: 202 cm
Masa: 128 kg
Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -10 - +80°
Linia: Galaxy
Liczba sekcji: 3
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 48 - 98 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg
Funkcja pionizacji: Nie
Podgrzewane leże: Tak
PAS: Tak
Hallotronic: Tak
Smart4Arms: Nie
Regulacja przesuwu sekcji tylnej: 15 cm

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 14 - Limonka - Standard, 15 - Błękitny - Standard
Galaxy trakcja - wersje: Galaxy Traction T3 - T3.F0, Galaxy Traction T3 - T3.F4